


froggymouth




Corrija la función de deglución y
la posición de la lengua en tan
solo 15 minutos al día

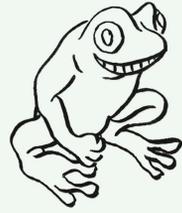

Le han prescrito un FroggyMouth

FroggyMouth es un dispositivo que corrige la función de deglución creando un nuevo patrón: durante la deglución, los dientes entran ligeramente en contacto con los labios y la lengua se sitúa en el paladar.

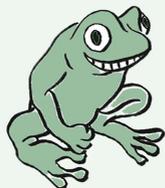

El profesional de la salud que le atiende le ha dado un dispositivo FroggyMouth




Deje atrás los malos hábitos



Con un enfoque muy sencillo



Con tan solo 15 minutos al día, mientras mira la TV

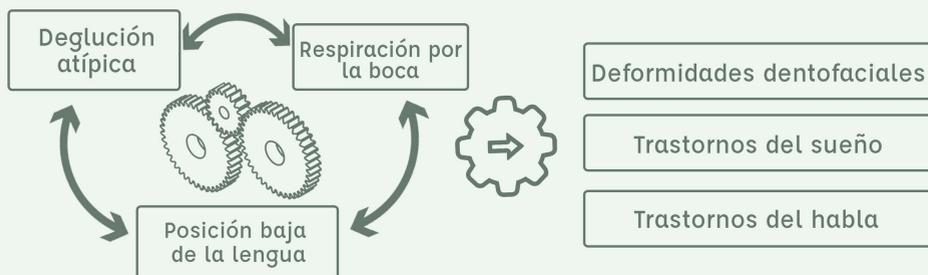

Todos estos problemas clínicos tienen un elemento en común: están relacionados, de diferentes maneras, con la posición de la lengua. De hecho, el 40 % de la población puede seguir experimentando una deglución atípica con interposición de la lengua incluso después de que ya hayan salido los primeros molares. Este hecho da lugar a una mala función lingual y a una alteración de las funciones orofaciales que acaban afectando al crecimiento óptimo.

Al corregir la disfunción de la deglución, FroggyMouth contribuye a:



reducir **la duración del tratamiento**



mejorar **la calidad de los resultados**



reducir **el riesgo de recaída.**

¿Cómo funciona FroggyMouth?

El dispositivo FroggyMouth debe usarse 15 minutos al día mientras mira la TV. Mientras el niño utiliza el dispositivo, el patrón de deglución cambia automáticamente sin interrumpir la calidad del sueño, lo que es muy importante.

Es imprescindible seguir de forma estricta y precisa **las normas de uso de FroggyMouth**



Debe utilizarse **15 minutos** al día para adoptar rápida y eficazmente una nueva forma de tragar. Seguir esta rutina es esencial.



Utilízelo mientras mira **la televisión** o al estar frente a la computadora. De esta forma garantizará que el plano visual horizontal no se altere y se eviten las posturas en las que es posible inclinar la cabeza.



El paciente debería mantener **su atención en la pantalla** a fin de que la nueva forma de tragar se adopte automática y naturalmente.

¿Cómo se debe utilizar FroggyMouth?



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

Si nota que su hijo traga de una forma incorrecta (contrayendo la barbilla y los labios), muéstreselo ante un espejo para que empiece a ser consciente de ello. Cuando relaje los músculos faciales, indíquele que es así como debe tragar.

Es necesario recordar 3 aspectos

-  Es normal experimentar un aumento de saliva cuando se utiliza el dispositivo, especialmente durante los primeros días de uso. Si esta situación perdura más de 10 días, comuníquese al profesional de la salud.
-  Debe utilizar el dispositivo **TODOS** los días.
-  Si extrae el dispositivo de su boca durante el período de 15 minutos, **empiece de nuevo**.

Cómo limpiar el dispositivo



Limpie el dispositivo con su cepillo y pasta de dientes. Séquelo completamente y vuelva a guardarlo en su caja.

Si desea obtener más información sobre el funcionamiento de este dispositivo, consulte la página web:

www.froggy-mouth.com

¡Siga los consejos del profesional de la salud!

FroggyMouth es un dispositivo médico fabricado 100 % en Francia.

No contiene látex ni ftalatos, cuenta con el marcado CE y está certificado por la FDA. Todos nuestros dispositivos están empaquetados en ESAT (Establecimientos y servicios de ayuda mediante el trabajo).

No dude en consultarnos cualquier duda que pueda tener y comparta su experiencia en Facebook o por correo aquí: contact@froggy-mouth.com