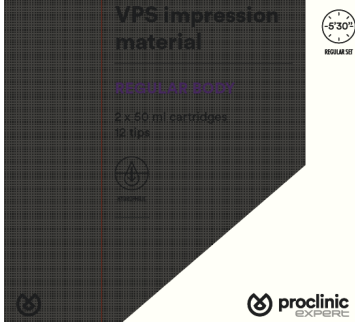



# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_003
SILICONA REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PRO	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>SILICONA REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	15152	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Silicona regular de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color Base: Morado Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 2' Tiempo en boca · 3'30'' Tiempo total 5'30''	
<b>EMBALAJE</b>	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
<b>CADUCIDAD</b>	3 años	
<b>FINALIDAD</b>	Realizar impresiones dentales de precisión.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	

# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_004
SILICONA LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01
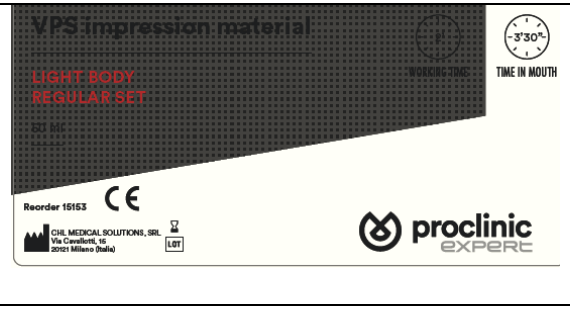
<b>PRODUCTO</b>	<b>SILICONA LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	15153	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Silicona ligera regular de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenoletoxilado.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color Base: Coral Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 2' Tiempo en boca · 3'30'' Tiempo total 5'30''	
<b>EMBALAJE</b>	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
<b>CADUCIDAD</b>	3 años	
<b>FINALIDAD</b>	Realizar impresiones dentales de precisión.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	


# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	<b>Code:</b> TDS_004
LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	<b>Date:</b> 29/Abr/16
CHL	<b>Version:</b> 01

<b>PRODUCT</b>	<b>LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCE</b>	15153	
<b>COMPANY</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASSIFICATION</b>	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	Addition silicone light bodied consistency elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Colour Base: Coral Colour Catalyst: Grey light Working time 2' Setting time 3'30'' Total working time 5'30''	
<b>PACKAGING</b>	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years	
<b>INTENDED OF USE</b>	Perform precision dental impressions.	
<b>SECURITY</b>	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
<b>TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	


# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_005
SILICONA LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>SILICONA LIGHT BODY FAST SET 2x50ml y 4x50 PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	15154 15155	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Silicona ligera de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color Base: Naranja Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 1'30'' Tiempo en boca · 2'30'' Tiempo total 4''.	
<b>EMBALAJE</b>	2u.x 50 ml cartuchos y 4u.x50 ml 12 puntas en cada set	
<b>CADUCIDAD</b>	3 años	
<b>FINALIDAD</b>	Realizar impresiones dentales de precisión.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	

# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	<b>Code:</b> TDS_005
LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC	<b>Date:</b> 29/Abr/16
CHL	<b>Version:</b> 01

<b>PRODUCT</b>	<b>LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC</b>	
<b>REFERENCE</b>	15154  15155	
<b>COMPANY</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASSIFICATION</b>	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	Light bodied consistency Silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Colour Base: Orange Colour Catalyst: Grey light Working time 1' 30'' Setting time 2'30'' Total working time 4'	
<b>PACKAGING</b>	2u.x 50 ml and 4x50 ml cartridges 12 tips	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years	
<b>INTENDED OF USE</b>	Perform precision dental impressions.	
<b>SECURITY</b>	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
<b>TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	


# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_006
SILICONA ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>SILICONA ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	15156	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Silicona ligera de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color Base: Amarillo Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 1'30'' Tiempo en boca · 2'30'' Tiempo total 4'	
<b>EMBALAJE</b>	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
<b>CADUCIDAD</b>	3 años	
<b>FINALIDAD</b>	Realizar impresiones dentales de precisión.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	


# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	<b>Code:</b> TDS_006
ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	<b>Date:</b> 29/Abr/16
CHL	<b>Version:</b> 01

<b>PRODUCT</b>	<b>ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCE</b>	15156	
<b>COMPANY</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASSIFICATION</b>	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	Light bodied consistency silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Colour Base: Yellow Colour Catalyst: Grey light Working time 1' 30'' Setting time 2'30'' Total working time 4'	
<b>PACKAGING</b>	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years	
<b>INTENDED OF USE</b>	Perform precision dental impressions.	
<b>SECURITY</b>	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
<b>TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	

# CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	<b>Code:</b> TDS_003
REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	<b>Date:</b> 29/Abr/16
CHL	<b>Version:</b> 01

<b>PRODUCT</b>	<b>REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCE</b>	15152	
<b>COMPANY</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
<b>CLASSIFICATION</b>	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	Regular Silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Colour Base: Purple Colour Catalyst: Grey light Working time 2' Setting time 3'30'' Total working time 5'30''	
<b>PACKAGING</b>	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years	
<b>INTENDED OF USE</b>	Perform precision dental impressions.	
<b>SECURITY</b>	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
<b>TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	