




neodisher® IP Spray

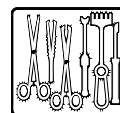

Producto para el mantenimiento de instrumental

Aerosol



Ámbito de aplicación:

- Mantenimiento manual de instrumental quirúrgico, especialmente de instrumental articulado

Características:

- Se utiliza para el mantenimiento específico de instrumental quirúrgico tras el tratamiento mecánico cuando el mantenimiento del instrumental articulado efectuado por la lavadora desinfectadora resulta insuficiente o cuando la lavadora desinfectadora no realiza la dosificación de neodisher IP Konz
- Si se emplea neodisher IP Spray conforme al uso previsto, no se verá afectada la biocompatibilidad del instrumental tratado (evaluación biológica de productos sanitarios según la norma EN ISO 10993-1)

Características especiales:

- A base de aceite blanco medicinal (aceite de parafina altamente refinado para uso farmacéutico)
- No provoca incrustaciones
- Según se ha demostrado, no perjudica una posterior esterilización por vapor o aire caliente

Uso y dosificación:

Pulverizar el instrumental con neodisher IP Spray de forma selectiva, en especial, la zona de las articulaciones. Mantener el envase aerosol lo más vertical posible al pulverizar. Para pulverizar bandejas perforadas, utilizar el envase aerosol con el tubo de pulverización acortado. A tal efecto, retirar el tubo de la boquilla y cortarlo con unas tijeras a la longitud deseada. A continuación, volver a introducir el tubo de pulverización en la boquilla por el lado recortado, para que así el resultado de pulverización sea óptimo y no se vea mermado por el canto cortado.

Instrucciones de uso generales:

- Solo para uso profesional.

- El tratamiento deberá realizarse mediante los procedimientos validados adecuados de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y las normativas vigentes.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de tratamiento del fabricante del producto sanitario según los requisitos de la norma UNE EN ISO 17664.

Componentes:

Aceite de parafina para uso farmacéutico en virtud de la Farmacopea Europea, tensioactivos no iónicos, gas propulsor: propano/butano

Marcado CE:

neodisher IP Spray cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios. Si se produce un incidente grave con este producto, se deberá notificar al fabricante y a las autoridades competentes.

Instrucciones de almacenamiento:

Durante el almacenamiento deberá mantenerse una temperatura de entre 5 y 30 °C. Si se hace correctamente, puede almacenarse durante 3 años. Caducidad: véase impresión en la base del envase aerosol detrás del símbolo .

Advertencias de peligro y seguridad:

La información sobre seguridad y medio ambiente se encuentra en las fichas técnicas de seguridad. Podrá encontrarlas en www.drweigert.com en el apartado «Servicios/Descargas».

Deseche el recipiente completamente vacío y cerrado. Para la eliminación de los residuos del producto: véase la ficha técnica de seguridad. El envase está sometido a presión. Proteger de la luz del sol y de temperaturas superiores a 50 °C. Incluso una vez vacío, no abrirlo empleando la fuerza ni incinerarlo.

www.area-medica.com

MB 4304/3-1

Versión: 01/2020

93 409 53 00



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com