

NUEVO

Variolink® Esthetic

El composite de cementación estética

“Estética
sorprendentemente
sencilla”




ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Variolink® Esthetic

ESTÉTICA EXCEPCIONAL

Variolink Esthetic es un composite de polimerización dual y foto para cementación permanente de restauraciones de cerámica y composites. El cemento está inspirado en los composites de cementación estéticos Variolink II y Variolink Veneer, que durante muchos años han demostrado su valor en clínica.

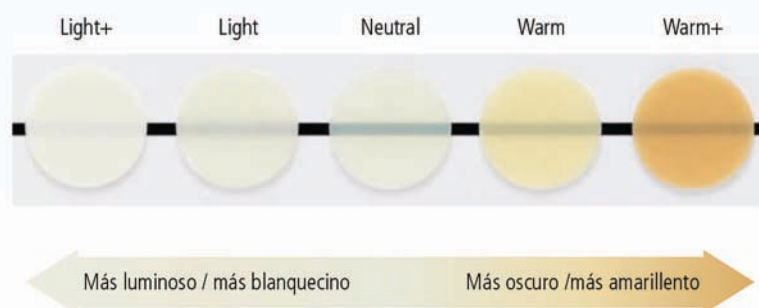

El concepto Efecto de Color

Con el fin de ajustar con precisión el color de la restauración con la dentición natural adyacente, Ivoclar Vivadent ha desarrollado el nuevo, equilibrado y conciso sistema de Efecto de Color. El color "Neutral" presenta el más alto nivel de translucidez y por tanto permite conseguir una cementación de la restauración de color neutra. Los colores "light" y "light+", presentan un efecto de luminosidad gradual, mientras que los colores "Warm" y "Warm+" presentan un oscurecimiento gradual de la cerámica de recubrimiento y del composite de la restauración. Los colores están denominados según sus efectos. Esto simplifica la selección del material de cementación apropiado en el uso clínico.

Excelente estabilidad del color



Variolink Esthetic presenta una excepcional estabilidad del color. Esto es posible gracias al patentado, fotoiniciador Ivocerin®, cien por cien libre de co-iniciadores basados en amina.

Variolink Esthetic constituye la base para unos resultados estéticos duraderos y fiables. Incluso si es sometido a una luz intensa o a un ambiente húmedo, Variolink Esthetic no está sujeto a cambios visibles de su color.

La excepcional estética de Variolink Esthetic es además reforzada por su real fluorescencia similar a la de los dientes naturales. Además, el composite de cementación es muy resistente al desgaste, lo que garantiza una buena calidad marginal de la restauración.



Variolink Esthetic Suntest
(acc. a ISO 4049),
Lado izquierdo expuesto al sol



Referencia Variolink Esthetic Después de sumergirlo
en agua


UN SISTEMA PARA EL ÉXITO CLÍNICO



Adhesión óptima

El material adhesivo Adhese® Universal con su formato exclusivo VivaPen® complementa de manera ideal a Variolink Esthetic en la cementación de las restauraciones estéticamente exigentes. Adhese Universal se aplica de forma rápida y conveniente en la boca del paciente. Es compatible con todas las técnicas de grabado y permite al dentista reaccionar con flexibilidad a la situación clínica que tenga entre manos. La tolerancia de Adhese Universal asegura una gran fuerza de adhesión y minimiza el riesgo de sensibilidad postoperatoria. Naturalmente, Variolink Esthetic también puede ser utilizado en combinación con los adhesivos Syntac® y Excite® F.

Resistencia al cizallamiento después de polimerización dual – técnica de auto-grabado sobre esmalte y dentina después de 10 000 ciclos térmicos

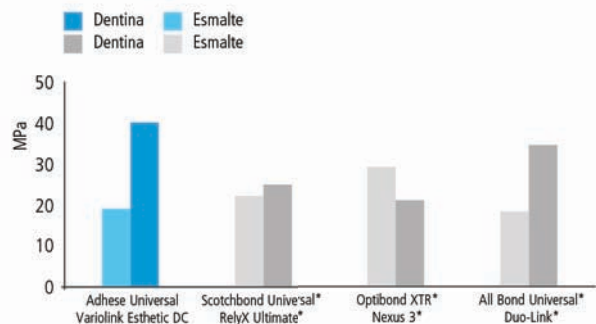


* No son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG
Fuente: R&D Ivoclar Vivadent, AG, Schaan, 2014

Adhesión a las restauraciones comprobada

En combinación con el innovador y clínicamente probado primer universal Monobond® Plus, Variolink Esthetic muestra una excelente fuerza de adhesión sobre restauraciones hechas de materiales de cerámica vítrea tales como IPS e.max® CAD/Press o IPS Empress® CAD/Esthetic. Además, la composición patentada de metacrilatos funcionales asegura una unión buena y fiable para restauraciones de composites o materiales cerámicos.



Resistencia a la tracción en IPS e.max (LS₂) cerámica vítrea Inicialmente y después del paso del tiempo

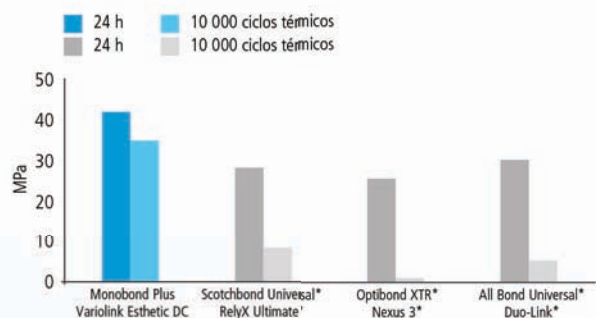

* No son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG
Fuente: R&D Ivoclar Vivadent, AG, Schaan, 2014

FORMATO DE SUMINISTRO



Variolink Esthetic LC System Kit (solamente fotopolimerizable)

- 3 Jeringas Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
- 3 Jeringas Variolink Esthetic Try-In Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
- 1 Jeringa Total Etch, 2 g
- 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, o 1 frasco 5 g
- 1 Frasco Monobond Plus, 5 g
- 1 Jeringa Liquid Strip, 2,5 g
- Accesorios varios

666433WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666065WW con Adhese Universal Frasco, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (polimerización dual)

- 3 Jeringas Automix Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
- 3 Jeringas Variolink Esthetic Try-in Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
- 1 Jeringa Total Etch , 2 g
- 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml or 1 frasco 5 g
- 1 Frasco Monobond Plus, 5 g
- 1 Jeringa Liquid Strip, 2,5 g
- Accesorios varios

666434WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666125WW con Adhese Universal Frasco, 5 g

Variolink Esthetic LC Refill (solamente fotopolimerizable)

- 1 Jeringa, 2 g (en el color seleccionado)
- 5 puntas de aplicación
- 666126WW Light+
- 666127WW Light
- 666128WW Neutral
- 666129WW Warm
- 666130WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (polimerización dual)

- 1 Jeringa automix, 5 g (en el color seleccionado)
- 10 puntas de aplicación
- 666117WW Light+
- 666118WW Light
- 666119WW Neutral
- 666120WW Warm
- 666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (polimerización dual)

- 1 Jeringa Automix, 9 g (en el color seleccionado)
- 15 puntas de aplicación
- 666122WW Light
- 666123WW Neutral
- 666124WW Warm

Variolink Esthetic Try-In Paste Refill

- 1 Jeringa, 1,7 g (en el color seleccionado)
- 5 puntas de aplicación
- 666067WW Light+
- 666113WW Light
- 666114WW Neutral
- 666115WW Warm
- 666116WW Warm+

Accesorios

- 645951 Puntas de aplicación, cortas, puntiagudas, 15 unidades
- 559224 Puntas de aplicación Variolink, 20 unidades



Una solución para salir del laberinto de los cementos

El Cementation Navigation System es una aplicación multimedia de Ivoclar Vivadent que ofrece a los odontólogos orientación práctica y directrices para la selección del mejor material de fijación para cada caso.


www.cementation-navigation.com

USO SENCILLO

Fácil eliminación del exceso de material

En el pasado, los composites de cementación eran bastante complejos de usar debido a la dificultad que presentaba la eliminación del exceso de material. Ahora, Variolink Esthetic establece un nuevo punto de referencia en este sentido.

La inteligente combinación del fotoiniciador reactivo Ivocerin y un filtro de sensibilidad a la luz permiten al profesional dental retirar fácilmente el exceso de material después de una exitosa pre-polimerización con luz. Ivocerin asegura una rápida y fiable polimerización del material durante el proceso final de fotopolimerización.

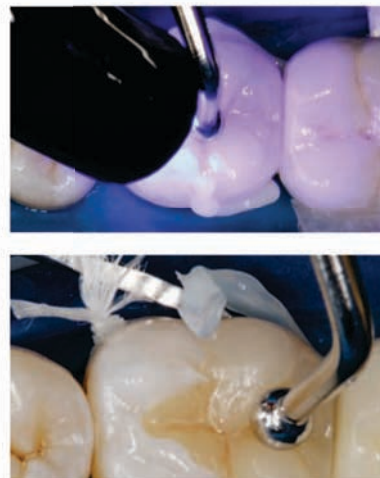

Versátil, consistencia adaptable


El controlador de viscosidad combina de manera óptima el buen comportamiento de la fluidez del material con su estabilidad.

El cemento se extrae fácilmente de la jeringa. El exceso de material fluye con facilidad cubriendo por completo el hueco destinado para el cemento, pero permanece estable en la articulación de la cementación para que pueda ser fácilmente retirado.

Radiodiagnósticos impresionantes

Variolink Esthetic continúa la tradición de su predecesor Variolink II en términos de radiopacidad.

La alta radiopacidad del material hace que sea más fácil detectar el exceso de cemento y caries secundarias.

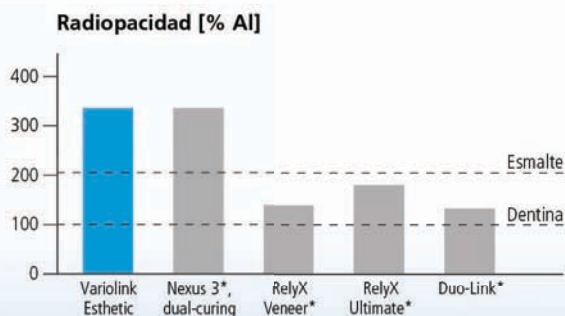

* No son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG
Fuente: R&D Ivoclar Vivadent, AG, Schaan, 2014 (medido según ISO 4049)



Prótesis fija

Variolink® Esthetic forma parte de la categoría de productos "Prótesis Fija". Los productos de esta categoría cubren el procedimiento involucrado en la fabricación de restauraciones de prótesis fijas – desde la temporización hasta los cuidados posteriores. Los productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un procesamiento y una aplicación exitosos.



ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



La solución completa que cubre todas las indicaciones

- Materiales altamente estéticos y resistentes para la técnica de inyección y CAD/CAM.
- Cerámicas únicas de disilicato de litio (LS₂) y óxido de circonio para restauraciones que van desde delgadas carillas a puentes de largo recorrido.
- Flexibilidad de cementación: adhesivo, auto-adhesivo y convencional

Fluor Protector S

El barniz protector con fluoruro



Barniz protector homogéneo dispensado en tubo

- Fluoridación inmediata del esmalte
- Depósito de fluoruro de alto rendimiento
- Sabor agradable

¿Le gustaría saber más acerca de la categoría de productos de "Prótesis Fija"? Simplemente comuníquese a su persona de contacto de Ivoclar Vivadent o visite www.ivoclarvivadent.es para más información.

Ivoclar Vivadent AG
 Benderstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
 Carretera de Fuencarral nº24
 Portal 1 – Planta Baja
 28108-Alcobendas (Madrid), España
 Tel. +34 91 375 78 20
 Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

es/2014-10-09

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation