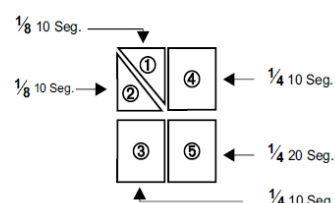
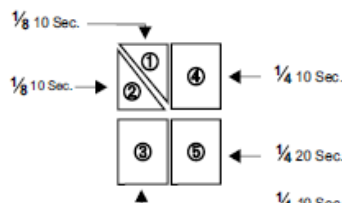


FICHA TÉCNICA

CEMENTO FOSFATO ZINC BESTDENT		
REFERENCIAS	20494	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario de clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Cemento a base de óxido de zinc y fosfato de aluminio para la cementación permanente de incrustaciones, coronas, puentes y bandas de ortodoncia. Color marfil.	
COMPOSICIÓN	Óxido de Zinc y fosfato de aluminio hidratado.	
PRESENTACIÓN	32 g de polvo + 15 ml de líquido.	
FINALIDAD	Cementación de incrustaciones, coronas, puentes, y bandas de ortodoncia.	
TECNICA DE MEZCLADO	TÉCNICA DE MEZCLADO. CONTROL DE TIEMPO DE APLICACIÓN. (A) Relación Polvo-Líquido. Las mezclas espesas secan más rápido que las mezclas ligeras. (B) Mientras más rápido es agregado el polvo al líquido, el fraguado es más rápido. (C) El mezclado prolongado tiende a alargar el tiempo de fraguado. 	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto. INSTRUCCIONES DE USO: (A) Use una loseta de vidrio fresca (72°F / 22°C) y una espátula no corrosiva, para mezclar el CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC. (B) Use una relación de 1.3 a 1.4 g de POLVO a 0.85 g. de LIQUIDO. (C) Divida el POLVO en cuatro (4) porciones iguales. Divida una (1) de estas cuatro porciones en dos (2) partes. (D) ① Con una espátula agregue 1/8 de la porción dentro de la cantidad completa de líquido por 10 segundos. ② Agregue el otro 1/8 de la porción y mezcle por 10 segundos. ③ ④ Agregue consecutivamente (2) de los cuartos de porción, con una espátula 10 segundos después de cada adición. ⑤ Agregue el último cuarto de porción y mezcle la cantidad completa por 20 segundos. Esto le dará 1 minuto total de tiempo de mezclado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacenar a temperaturas arriba de 24°C. Cierre los envases después de su uso.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT PHOSPHATE ZINC CEMENT		
REFERENCE	20494	
MANUFACTURER	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Zinc oxide and aluminum phosphate based cement for permanent cementation of inlays, crowns, bridges and orthodontic bands. Ivory color.	
COMPOSITION	Zinc Oxyde and aluminum phosphate hydrated.	
PRESENTATION	32 g of powder + 15 ml of liquid.	
INTENDED USE	Cementation in inlay onlyas, crowns, bridges and orthodontic bands.	
MIXING TECHNIQUE	MIXING TECHNIQUE SETTING - TIME CONTROL (A) Powder-Liquid ratio. Thick mixes set faster than thin mixes. (B) The faster the powder is added to the liquid, the quicker the set. (C) Prolonged mixing tends to lengthen setting time. 	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions. INSTRUCTIONS FOR USE: (A) Use a cool mixing slab (72°F, 22°C) and a non-corrosive spatula, for mixing ZINC PHOSPHATE CEMENT. (B) Use a ratio of 1.3 to 1.4 gr. of POWDER to 0.85 g. of LIQUID. (C) Divide POWDER into four (4) equal portions. Divide one (1) of these quarter portions into two (2) parts. (D) ① Spatulate 1/8 of the portions into the entire amount of the liquid for 10 seconds. ② Add the other 1/8 of the portions and mix for 10 seconds. ③ ④ Add consecutively two (2) of the quarter portions, spatulating 10 seconds after each addition. ⑤ Add the final quarter portion and mix the entire amount for 20 seconds. This will give 1 minute total mixing time.	
STORAGE AND TRANSPORT	Do not storage in temperatures above 24°C. Close containers after use.	