

DURGUIX



MODELOS & ANTAGONISTAS / **YESOS**



YESO DE ALTA CALIDAD

- YESO PARA USO GENERAL DEL LABORATORIO
- INDICADO PARA LA FABRICACIÓN DE MODELOS EN LA TÉCNICA ACRÍLICA Y ESQUELÉTICA, MODELOS ANTAGONISTAS Y EN LA FORMACIÓN DE CUBETAS DE IMPRESIÓN

YESO TIPO 3 • ISO 6873



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

DURGUIX

YESO PIEDRA DURO MEJORADO TIPO 3.

VENTAJAS

- Consistencia **tixotrópica**
- Óptima definición de detalles
- Superficies muy lisas y duras

MODO DE EMPLEO

Proporción polvo/agua:	100 g / 28-30 ml
Temperatura de trabajo:	20-23°C
Mezclado: Mecánico bajo vacío:	30 seg.
Manual:	60 seg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tiempo de trabajo:	5 min.
Fraguado Inicial: (Test Vicat según ISO 6873)	9 min.
Fraguado Final: (Test Vicat según ISO 6873)	12 min.
Tiempo de fraguado:	30 min.
Expansión de fraguado (2 h.):	0.16 %
Resistencia a la compresión (1 h.):	32 N / mm ²

FORMATO DE VENTA



Eco-Pack 10 Kg (5 x2 kg)

Rosa	Amarillo	Azul	Terracota
1140-100	1140-101	1140-102	-

Bidón 20 kg

Rosa	Amarillo	Azul	Terracota
1140-200	1140-201	1140-202	1140-206

Saco 25 kg

Rosa	Amarillo	Azul	Terracota
1140-260	1140-261	1140-262	1140-265

Caja 25 kg

Rosa	Amarillo	Azul	Terracota
1140-280	1140-281	1140-282	1140-286

Prueba 100 g

Rosa	Amarillo	Azul	Terracota
1140-M10	1140-M11	1140-M12	1140-M15



PRODUCTOS ASOCIADOS


TENSIO-SIL

Reductor de tensiones para alginato y silicona. Modelos sin poros.



QUICK-ROCK

Yeso especial articulación.

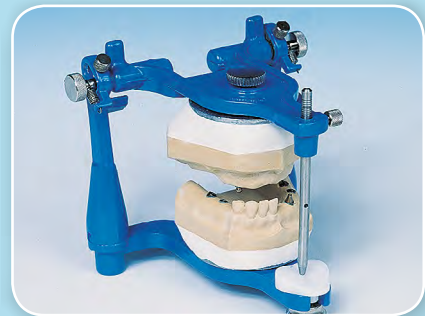


protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Fax +34 972 525 586

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com