

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

---

Estimados clientes, estimados usuarios:

Mediante este escrito queremos informarles sobre la nueva actualización de software para su VITA Easyshade V, y rogarles que instalen la actualización en su aparato siguiendo las instrucciones detalladas a continuación.

Si tuvieran cualquier pregunta en relación con esta actualización, sírvanse dirigirse a su servicio de asistencia técnica regional encargado de los aparatos VITA. Además, pueden ponerse en contacto con el servicio técnico para aparatos de VITA a través de:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 o bien -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Correo electrónico: [instruments-service@vita-zahnfabrik.com](mailto:instruments-service@vita-zahnfabrik.com)

## 1. Requisitos para la descarga y la instalación

- Acceso a Internet
- Ordenador Windows con Bluetooth o adaptador Bluetooth del surtido del VITA Easyshade V

## 2. Procedimiento general

Duración prevista de la actualización: 8 min, aprox.


1. Descargar de Internet la actualización de software.
2. Activar Bluetooth en el VITA Easyshade V y conectarlo al PC.
3. Seleccionar la actualización de software (.exe); se ejecutará la detección de dispositivos.
4. Seleccionar el VITA Easyshade V deseado haciendo clic.
5. Se abrirá la ventana de actualización.
6. Iniciar la actualización haciendo clic en "Start".
7. Durante la actualización no se deben realizar mediciones, etc. mediante el VITA Easyshade V.

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

## 3. Instrucciones para la actualización

### 3.1 Descargar la actualización de software


- Descargue el archivo .exe desde <https://www.vita-zahnfabrik.com/es/VITA-Easyshade-26937,27568.html>
- Descargas → Actualizaciones
- Haga clic en la bandera del país para descargar la actualización de software.
- Seleccione **“Guardar como”**.

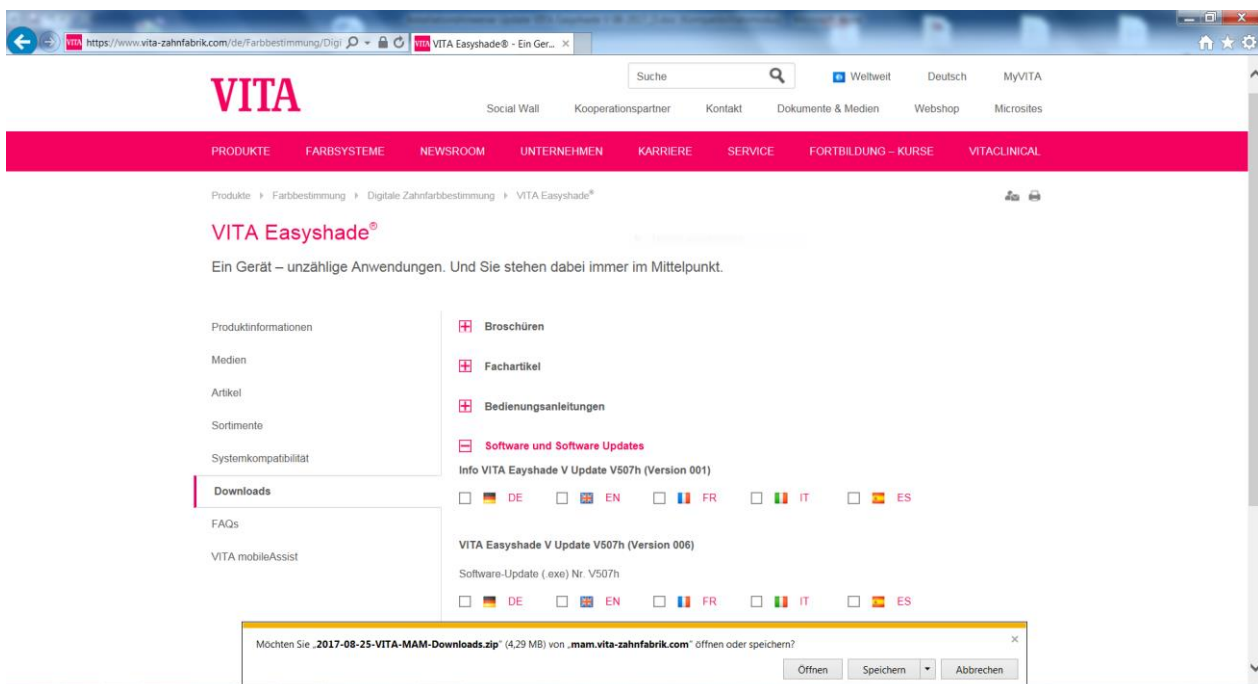


Guarde el archivo en la carpeta deseada.

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

Tras la descarga, haga clic en **“Abrir carpeta”**.

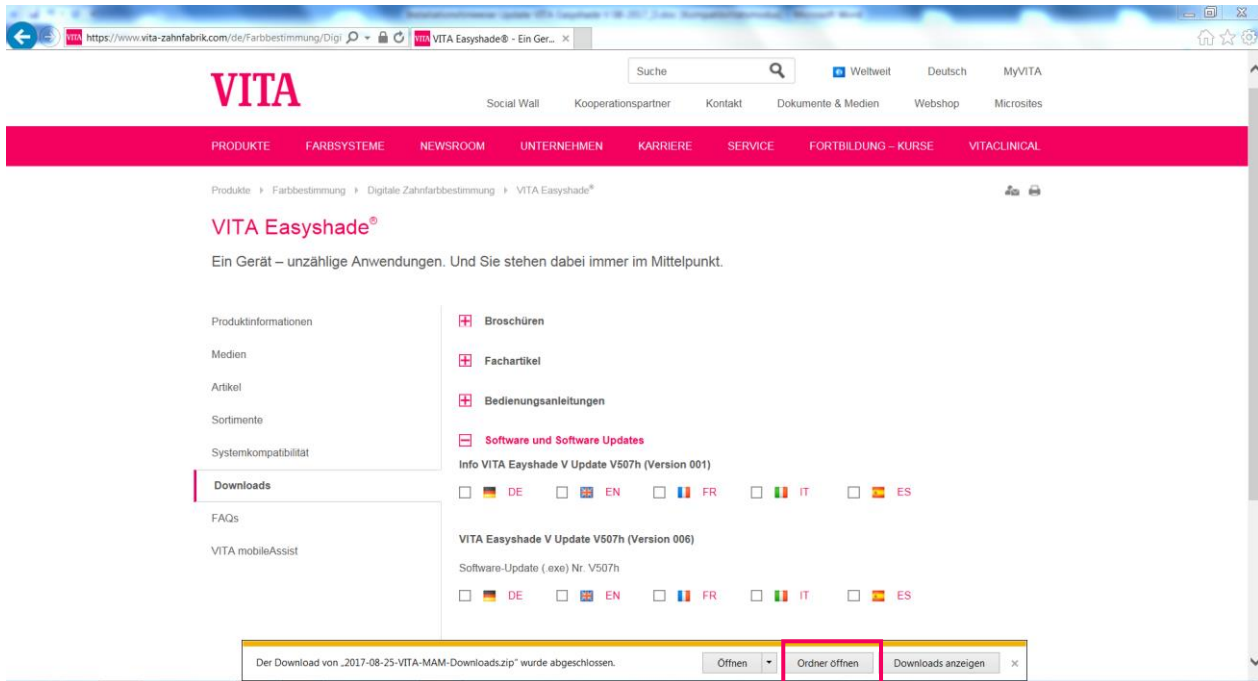


Abra la carpeta haciendo clic con el botón derecho del ratón. Seleccione **“Extraer ficheros”**.

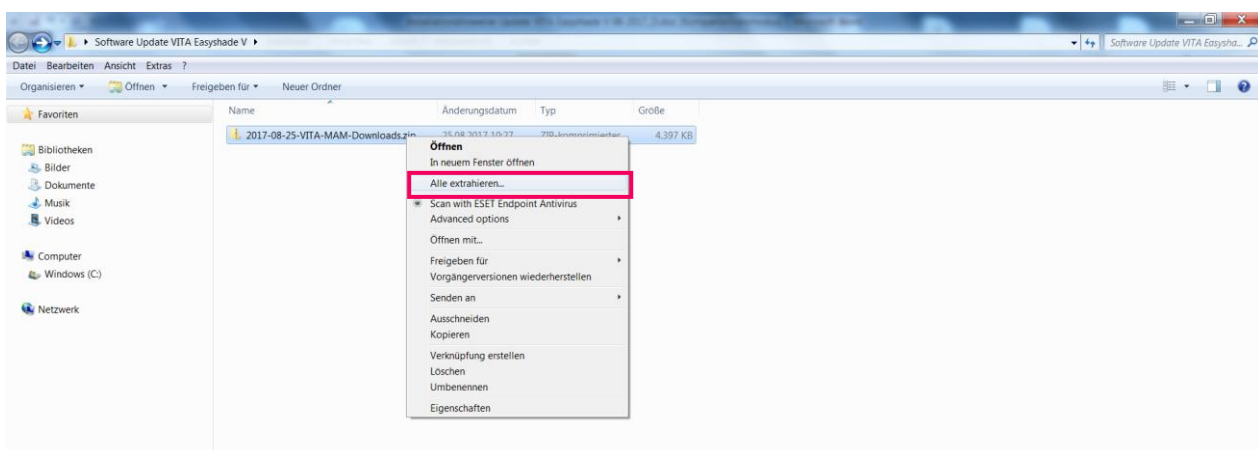


# VITA Easyshade<sup>®</sup> V: instrucciones para actualizaciones de software

---


Seleccione **“Aceptar”**.

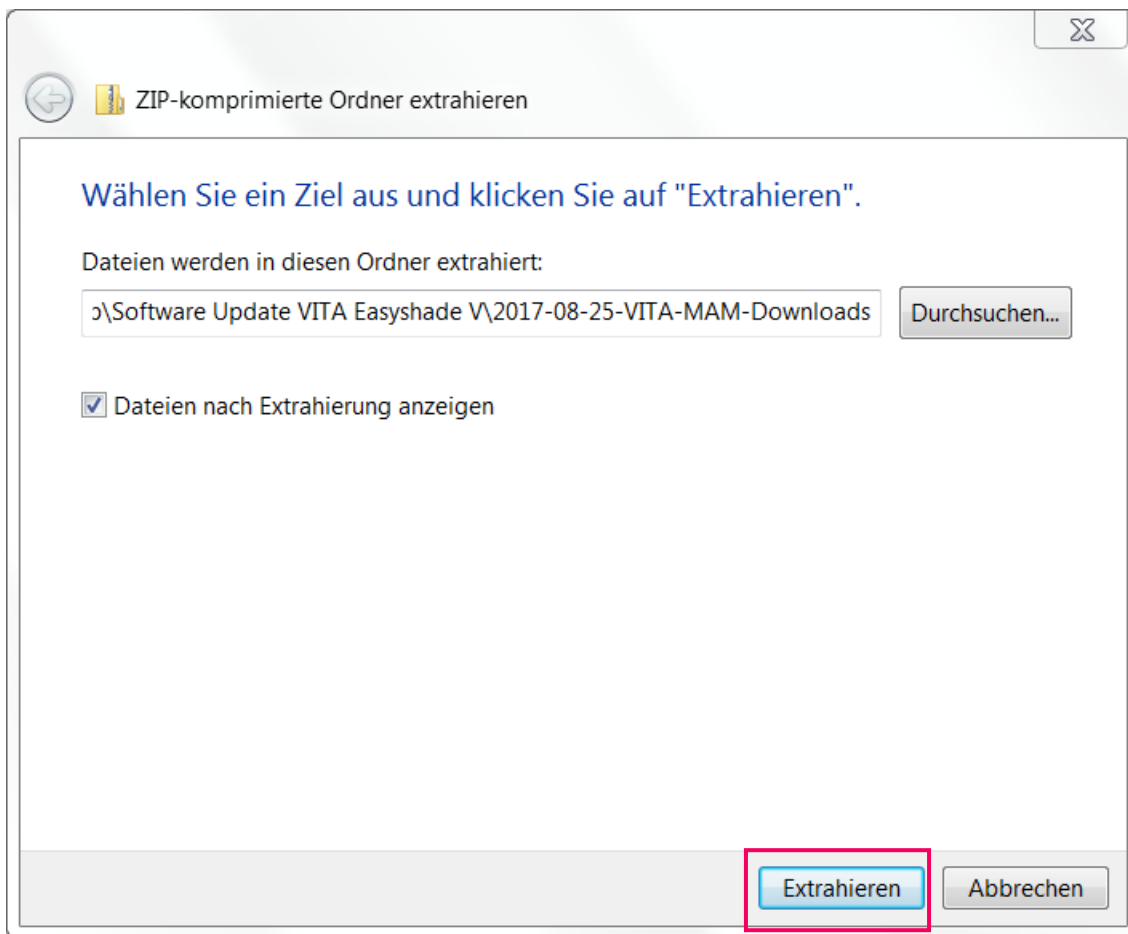

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

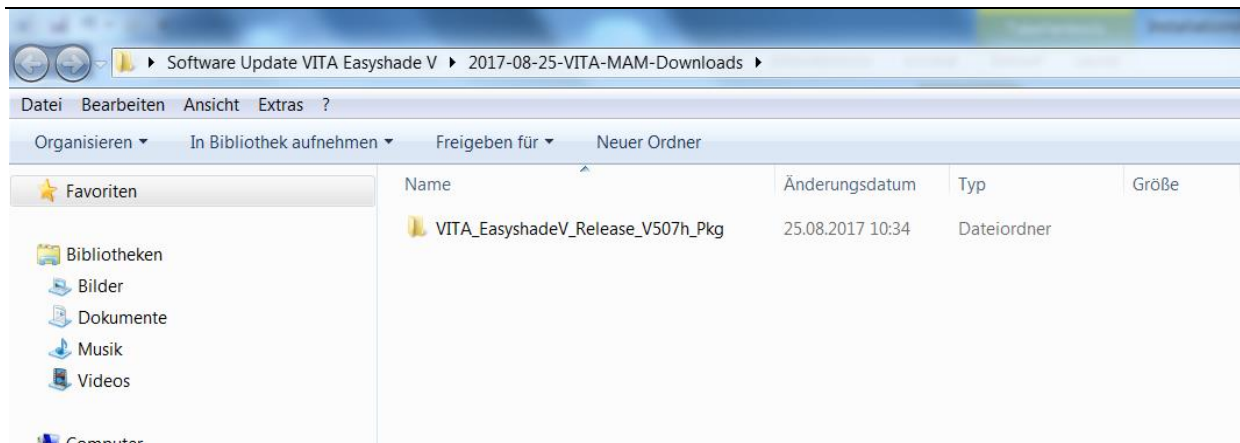


Abra la carpeta haciendo doble clic.

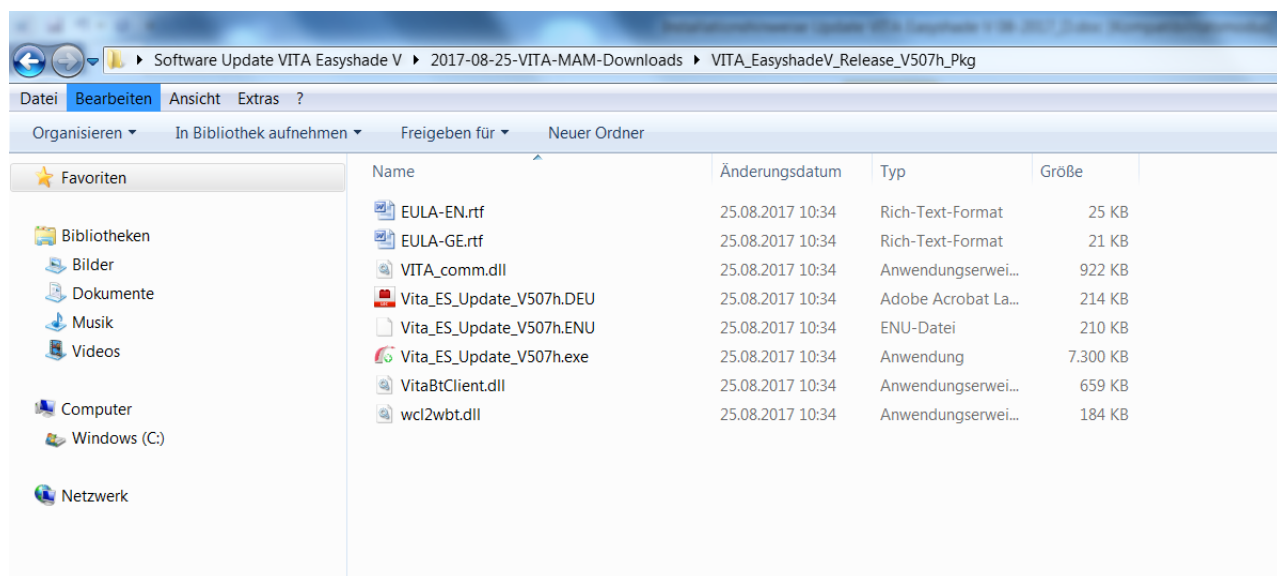

## 3.2 Activar Bluetooth en el VITA Easyshade V


Acceda a los ajustes de Bluetooth de su VITA Easyshade V. Para activar el Bluetooth, deslice hacia la derecha el mando deslizante superior de Bluetooth para Windows/Android. Se abrirá automáticamente el símbolo del candado y el VITA Easyshade V permanecerá detectable durante dos minutos. Si el símbolo del candado estuviera cerrado, puede tocarlo para volver a hacer detectable el VITA Easyshade V.

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

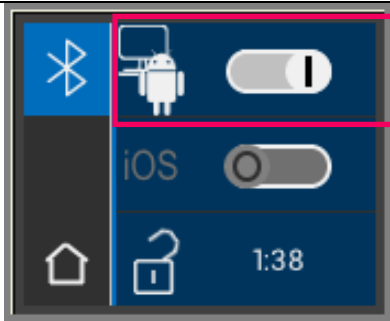


## 3.3 Iniciar el programa de actualización

Inicie el programa haciendo doble clic en “VITA\_ES\_Update\_Vxxxx.exe” (xxxx= número de versión actual).

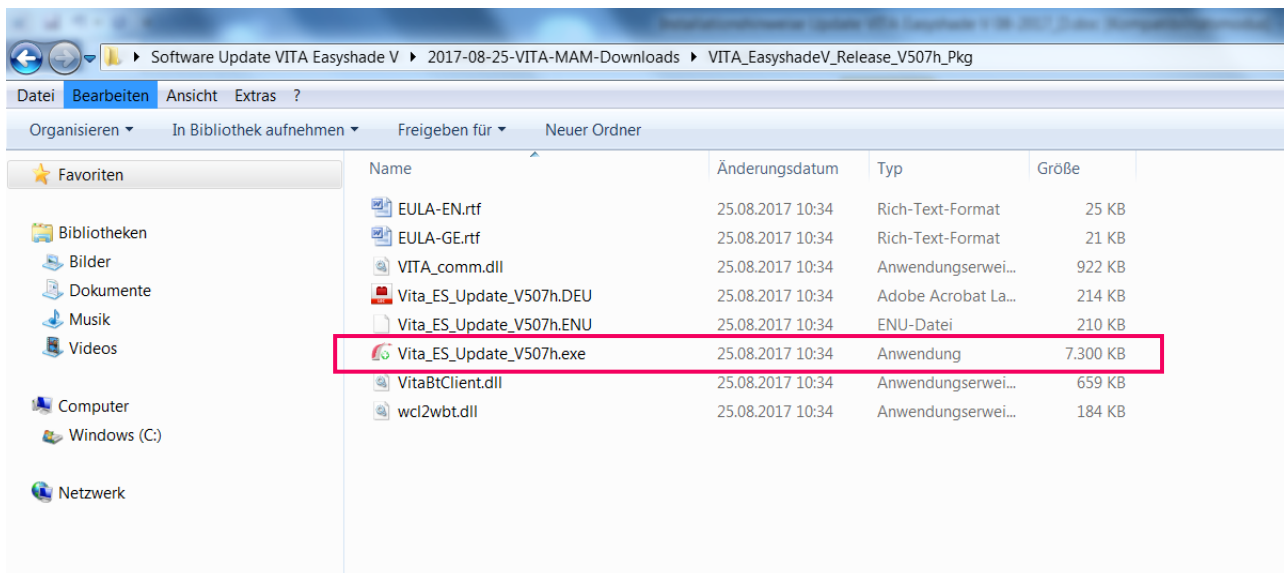


A continuación, haga clic en “Ejecutar”.

# VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

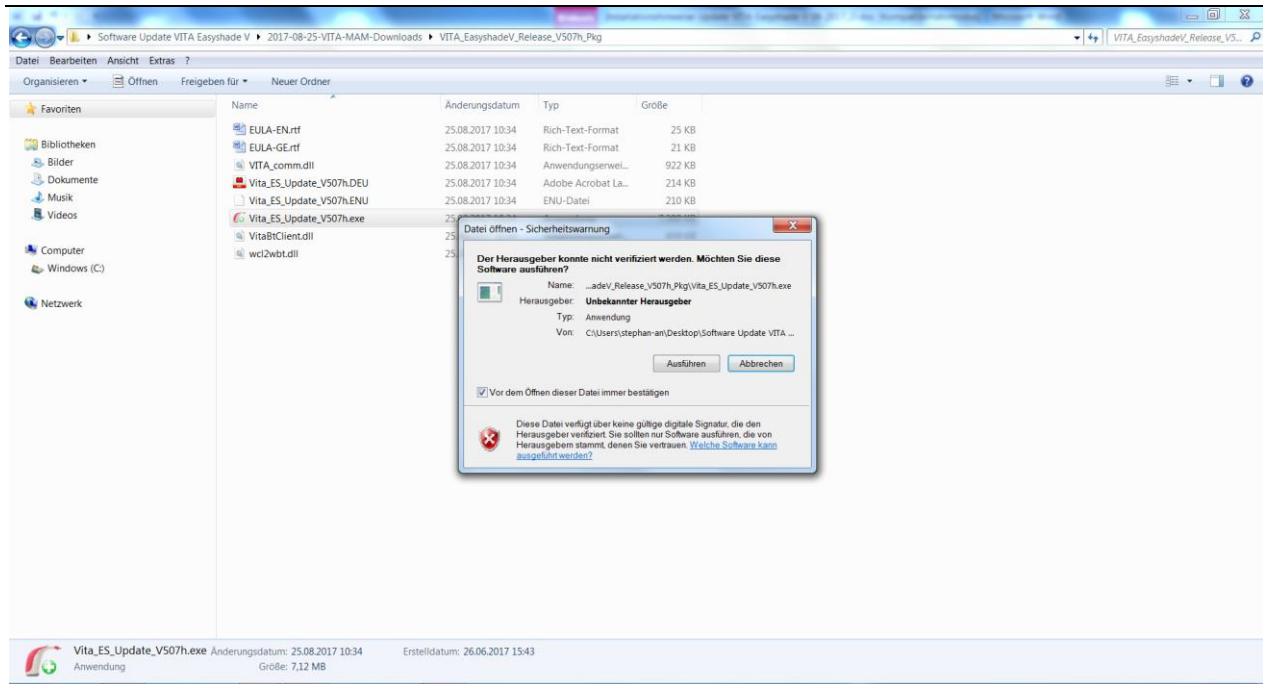


Haga clic en “**Buscar**” para detectar los aparatos VITA Easyshade V disponibles.

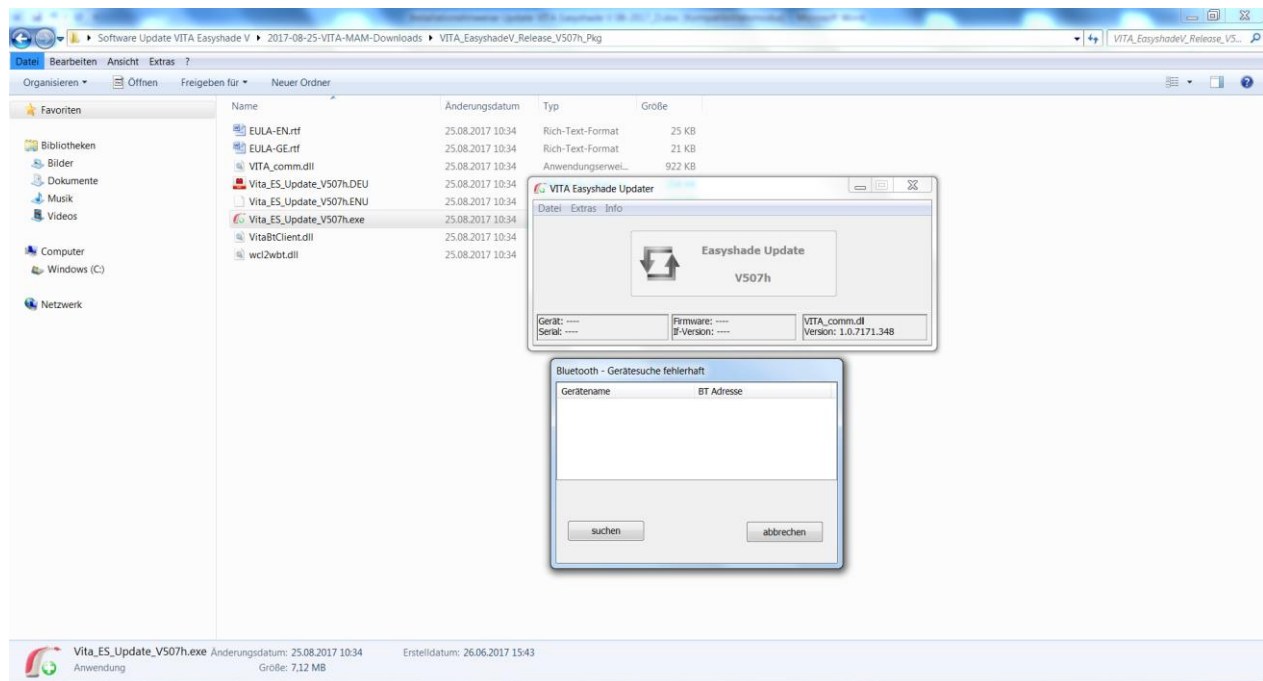

Haga clic en el VITA Easyshade V deseado para seleccionarlo. En caso de que solo haya un VITA Easyshade V disponible, la selección tendrá lugar automáticamente.

# VITA Easyshade<sup>®</sup> V: instrucciones para actualizaciones de software

---

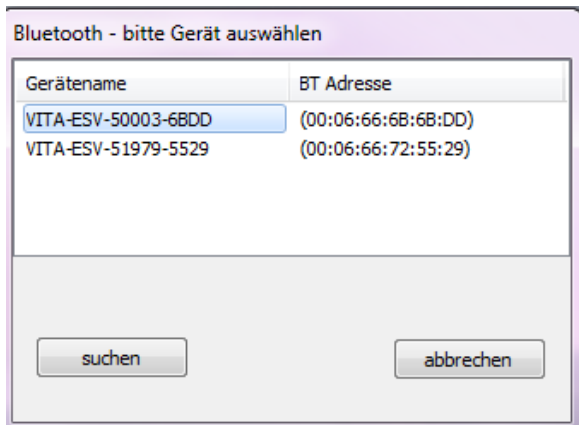


Se abrirá la ventana de actualización. Haga clic en **“Iniciar”** para iniciar la actualización.  
Duración prevista: 8 min, aprox.

Durante la actualización, la pantalla del VITA Easyshade V permanece oscura y no puede manejarse. No realice mediciones, etc. mediante el VITA Easyshade V durante el proceso.



## VITA Easyshade® V: instrucciones para actualizaciones de software

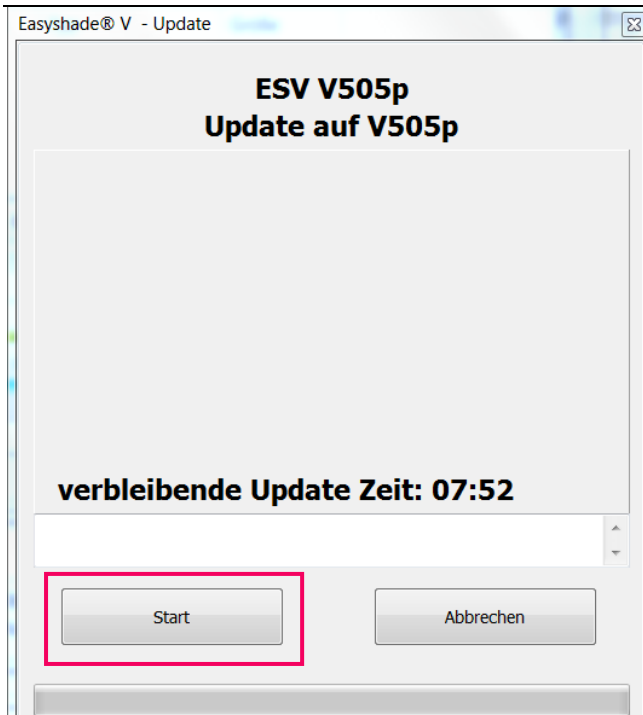

Cerrar el programa una vez completada la actualización. Reiniciar el VITA Easyshade V.