

Instalación

ZF/ET97 es un aspirador apto para uso en laboratorios odontotécnicos para aspiración de polvo.

¡Atención! Este aspirador **no es adecuado** para la succión de líquidos. Si accidentalmente se aspira algún líquido, apague inmediatamente el dispositivo; asegúrese de que el motor no haya sufrido daños antes de volver a conectar la alimentación. Ante cualquier duda consultar a un técnico cualificado.

Para instalar el aspirador siga la secuencia aquí indicada:

- Quitar cualquier protección utilizada para el transporte;
- Coloque el aspirador debajo o cerca del banco de trabajo teniendo cuidado de dejar suficiente espacio alrededor del dispositivo para el movimiento del aire;
- Conectar la entrada de aire del aspirador, en la parte superior, al punto de aspiración del banco de trabajo mediante un tubo de aire adecuado (es decir, tubo de aspiración flexible 40 mm.);
- Inserte el cable de alimentación primero en el enchufe del aspirador (parte superior) y luego en la toma de pared (¡Importante! La instalación eléctrica donde se debe conectar este dispositivo debe cumplir con todas las normas sobre protección a tierra, según la normativa italiana CEI 64- 8)
- Encienda el interruptor principal y verifique que la succión en el punto de aspiración sea correcta.

¡ATENCIÓN! Si ocurriera algún problema o anomalía, apague inmediatamente el interruptor general y desconecte el enchufe de la toma de pared. Llame a un técnico calificado para la instalación o reparación.

Uso y mantenimiento

Evite mantener el aspirador funcionando con la bolsa de polvos llena o con la entrada de aire de la mesa de trabajo obstruida.

Para limpiar el aspirador, basta con utilizar un paño normal humedecido con agua o alcohol. ¡Atención! Antes de limpiar el aspirador, apague el interruptor principal y desconecte el enchufe de la toma de pared.

El aspirador ZF/ET97 no necesita mantenimiento. Solo se requiere reemplazar periódicamente la bolsa de polvos para mantener la eficiencia de la aspiración. Se recomienda verificar el nivel de aspiración al final de cada jornada de trabajo, especialmente después de trabajos con gran producción de polvo. ¡Atención! Antes de reemplazar la bolsa de polvos, apague el interruptor principal y desconecte el enchufe de la toma de pared.

La nueva bolsa de polvos se puede pedir al proveedor del aspirador.

Procedimiento para el reemplazo de la bolsa de polvos

- Oíre $\frac{3}{4}$ de vuelta en sentido antihorario ambas perillas del panel frontal y retírelas; • extraiga la placa de tope y tire hacia abajo de la bolsa de polvos para sacarla; • siga la secuencia opuesta para instalar la nueva bolsa de polvos;
- Vuelva a colocar el panel frontal y gire completamente ambas perillas en el sentido de las agujas del reloj.

Especificaciones (mod. ZF/ET97)

Voltaje nominal	:	220-230V
Frecuencia	:	50/60 Hz
Poder absorbido	:	800W
Clase de aislamiento	:	I
Tipo de dispositivo	:	B
modo de uso	:	Continuo
Fusible de seguridad (*)	:	10A 250V~fast (5x20 mm.)
Nivel de presión acústica	:	68 Db (A) max (a 1 metro del suelo)
Tamaño	:	385 x 295 v 400 mm
Peso	:	15 Kg

(*) Para sustituir el cable de alimentación desenchufe fusible de la toma de corriente y del aparato, extraer con un destornillador la caja de fusibles del enchufe del aspirador, quitar los fusibles y sustituir los quemados por otros nuevos del mismo tipo. , reemplace todas las piezas siguiendo el procedimiento inverso.


Reglamento

La firma ZIL FOR SRL – Via Fossa, 37 – 31051 Follina (Tv) – Italia – declara que el aspirador ZF/ET97 producido por ella y descrito en las presentes instrucciones sigue las siguientes normas:

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de prestación de

mercado de equipos eléctricos destinados a ser utilizados dentro de ciertos límites de voltaje;

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética

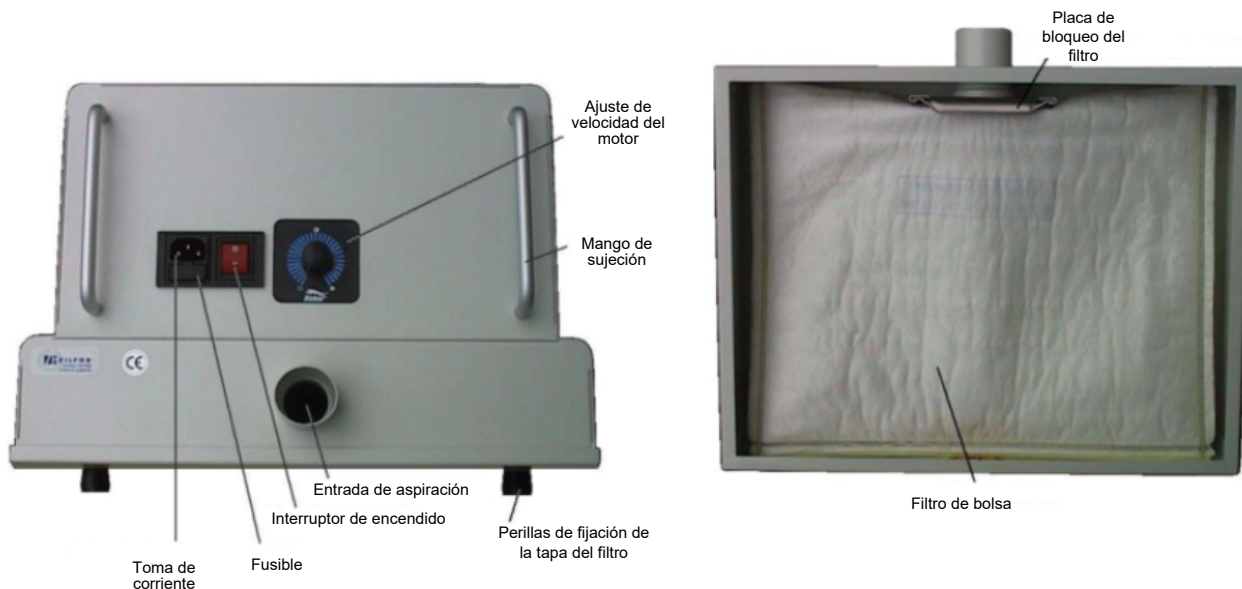

ZIL PARA SRL

Vía Fossa, 37
31051 Follina (TV)
Italia

Teléfono: ++39 0438 970308
Fax: ++39 0438 971853 ZIL
PARA SRL

