

FLEXISTONE® Plus

DE
Gebrauchsanweisung

Isolierende Silikonmasse für die Zahntechnik,
additionsvernetzend, niedrigviskos, hohe Endhärte



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

1. Dosieren und Anmischen

Beigefügten Anmischbecher bis zum 1. Teilstrich mit Base, bis zum 2. Teilstrich mit Katalysator auffüllen (Abb. 1). **FLEXISTONE® Plus** homogen mit Spatel vermischen, bis einheitliche Farbe erreicht ist (Abb. 2).

2. Applikation


Angemischtes **FLEXISTONE® Plus** mit einem Spatel von den Interdentalräumen beginnend gleichmäßig in einer Stärke von ca. 3 mm auftragen. Vor dem Aushärten von **FLEXISTONE® Plus** mit einem Wachsmesser Unterschnitte anbringen. Dadurch ist eine gute Verbindung zum Gips gewährleistet (Abb. 3). Haftkristalle sind nicht erforderlich.

3. Ausbetten

Nach der Polymerisation wie gewohnt ausbetten und **FLEXISTONE® Plus** durch Abziehen entfernen.

Wichtige Verarbeitungshinweise

- **FLEXISTONE® Plus** – Ränder nicht dünn auslaufen lassen, sondern als kleine Stufe formen, um ein Ablösen im Küvetten – Konter zu vermeiden.
- Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Abbindung.
- Behälter nach Gebrauch sofort sorgfältig verschließen!
- Vernetzte Materialien sind chemisch beständig – Flecken auf Kleidung vermeiden!
- **FLEXISTONE® Plus** wird für das IVOCLEAR SR-Ivocap-System empfohlen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

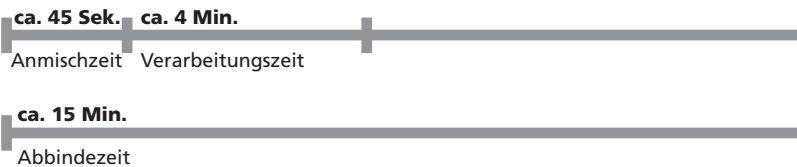

Anwendungsbereiche:

- Isoliermasse auf A-Silikonbasis für das Injektionsverfahren und die Küvetten-Pressstechnik. Zur isolierenden Einbettung und zum Schutz von Kunststoff- oder Porzellanzähnen. Wird in einem Arbeitsgang dünn auf Zähne oder Wachs aufgetragen, bildet einen dünnen, extrem harten Isolierfilm zur Fixierung der Zahnreihe.

Technische Daten:

- **Dosierung:** 1:1
- **Produktfarbe:** **FLEXISTONE® Plus Base:** blau
FLEXISTONE® Plus Katalysator: weiß
- **Anmischzeit:** ca. 45 Sek.
- **Verarbeitungszeit:** ca. 4 Min.*
- **Abbindezeit:** ca. 15 Min.*
- **Endhärte:** 85 Shore A
- **Verarbeitung:** Bei 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % rel. Luftfeuchtigkeit
- **Lagerung:**



* ab Mischbeginn bei 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten.

Bestellinformation:

FLEXISTONE® Plus
Standardpackung **02383**
2 Plastikflaschen 2 x 160 ml
Base + Catalyst 1:1
2 Plastikständer
1 Anrührschale

Eco-Pack **02329**
Kunststoff-Flaschen
2 x 1000 ml
4 Anrührschale

FLEXISTONE® Plus

FR

Mode d'emploi

Masse isolante pour l'art dentaire, à base de silicone, polymérisée par addition, à basse viscosité, d'une haute dureté finale



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Dosage et mélange

Remplir la jatte de mélange jusqu'à la 1^{er} marque avec la base, ensuite ajouter le durcisseur jusqu'à la 2^e marque (Fig. 1). Mélanger le **FLEXISTONE® Plus** homogènement à l'aide d'une spatule, jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme (Fig. 2).

2. Application

Appliquer en épaisseur de 3 mm environ le **FLEXISTONE® Plus** mélangé à l'aide d'une spatule sur les dents en résine ou de porcelaine, commençant chez les espaces interdentaires. Pendant la période de prise du **FLEXISTONE® Plus** des rainures seront taillées à l'aide d'un couteau à cire (Fig. 3), ainsi assurant une bonne adhésion au plâtre. Des cristaux de rétention ne sont pas nécessaires.

3. Démouflage

Après la polymérisation démoufler comme d'habitude et retirer le **FLEXISTONE® Plus**.

Renseignements de travail importants

- Eviter des bords effilés – afin d'empêcher une séparation dans le contre-moufle, profiler les bords de **FLEXISTONE® Plus** en façon d'une petite arête.
- Des températures élevées accélèrent, des températures basses retardent le temps de prise.
- Bien fermer les flacons aussitôt après l'usage!
- Les matériaux polymérisés sont chimiquement résistants – éviter de tâches sur les habits!
- Le **FLEXISTONE® Plus** est recommandé pour l'utilisation avec le système SR-Ivoclar de la maison IVOCLAR.
- Suivre les indications de la fiche de données de sécurité!

45 sec. env. 4 min. env.



15 min. env.



Champs d'application:

■ Masse isolante à base de silicones «A» pour l'application selon la technique à l'injection et du pressage à moufle. Pour l'isolation et la protection des dents acryliques ou de porcelaine pendant le revêtement. Application facile sur les dents artificielles ou sur la cire, en une seule opération. La masse rend un film isolant fin et très solide, ainsi garantissant la fixation des dents pendant le pressage.

Caractéristiques techniques:

- **Dosage:** 1:1
- **Couleurs du produit:** **FLEXISTONE® Plus** base: bleu **FLEXISTONE® Plus** durcisseur: blanc
- **Temps de mélange:** 45 sec. env.
- **Temps de manipulation:** 4 min. env.*
- **Temps de prise:** 15 min. env.*
- **Dureté finale:** 85 Shore A
- **Application:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % d'humidité relative.
- **Stockage:**



* dès initiation du mélange à 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% d'humidité relative. Des températures élevées accélèrent, des températures basses retardent les temps indiqués.

Informations à la commande:

FLEXISTONE® Plus
Présentation standard 02383
2 Flacons en plastique à 160 ml
base + durcisseur 1:1
2 Supports
1 Jatte de mélange

Présentation économique 02329
2 Flacons en plastique à 1000 ml
base + durcisseur 1:1
4 Jattes de mélange

FLEXISTONE® Plus

ES

Modo de empleo

Masa aislante para la técnica dental, a base de siliconas, polimerizada por adición, de baja viscosidad, de elevada dureza final



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Dosificación y mezcla

Llenar la base hasta la primera marcación del receptáculo de mezcla, entonces añadir el endurecedor hasta la segunda marcación (Fig. 1). Mezclar el **FLEXISTONE® Plus** homogéneamente mediante una espátula hasta que se obtenga un colorido uniforme (Fig. 2).

2. Aplicación

Mediante una espátula aplicar uniformemente en un espesor de unos 3 mm el **FLEXISTONE® Plus** mezclado desde los lugares interdientales sobre los dientes de resina o de porcelana. A fin de asegurar una buena adhesión al yeso, durante el período de endurecimiento de **FLEXISTONE® Plus** unas socavaduras se realizan mediante una espátula para cera (Fig. 3). No es necesario utilizar cristales retentivos.

3. Desmuflado

Después de la polimerización desmuflar como de costumbre y retirar el **FLEXISTONE® Plus**.

Instrucciones importantes de procesamiento

- Evitar bordes delgados – para prevenir una separación en la contra-mufla, modelar los bordes de **FLEXISTONE® Plus** en forma de un escalón pequeño.
- Temperaturas más elevadas acortan el tiempo de fraguado, más bajas lo prolongan.
- ¡Las botellas deben cerrarse muy bien después de utilizarlas!
- ¡Los materiales polimerizados son químicamente estables – evite que contacten con su ropa dejando manchas!
- El **FLEXISTONE® Plus** se recomienda para la aplicación mediante el sistema SR-Ivocap de la casa IVOCCLAR.
- ¡Observar la ficha de datos de seguridad!

aprox. 45 seg. aprox. 4 min.



aprox. 15 min.



Campos de aplicación:

■ Masa aislante a base de siliconas "A" para el empleo en la técnica de inyección y del prensado de mufla.

Para el aislamiento y la protección de dientes de material plástico o de porcelana durante el revestimiento.

Aplicación fácil sobre los púnticos o la cera, en una sola operación. La masa presta una película delgada y muy sólida, así garantizando la fijación de los púnticos durante el procedimiento de prensado.

Características técnicas:

- **Dosificación:** 1:1
- **Color del producto:** **FLEXISTONE® Plus** base: azul
- **FLEXISTONE® Plus** endurecedor: blanco
- **Tiempo de mezcla:** aprox. 45 seg.
- **Tiempo de manejo:** aprox. 4 min.*
- **Tiempo de fraguado:** aprox. 15 min.*
- **Dureza final:** 85 Shore A
- **Manejo:** A 23°C ± 2°C, 50 ± 5 % humedad relativa
- **Almacenaje:**



* a partir del inicio de la mezcla a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% humedad relativa. Temperaturas más elevadas acortan los tiempos indicados, más bajas los prolongan.

Información para el pedido:

FLEXISTONE® Plus
Presentación normal **02383**
2 Botellas de materia plástica, c/u de 160 ml
base + endurecedor 1:1
2 Soportes
1 Receptáculo de mezcla

Presentación económica **02329**
2 Botellas de materia plástica, c/u de 1000 ml
base + endurecedor 1:1
4 Receptáculos de mezcla

FLEXISTONE® Plus

GB

Instructions for use

Insulating silicone material for use in dental technology, addition curing, low viscosity, high final hardness



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Dosage and mixing

Fill mixing bowl with base to the first marking, then with catalyst to the second one (Fig. 1). Spatulate **FLEXISTONE® Plus** homogeneously, until a uniform colour is achieved (Fig. 2).

2. Application


Beginning from the interdental spaces, apply mixed **FLEXISTONE® Plus** uniformly with a spatula reaching a thickness of approximately 3 mm. Prior to setting of **FLEXISTONE® Plus** provide undercuts by means of a wax-knife (Fig. 3). Thus an optimum bonding to the plaster is ensured. No retention crystals are necessary.

3. Deflasking

After polymerisation deflask as usual and remove **FLEXISTONE® Plus**.

Important working hints

- Avoid thin-tapered borders of **FLEXISTONE® Plus** – cutting of a small shoulder is recommended to prevent separation in the flask-counter.
- Increased temperatures accelerate, decreased temperatures retard the setting time.
- Containers should be tightly closed immediately after each use!
- Cured materials are chemically inert – spots on clothing should be avoided!
- **FLEXISTONE® Plus** is recommended for the IVOCLAR SR-Ivocap-System.
- Please follow the instructions of the safety data sheet!

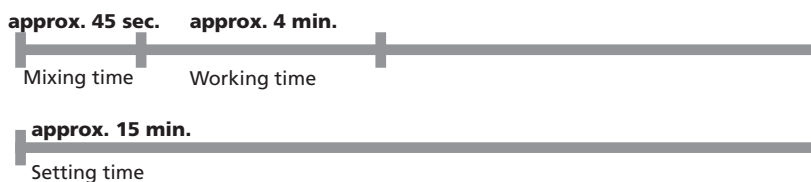

Indications for use:

- Insulating material, A-silicone based, for the application with injecting technique and flask pressing technique. For the insulation and protection of acrylic or porcelain teeth during investing. Can be easily applied in one single procedure onto acrylic teeth and wax, forming a thin, very hard insulating layer for fixing of teeth during pressing.

Technical data:

- **Mixing ratio:** 1:1
- **Colour code:** **FLEXISTONE® Plus** base: blue **FLEXISTONE® Plus** catalyst: white
- **Mixing time:** approx. 45 sec.
- **Working time:** approx. 4 min.*
- **Setting time:** approx. 15 min.*
- **Final hardness:** 85 Shore A
- **Application:** At 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5 % rel. humidity
- **Storage:**



* from beginning of mixing at 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5% rel. humidity. Increased temperatures accelerate, decreased temperatures retard the indicated times.

Ordering information:

FLEXISTONE® Plus
Standard packing **02383**
2 Plastic bottles, ea. 160 ml
base + catalyst 1:1
2 Stands
1 Mixing bowl

Eco-packing **02329**
2 Plastic bottles, ea. 1000 ml
base + catalyst 1:1
4 Mixing bowls

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
Telefon: 072 43/510-0 · Fax: 072 43/510-100
www.detax.de · post@detax.de

Made in
Germany

05/2019

FLEXISTONE® Plus

Two chemical systems available

recommended by
IVOCLAR for the
SR-Ivoclar-System

A-silicone based



C-silicone based



FLEXISTONE® Plus

IT

Istruzioni per l'uso

Massa isolante per l'odontotecnica, a base siliconica, polimerizzata per addizione, bassa viscosità, alta durezza finale



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Dosaggio e miscelazione

Riempire il mortaio per l'impasto allegato fino alla prima tacca con la base, poi aggiungere il catalizzatore fino alla seconda tacca (Fig. 1). Impastare il **FLEXISTONE® Plus** omogeneamente con una spatola fino ad ottenere un colore uniforme (Fig. 2).

2. Applicazione

Iniziando dagli spazi interdentali, applicare con l'aiuto della spatola il **FLEXISTONE® Plus** in uno strato uniforme di circa 3 mm sui denti di resina o ceramica. Prima dell'indurimento di **FLEXISTONE® Plus** creare con un coltello da cera dei sottosquadri (Fig. 3) per garantire una buona aderenza al gesso del controstampo. Non sono necessari i cristalli ritentivi.

3. Smuffolaggio

Dopo la polimerizzazione, smuffolare come d'abitudine e togliere lo strato di **FLEXISTONE® Plus**.

Indicazioni importanti per l'utilizzo

- Non creare bordi sottili con il **FLEXISTONE® Plus**, ma formare piccoli gradini per evitare un distacco dal gesso del controstampo.
- Le temperature più elevate accelerano, le temperature più basse allungano il tempo di presa.
- Chiudere accuratamente i flaconi subito dopo l'utilizzo!
- I siliconi polimerizzati sono chimicamente inerti – evitare di macchiare gli abiti!
- Il **FLEXISTONE® Plus** è raccomandato per l'utilizzo con il sistema SR-Ivocap della ditta IVOCCLAR.
- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza!

circa 45 sec. circa 4 min.



circa 15 min.



Campo d'impiego:

■ Massa isolante a base di silicone "A" per la tecnica d'iniezione e di pressaggio in muffola. Per il rivestimento isolante e protettivo dei denti in resina o ceramica. Viene applicato in un unico passaggio lavorativo sui denti o sulla cera, crea un film isolante estremamente duro che blocca i denti durante il pressaggio della resina.

Dati tecnici:

- **Dosaggio:** 1:1
- **Colore del prodotto:** **FLEXISTONE® Plus** base: blu **FLEXISTONE® Plus** catalizzatore: bianco
- **Tempo di miscelazione:** circa 45 sec.
- **Tempo di lavorazione:** circa 4 minuti*
- **Tempo di presa:** circa 15 minuti*
- **Durezza finale:** 85 Shore A
- **Lavorazione:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% umidità relativa
- **Conservazione:**



* dall'inizio di miscelazione a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% umidità relativa. Temperature più alte abbreviano e temperature più basse allungano i tempi indicati.

Specifiche di ordinazione:

FLEXISTONE® Plus

Confezione

standard **02383**

2 Flaconi di plastica a 160 ml
base + catalizzatore 1:1
2 Supporti
1 Mortai per l'impasto

Confezione

economica **02329**

2 Flaconi di plastica a
1000 ml
base + catalizzatore 1:1
4 Mortai per l'impasto