

El INFANT TRAINER™ es parte del Sistema TRAINER™

Es bien conocido que la mayoría de los niños no desarrollan correctamente sus maxilares ni sus caras. Esto produce un apiñamiento dental y caras poco atractivas. Las dietas blandas, los chupones, la succión del pulgar, las mamilas (biberones) así como la respiración bucal contribuyen a un mal desarrollo facial y al apiñamiento dental. Los grupos raciales que no comían alimentos procesados, ni tenían acceso a los chupones o a otras facilidades modernas, tampoco presentaban alergias. Como resultado desarrollaban bien sus arcos dentales, los cuales eran amplios y sin apiñamientos, las caras eran más atractivas y presentaban menos caries. El INFANT TRAINER™ tiene tres principales funciones: proporciona un ejercicio suave para los maxilares y músculos faciales (a través de cuatro cojines de aire independientes); retiene la lengua y la guía adecuadamente durante la deglución (lengüeta); y fomenta la respiración nasal.

El Efecto Miofuncional™

(The Myofunctional Effect™)

Todos los aparatos del Sistema TRAINER™ han sido diseñados para re-entrenar la musculatura oral (Efecto Miofuncional™). Esto favorece la corrección de los maxilares y de los dientes. Cuando éstos problemas no son tratados; los hábitos miofuncionales tales como la deglución atípica, la respiración bucal y el empuje lingual serán perjudiciales para el correcto desarrollo facial y dental, así como cualquier ortodoncia futura.



INSTRUCCIONES DE USO

Uselo diariamente 2 veces al día de 10 a 20 minutos, esto es suficiente para que proporcione un efecto positivo en los músculos masticatorios del niño, durante la deglución y la respiración. Es importante que lo use diariamente durante este período crítico de su crecimiento.



Coloque el Infant Trainer™ en la boca.



Muerda suavemente el Infant Trainer™.



Mantenga los labios juntos y respire por la nariz.

Ayuda al desarrollo de los dientes y maxilares del niño en crecimiento

EDADES DE 2 A 5



726C ESP 11/06

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. PUEDE SER USADO TODA LA NOCHE PARA LOGRAR MAYORES BENEFICIOS.

EL INFANT TRAINER™ HA SIDO FABRICADO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO Y HULE TPR (TERMOPLÁSTICO). No contiene PVC o Latex



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

www.myoresearch.com

a BETTER way

EUROPA - EEUU - AUSTRALIA

infant™ TRAINER

WORLDWIDE PATENTS: 5,259,762; 5,624,257; 6,567,151; 6,761,142;
6,076,186; 6,911,149 (PATENT PENDING); 10,639,149 (PATENT PENDING)

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

El crecimiento y desarrollo normal de su niño es tan importante como su salud y su educación. Los niños se desarrollan más rápidamente entre las edades de los 2 a los 5 años. Durante este período, tiene lugar el 70% del crecimiento de la cara y los maxilares del niño. Desafortunadamente, la mayoría de ellos no experimentan un desarrollo facial y de los maxilares correcto, dando como resultado caras poco atractivas y dientes apiñados.

Los niños naturalmente desean masticar los objetos. Es un impulso importante que nos asegura un ejercicio para alcanzar un desarrollo correcto. Las razas primitivas comían alimentos duros, como huesos y vegetales crudos para

alcanzar este desarrollo. Nuestros niños frecuentemente no tienen acceso a este tipo de estímulo y por lo tanto experimentan problemas relativos al crecimiento de sus caras y maxilares. El instinto infantil de masticar objetos es un estímulo para el crecimiento maxilar, pero nuestras dietas modernas no resuelven esto de manera adecuada.

Los niños desarrollan hábitos como la succión digital, la deglución atípica y la respiración bucal. Todos estos hábitos resultan en un crecimiento facial inadecuado, en una mandíbula retrusiva y apiñamiento dental. La intervención temprana de estos problemas es la mejor manera de asegurarnos que el niño alcance su mayor potencial de crecimiento.



EL INFANT TRAINER™


El INFANT TRAINER™ de Myofunctional Research Co. (MRC) permite un ejercicio activo que fomenta la masticación correcta del niño y el uso de sus músculos masticatorios. Pero más importante aún es que el INFANT TRAINER™ obliga al niño a respirar por la nariz, y también lo entrena a deglutir con la lengua en una posición correcta. La investigación claramente ilustra que un buen crecimiento facial y maxilar depende de forma importante en todos estos factores.

El INFANT TRAINER™ puede prevenir la necesidad de realizar un tratamiento de

ortodoncia que involucre el uso de brackets y las extracciones cuando el niño sea mayor. MRC tiene una serie de aparatos integrados para ser usados durante la dentición mixta y permanente para asegurarnos del correcto desarrollo del niño cuando los dientes permanentes comienzan a aparecer a la edad de los 6 y hasta los 12 años. Visite www.myoresearch.com para más información.

infant
TRAINER™

- ① Cojines de Aire
- ② Lengüeta
- ③ Escudo Lingual
- ④ Banda de Seguridad

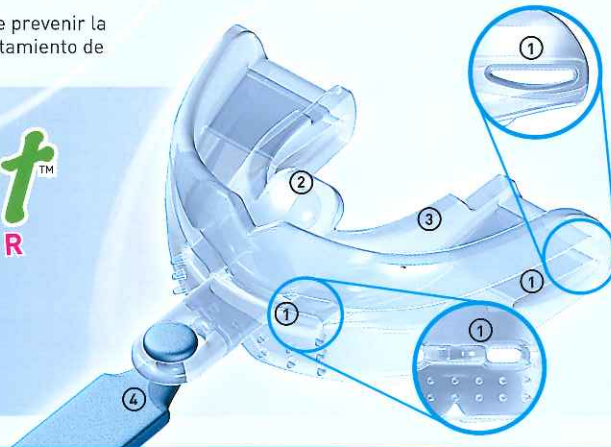

COMO FUNCIONA

El INFANT TRAINER™ tiene varias características claves para ayudar en el crecimiento y desarrollo de su niño:

- ① Los **Cojines de Aire** permiten un estímulo activo y suave para el crecimiento facial y de los maxilares.
- ② La **Lengüeta** activamente entrena al niño a colocar la lengua correctamente y deglutir bien.
- ③ Cuando está en su lugar, el **Escudo Lingual** evita que se succione el dedo y también que empuje la lengua hacia adelante. Esto corrige un hábito muy serio que causa muchos problemas dentales y en las articulaciones temporomandibulares (ATM).

La investigación muestra que muchos respiradores bucales tienen caras menos atractivas que los pacientes con una respiración nasal correcta. El diseño del INFANT TRAINER™ enseña al niño a respirar a través de la nariz. El cambio de patrones de respiración ha demostrado dar como resultado un crecimiento maxilar correcto y mejora también la salud en general del niño.

BANDA DE SEGURIDAD

Los niños pequeños usarán el INFANT TRAINER™ por períodos cortos de tiempo y luego lo escupirán, igual que lo hacen con sus chupones. Al rato el niño deseará volver a masticar el INFANT TRAINER™. Una banda de seguridad viene incluida con cada aparato. Esta banda deberá asegurarse a la ropa del niño para evitar que el INFANT TRAINER™ se caiga al suelo cuando lo escupe. El niño también puede usar el INFANT TRAINER™ para dormir, y la banda nos facilitará encontrarlo a la mañana siguiente.

HIGIENE

El INFANT TRAINER™ puede ser esterilizado al hervirlo por 10 minutos cuando sea necesario. Generalmente es suficiente con enjuagarlo en agua caliente y regresarlo a su estuche.

