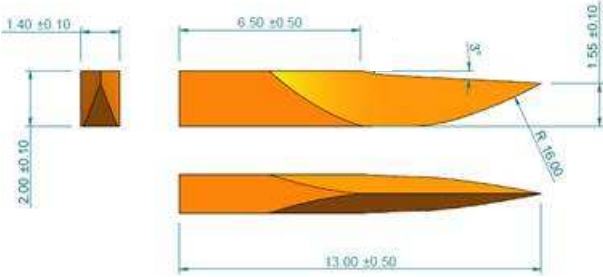
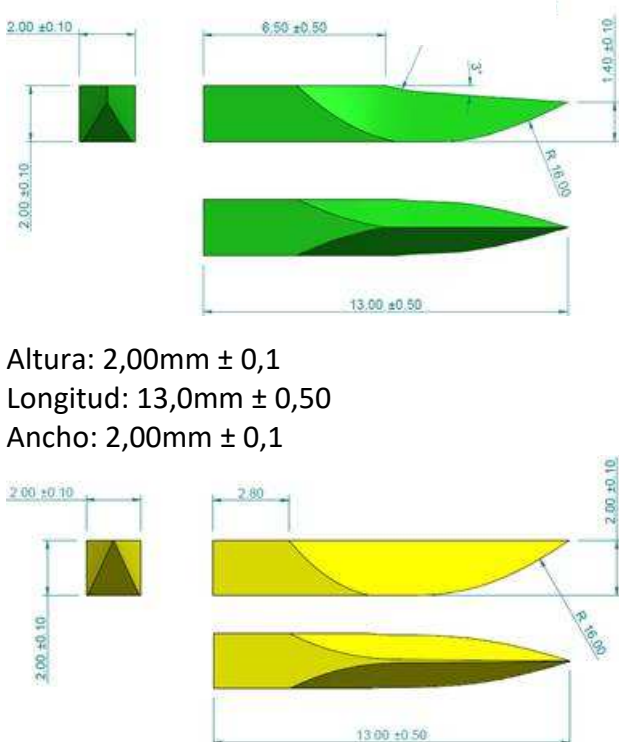

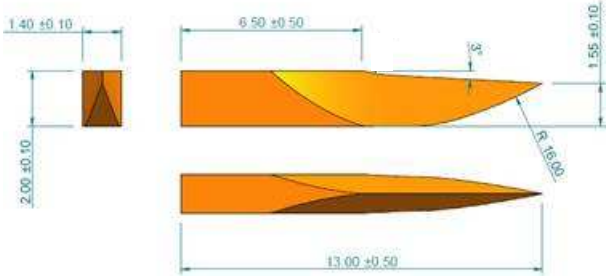



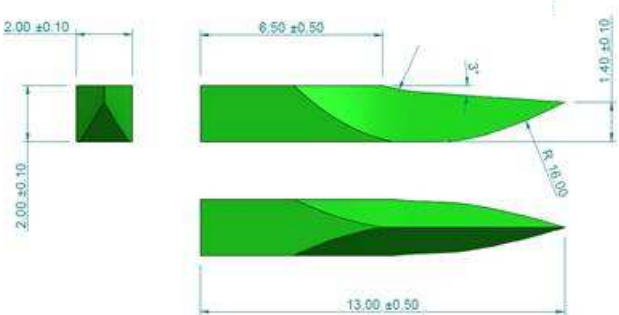
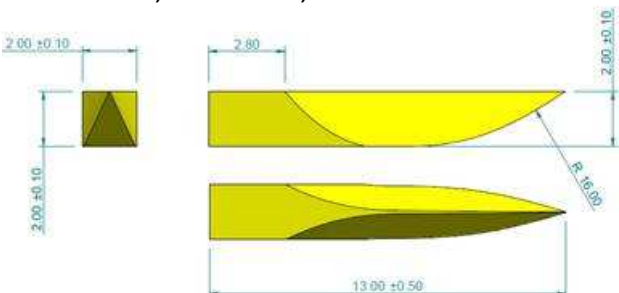
**FICHA TÉCNICA**

<b>CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	0188: Color Naranja 0189: Color Natural 0190: Color Verde 0191: Color Amarillo	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cuñas interdentales indicadas para uso general en procedimientos restauradores. Disponible en color natural y en color naranja, verde y amarillo con colorantes reactivos atóxicos.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Cuñas de madera natural de pino.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<p>Naranja: Altura: 2,00mm ± 0,1                      Longitud: 13,0mm ± 0,50                      Ancho: 1,40mm ± 0,1</p>  <p>Natural: Altura: 2,00mm ± 0,1                      Longitud: 13,0mm ± 0,50                      Ancho: 2,00mm ± 0,1</p>  <p>Verde: Altura: 2,00mm ± 0,1                      Longitud: 13,0mm ± 0,50</p>	


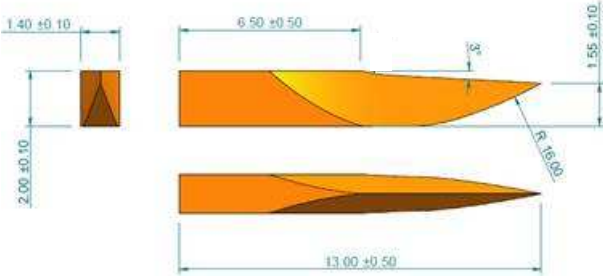

	<p>Ancho: 2,00mm ± 0,1</p>  <p>Amarillo: Altura: 2,00mm ± 0,1 Longitud: 13,0mm ± 0,50 Ancho: 2,00mm ± 0,1</p>
<b>ENVASE</b>	100 unidades.
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años.
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	<p>Seleccionar la cuña deseada y colocarla en el espacio interproximal. Están indicadas en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o separar dientes adyacentes. Las cuñas de madera no necesitan de recortes o ajustes y garantizan la fijación de las matrices, proporcionando restauraciones libres de exceso subgingival y con perfecto contorno.</p>
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	<p>Uso profesional. Un solo uso. Las cuñas de madera deben ser descartadas después cada paciente. Su reutilización puede causar la contaminación cruzada. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad puntiaguda, por lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. No utilizar en pacientes que tengan antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de este producto.</p>
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.</p>

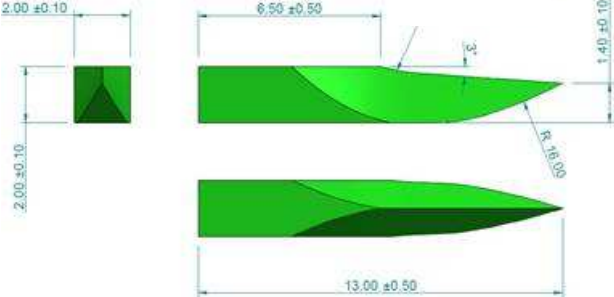
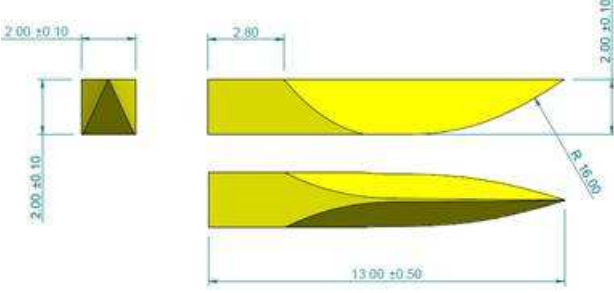
**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>PROCLINIC INTERDENTAL WOODEN WEDGES</b>		
<b>REFERENCES</b>	0188: Orange 0189: Natural 0190: Green 0191: Yellow	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Interdental wedges indicated for general use in restoration procedures. Available in natural colour and coloured with atoxic reactive dyes (orange, green, yellow).	
<b>COMPOSITION</b>	Wooden interdental wedges made from pine.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	<p>Orange: Height: 2,00 mm ± 0,1                      Length: 13,0 mm ± 0,50                      Width: 1,40 mm ± 0,1</p>  <p>Natural: Height: 2,00 mm ± 0,1                      Length: 13,0 mm ± 0,50                      Width: 2,00 mm ± 0,1</p>  <p>Green: Height: 2,00 mm ± 0,1                      Length: 13,0 mm ± 0,50</p>	

	<p>Width: 2,00 mm ± 0,1</p>  <p>Yellow: Height: 2,00 mm ± 0,1 Length: 13,0 mm ± 0,50 Width: 2,00 mm ± 0,1</p> 
<b>PACKAGING</b>	Package with 100 pieces.
<b>SHELF LIFE</b>	5 years.
<b>INTENDED USE</b>	Select the desired wedge and insert it on interproximal space. Indicated for general use in restoration procedures with the mechanical function of adapting the matrix and/or separating the adjacent teeth. The wooden wedges do not need clippings or adjustments and guarantee the matrix fixing, providing restorations without any sub-gingival excess and a perfect contour.
<b>SAFETY INFORMATION</b>	Professional use only. Use only once. Its reuse can cause cross contamination. To avoid an accidental swallowing of this product it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. The product has a sharp point and must be handled in order not to cause lesions to the patient. When there is proven allergy to any of its components, the product must not be used.
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

**FICHA TÉCNICA**

<b>CUNHAS INTERDENTAIS DE MADEIRA PROCLINIC</b>		
<b>APRESENTAÇÃO</b>	0188: Cor Laranja 0189: Cor Natural 0190: Cor Verde 0191: Cor Amarelo	
<b>FABRICANTE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>	Dispositivo Médico Classe I, Directiva 93/42/EEC relativa aos dispositivos médicos.	
<b>DESCRIÇÃO GERAL</b>	Cunhas interdentais em madeira sortidas indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores. Tamanhos codificados por cores: natural, laranja, amarelo, verde.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Madeira natural e corantes reativos atóxicos.	
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<p>Laranja: Altura: 2,00mm ± 0,1                      Comprimento: 13,0mm ± 0,50                      Largura: 1,40mm ± 0,1</p>  <p>Natural: Altura: 2,00mm ± 0,1                      Comprimento: 13,0mm ± 0,50                      Largura: 2,00mm ± 0,1</p> 	

	<p>Verde: Altura: 2,00mm ± 0,1 Comprimento: 13,0mm ± 0,50 Largura: 2,00mm ± 0,1</p>  <p>Amarelo: Altura: 2,00mm ± 0,1 Comprimento: 13,0mm ± 0,50 Largura: 2,00mm ± 0,1</p> 
<b>EMBALAGEM</b>	100 unid.
<b>VALIDADE</b>	5 anos.
<b>USO</b>	<p>Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espaço interproximal. As cunhas de madeira, são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. As cunhas de madeira não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.</p>
<b>ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E RESTRIÇÕES</b>	<p>Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente.</p>
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.