



Router[®] Universal

MOTOR DE ENDODONCIA



Rooter® Universal

MOTOR ENDO con LOCALIZADOR DE ÁPICE

El **Rooter® Universal** es un motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápice integrado. Debido a su gran variedad de funciones y a su potente capacidad de obtener mediciones precisas, el clínico puede preparar y realizar de forma fácil y sencilla sus tratamientos de instrumentación y limpieza del conducto radicular, garantizando un resultado perfecto en el tratamiento del conducto.



Router® Universal

MOTOR ENDO con LOCALIZADOR DE ÁPICE

- Luz LED



- Carga Inalámbrica



- Motor Endo con Localizador de ápice integrado
- Sistemas FKG Pré-programados: (RACE® EVO, R-Motion® y XP-endo®)
- Opción de 5 programas libres:
 - ✓ 4 programas Sistema Rotarório
 - ✓ 1 programa Sistema Reciprocante

Router[®] Universal

MOTOR ENDO con LOCALIZADOR DE ÁPICE

- Selección de velocidad y torque

- ✓ Velocidad: 150 – 1'000 rpm

- ✓ Torque: 0.6 – 3.5 Ncm

- Opción de programación de movimiento recíprocante

- 3 modos de trabajo para una máxima facilidad de uso:

- ✓ Modo Endo

- ✓ Modo Motor Endo con Localizador de ápice integrado


- ✓ Modo Localizador de ápice



Router® Universal

MOTOR ENDO con LOCALIZADOR DE ÁPICE

- Peso ligero y diseño ergonómico

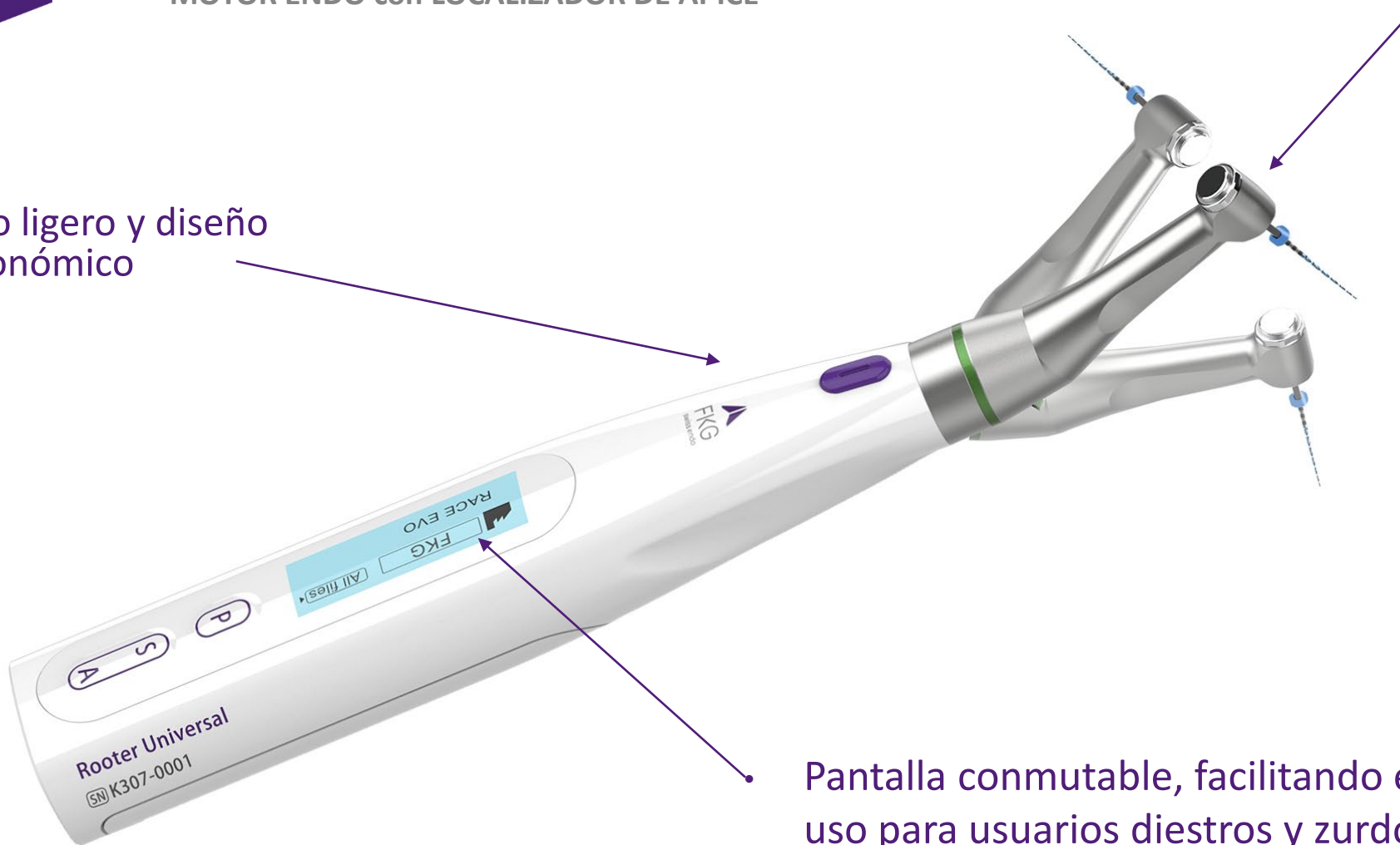


- Contra-ángulo rotatorio 360°
- Cabezal contra-ángulo con geometría compacta

Pantalla conmutable, facilitando el uso para usuarios diestros y zurdos




► Auto Reverse


Si durante el funcionamiento, la carga alcanza el valor límite de torque preestablecido, la pieza de mano del motor girará automáticamente en la dirección inversa (sentido antihorario). Cuando se reduce la carga, la pieza de mano del motor vuelve automáticamente a la rotación hacia delante (sentido horario).

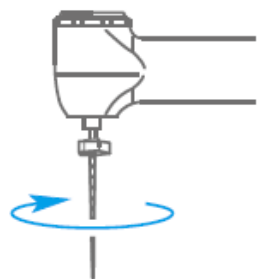

Carga dentro del valor límite de torque

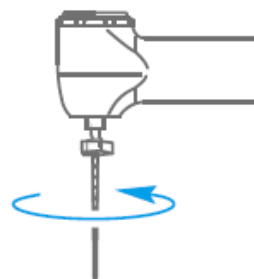

Carga más allá del valor límite de torque

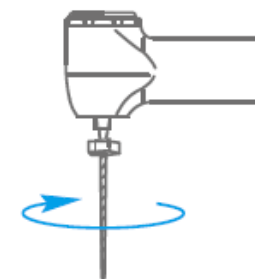

Cuando se reduce la carga, el motor se restablece automáticamente


Router® Universal

INFORMACIONES: REFERENCIA & GARANTÍA

PACK MOTOR ENDO*

08.970.00.000.FK

Router Universal

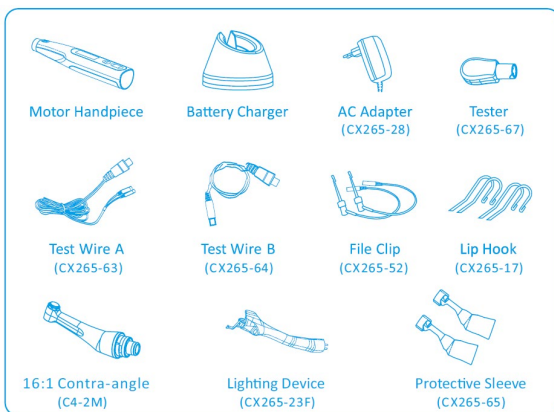

*Todos los componentes y accesorios reflejados en la fig. A del manual de instrucciones de Router® Universal están incluidos en el Pack.

GARANTIA

VEINTICUATRO (24) MESES	Pieza de mano del motor (batería y contra-ángulo excluidos);
DOCE (12) MESES	Contra-ángulo (Rodamiento excluido)
TRES (3) MESES	Rodamiento del contra-ángulo
SEIS (6) MESES	Batería
SEIS (6) MESES	Accesorios



Thank you, **Merci**, Danke, **Grazie**,
Gracias, **Obrigado**, Tak, **Kitos**, Takk,
Spassiba, Danku, **Shukran**,
Motshakeram, **Arrigato**, Shishie,
Dankie, Graciñas, **Pachi**, Yuspajara,
Hvala, Eskerrik asko, **Milesker**,
Tesekkur, **Dziekuje**, Moltes **Gracies**,
Aguije, **Maururu**, Efkaristo, **Aciu**,
Gamsajamnida, Salamat, **Ke yaleboha**,
Ngiyabonga ...



FKG Swiss Endo Iberia

C/Toronga 27-1ºA, 28043, Madrid

T +34 910 889 695 |  +34 601 642 240
info@fkgiberia.com | www.fkgiberia.com

Rooted in innovation 