



NAKANISHI INC. 
www.nsk-inc.com


700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-8666, Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380 FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Europe GmbH 
www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Strasse 8 65760 Eschborn, Germany
TEL : +49 (0)6196 77606-0 FAX : +49 (0)6196 77606-29

NSK Dental Spain SA
www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis 28232 Las Rozas,
Madrid, España
TEL : +34 91 626 61 28 FAX : +34 91 626 61 32

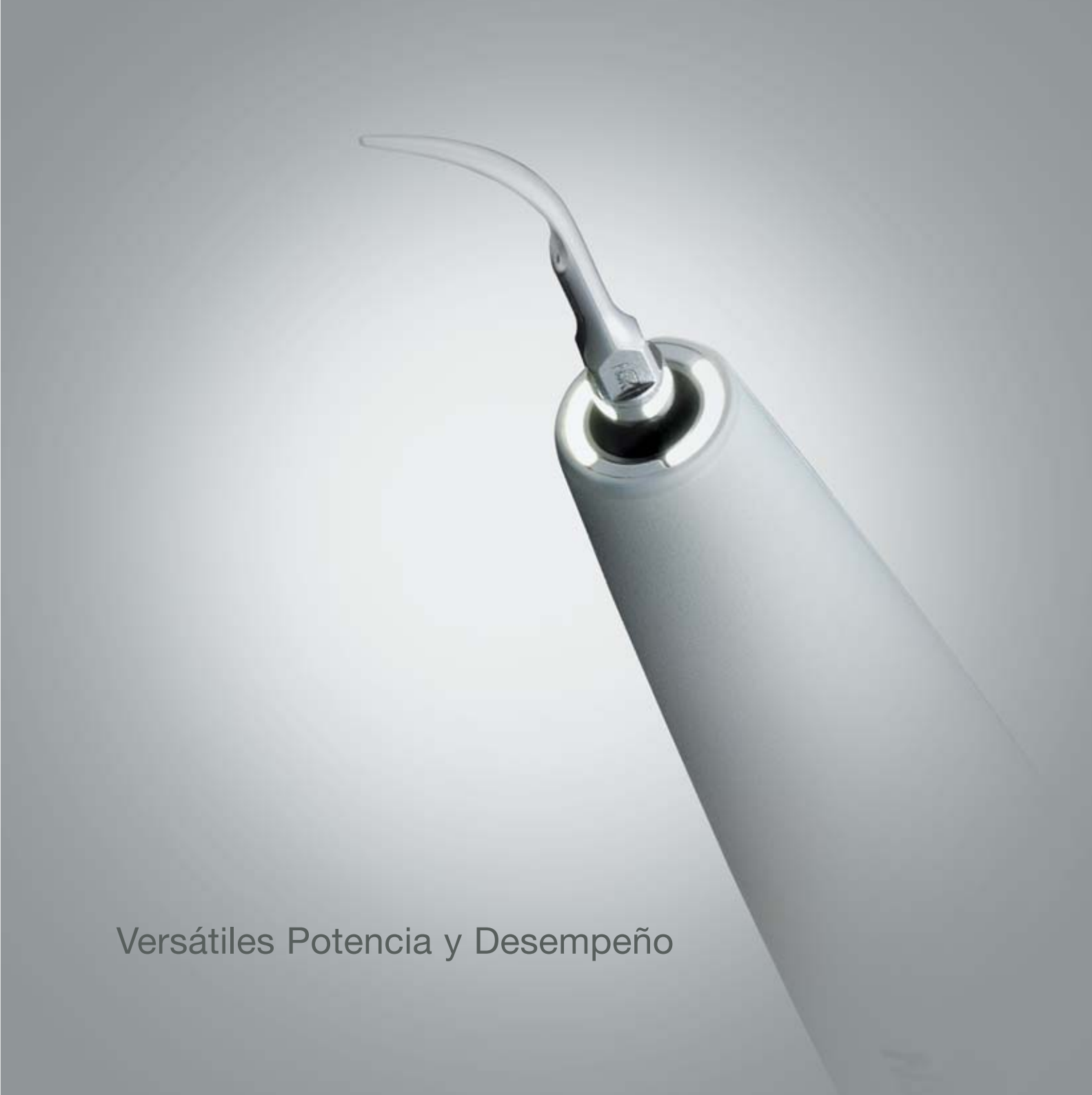

Versátiles Potencia y Desempeño



Varios[®]

iPiezo engine[®]

Sigue tu intuición

La nueva, estilista y versátil Serie Varios cuenta con el intuitivo iPiezo engine de NSK, que le ofrece el tratamiento más eficaz y eficiente en todas las aplicaciones clínicas.

Junto a una amplia gama de Puntas, las aplicaciones son infinitas, desde Perio, Escarificación y Endodoncia, y la funcionalidad para mantenimientos de Implantes.

LED dual en el extremo de la delgada pieza de mano aseguran una línea de visión más clara, permite la fácil identificación de placas y cálculos durante procedimientos de higiene oral y escarificación.

Varios2 Pieza de mano



Sobresaliente Desempeño

Con sólo 33 g de peso, la delgada pieza de mano Varios y el cuerpo fácil de manejar, ofrece un desempeño superior mientras reduce la fatiga en prolongados usos. La doble luz LED asegura una excelente visibilidad, virtualmente sin sombras, mejorando notablemente las condiciones de trabajo en el área de tratamiento. La pieza de mano ligera, compacta y comfortable ofrece un rendimiento excepcional para satisfacer sus necesidades en una gran variedad de prácticas clínicas.

Ventajas

- La más delgada y liviana* pieza de mano con iluminación LED
- Luz de LED dual suministrado a través de 2 varillas de vidrio óptico
- Disponibilidad en Piezas de mano Óptica y No Óptica
- Extensa gama de Puntas para una amplia gama de aplicaciones



Bien equilibrada, la pieza de mano más delgada y liviana con iluminación LED

El uso de la delgada pieza de mano permite una excelente accesibilidad y asegura gran visibilidad, ofreciendo un uso más comfortable. La pieza de mano es repetidamente esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C.



Pieza de mano Varios2



Competidor



Óptico



No Óptico



Doble luz LED



El LED NSK proporciona la calidad de la luz natural, brindando grandes ventajas a su trabajo

Más nítida : los LED generan luz de la misma calidad que la natural, lo que asegura mucha más nitidez que la luz halógena.

Duradera : los LED duran más que las lámparas halógenas.



Varios 970 **Óptico** / **No Óptico**

iPiezo engine®

Consola de mando Portátil Multifuncional de Suprema Versatilidad

Todo-en-uno. Compacto y elegante estilo todo-en-uno para Periodoncia, Endodoncia, Escarificación, Aplicaciones MI y Mantenimiento de Implantes. Convenientes botellas de 400 mL para soluciones semejantes o diferentes con bombas independientes. Todas las nuevas características Varios tienen los últimos avances en tecnología piezoeléctrica. El iPiezo engine de NSK asegura una salida estable al ajustar automáticamente la frecuencia óptima de salida en función de la carga de trabajo de la Punta.



Pantalla LED de Gran Tamaño

Todos los parámetros de funcionamiento se muestran claramente en la gran pantalla LED, controlado por botones fácilmente reconocibles.



iPiezo engine®

Función de Retroalimentación

El iPiezo engine de NSK suministra la energía apropiada a la Punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. iPiezo engine proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso ante el duro cálculo.

Función de Ajuste Automático

La función de ajuste automático proporciona a la Punta una frecuencia estable y suave, dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura el resultado ideal.



Botellas Fácilmente Intercambiables

2 grandes botellas de 400 mL son rápida y fácilmente intercambiables. Soluciones adecuadas pueden ser utilizadas para diversos fines clínicos.



Función Memoria

Las configuraciones del usuario pueden ser memorizadas, incluidos potencia y volumen de solución, en la memoria interna de la Consola, ahorrando un valioso tiempo. Además, estos ajustes se mantienen intactos incluso durante cortes de energía.

Diseño Simple de la Consola de mando para un Mantenimiento Limpio

El diseño simple y sin relieves de la Consola de mando permite una óptima higiene para el uso diario.

Selección de Irrigación: Botella Derecha, Izquierda y Agua de Grifo

Varios 970 puede utilizar tanto la botella derecha e izquierda como el agua del grifo. Seleccione el Modo de Irrigación con el botón correspondiente en el panel frontal de la Consola. Los LED a derecha e izquierda del panel frontal de la Consola indican cuál botella está en uso.



Varios 970

Óptico / No Óptico

iPiezo engine®

Una Mayor Durabilidad Contra Soluciones Antisépticas

El uso de resina en la tubería de agua de la botella, la bomba y la pieza de mano, asegura durabilidad notablemente mejorada, ya que reduce sustancialmente la corrosión y la oxidación causada por residuo de las soluciones antisépticas.



Modo de Autolimpieza

El Modo de Autolimpieza limpia la tubería y la pieza de mano con sólo pulsar el botón después del uso de soluciones especiales. La activación del Modo de Autolimpieza del Varios 970 permite la limpieza de ambas líneas de irrigación en forma independiente.



Función Dial


El recientemente diseñado interfaz, tipo dial y tipo palmtop, permite gran facilidad en el ajuste y control del volumen de agua de la botella y del grifo.



Interruptor de Pedal 360°

El nuevo Interruptor de Pedal Varios puede ser accionado fácilmente desde cualquier ángulo.

MODELO: **FC-70**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z1008001**
• Cable de 2,5m

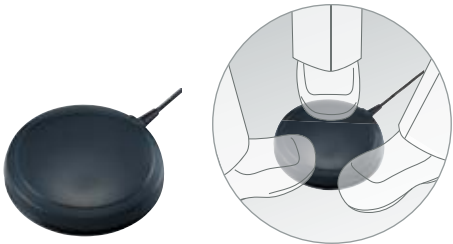

Caja de Esterilización, Llave para Puntas

La Caja de Esterilización está diseñada para un proceso seguro y el almacenamiento de los componentes Varios.



MODELO: **Llave para Puntas**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z221076**



MODELO: **Cassette para esterilización**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z1035001**

Varios 970 Sets Completos



Óptico Varios 970 Óptico Sets Completos

MODELO: **VA970 LUX (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001166**
MODELO: **VA970 LUX (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001168**

No Óptico Varios 970 No Óptico Sets Completos

MODELO: **VA970 (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001174**
MODELO: **VA970 (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001175**

Especificaciones	
• Fuente de poder	: AC 120V ó 230V 50/60 Hz
• Frecuencia	: 28-32 KHz
• Salida máx.	: 11 W (Modo G)
• Dimensiones	: L 160 x An 270 x Al 190 (mm) (Incluye botella)
• Peso Consola	: 2,1 kg (Sin contra-ángulo)
• Volumen de Botella	: 400 mL (x 2 Botellas)

Contenido

- Consola de mando
- Pieza de mano
- Cable de pieza de mano
- 3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8)
- Interruptor de Pedal (FC-70)
- 2 Botellas de Irrigación
- 3 Llaves con Torquímetro para Puntas
- Cable Fuente Poder AC
- Caja para Esterilización

Varios 370

Óptico / No Óptico

iPiezo engine®

Compacta Consola de mando Multipropósito en la Punta de sus Dedos

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran variedad de procedimientos clínicos.




Ventajas

- Potenciado por iPiezo engine
- Cuerpo portátil ultra compacto
- Panel de control de funciones simple e intuitivo
- Grande y fuerte perilla de ajuste del volumen de agua para un fácil funcionamiento
- Se disponen de soportes para varias formas de instalación
- La pieza de mano es lavable en el termodesinfectante y puede ser esterilizada en autoclave hasta máximo de 135°C

Soporte de Consola de mando

El Soporte de la Consola de mando está disponible para varias posiciones de instalación.

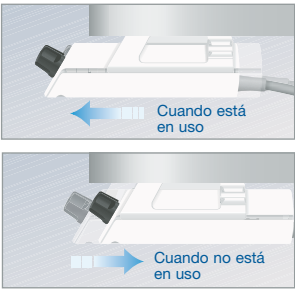

Ejemplos de Instalación de Varios 370



Con Soporte (opcional) sobre el brazo del panel de instrumentos



Sobre/Debajo del panel de instrumentos



Detrás del panel de instrumentos, con Brazo de Montaje (opcional)

Varios 370 Sets Completos



Óptico Varios 370 Óptico Sets Completos

MODELO: **VA370 LUX (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001956**
MODELO: **VA370 LUX (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001343**

No Óptico Varios 370 No Óptico Sets Completos

MODELO: **VA370 (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001958**
MODELO: **VA370 (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001340**

Especificaciones


- Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frecuencia : 28-32 KHz
- Salida máx. : 11 W (Modo G)
- Dimensiones : L 80 x An 115 x Al 32 (mm) (sin perilla y cable)
- Peso Consola : 0.43 kg (sin contra-ángulo)

Contenido

- Consola de mando con cable de pieza de mano
- Soporte de Consola de mando
- Adaptador de corriente
- Pieza de mano
- Soporte de Pieza de mano
- Set Filtro de Agua
- Conector de suministro de agua (sólo en los sets de 120V)
- Interruptor de Pedal (FC-71)
- 3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8)
- Llave con Torquímetro para Puntas

Puntas Varios

NSK Ofrece una Amplia Selección de Puntas de Escarificador Ultrasónico Varios Para Usos Clínicos.

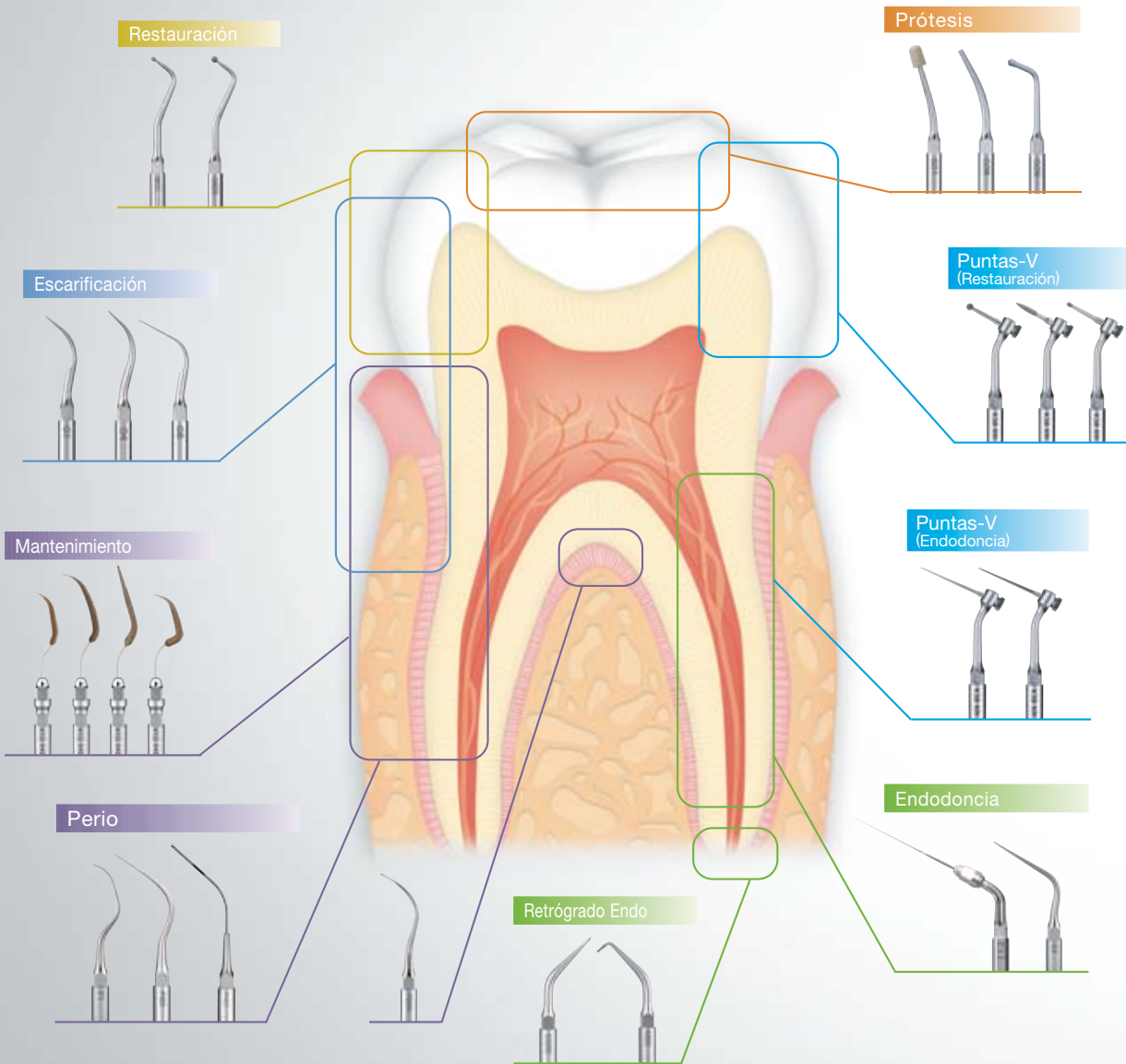

* La dirección del ángulo de la punta está definida por la vista anterior de la punta.

Escarificación

			MODELO: G1	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217101
			MODELO: G1-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291101
			MODELO: G2	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217102
			MODELO: G2-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291102
			MODELO: G3	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217103
			MODELO: G3-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291103
			MODELO: G4	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217104
			MODELO: G4-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291104
			MODELO: G5	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217105
			MODELO: G6	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217106
			MODELO: G6-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291106
			MODELO: G8	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217108
			MODELO: G9	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217109
			MODELO: G11	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217411
			MODELO: G12	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217412
			MODELO: G13	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217413



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple / Raíz Múltiple

Perio (Alisado de Raíz)

Corte Transversal				MODELO: P1	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217404	NSK Satelec®
				MODELO: P1D	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217405	NSK Satelec®
	• Recubierto de diamante					
				MODELO: P2D	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217402	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)					
	• Recubierto de diamante	• Punta curva derecha*				
				MODELO: P3D	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217403	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)					
	• Recubierto de diamante	• Punta curva izquierda*				
				MODELO: P10	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217410	NSK Satelec®
	• Punta cortante					
				MODELO: P11R	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217408	NSK Satelec®
	• Punta curva derecha*					
				MODELO: P11L	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217409	NSK Satelec®
	• Punta curva izquierda*					
				MODELO: P20	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217420	NSK Satelec®
				MODELO: P20-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291420	EMS®
				MODELO: P21R	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217422	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)			MODELO: P21R-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291422	EMS®
	• Punta curva derecha*					
				MODELO: P21L	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217421	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)			MODELO: P21L-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291421	EMS®
	• Punta curva izquierda*					



Raíz Simple



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple

Perio (Alisado de Raíz)

Corte Transversal				MODELO: P25R	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217424	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)			MODELO: P25R-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291424	EMS®
	• Punta curva derecha*					
				MODELO: P25L	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217425	NSK Satelec®
	(Vista de abajo)			MODELO: P25L-E	CÓDIGO DE PEDIDO: Z291425	EMS®
	• Punta curva izquierda*					
				MODELO: P26R	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217426	NSK Satelec®
	• Punta curva derecha*					
				MODELO: P26L	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217427	NSK Satelec®
	• Punta curva izquierda*					



Raíz Simple / Raíz Múltiple



Raíz Simple / Raíz Múltiple

Perio (Irrigación y Limpieza)

Corte Transversal				MODELO: P40	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217550	NSK Satelec®
	• Para irrigación (ø 0,6 mm)					
				MODELO: P41	CÓDIGO DE PEDIDO: Z217555	NSK Satelec®
	• Para irrigación (ø 0,8 mm)					



Puntos de irrigación dual

* La dirección del ángulo de la punta está definida por la vista anterior de la punta.



Lavable en termodesinfectante



Esterilizable con autoclave hasta 135°C

Mantenimiento (Puntas-V)



Soporte de Puntas-V



MODELO: **V10**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217041**

NSK Satelec®

- Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.



Corte Transversal



MODELO: **V-P10**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900184**

- Juego de 3



- Punta curva derecha*

(Vista de abajo)

MODELO: **V-P11R**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1002165**

- Juego de 3



- Punta curva izquierda*

(Vista de abajo)

MODELO: **V-P11L**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1002166**

- Juego de 3



- Punta curva derecha*

MODELO: **V-P26R**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1002168**

- Juego de 3



- Punta curva izquierda*

MODELO: **V-P26L**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1002169**

- Juego de 3

Endodoncia

Soporte angulado en 120° para limas U



* Lima opcional

- Para limas U (ø 0,8mm) • Para limpieza del canal de raíz • Para dientes anteriores

MODELO: **E11**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217031**

NSK Satelec®

Soporte angulado en 95° para limas U



* Lima opcional

- Para limas U (ø 0,8mm) • Para limpieza del canal de raíz • Para dientes posteriores

MODELO: **E12**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217032**

NSK Satelec®



Endodoncia

Corte Transversal



- Para limpieza del canal de raíz

MODELO: **E4**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217428**

NSK Satelec®



- Recubierto de diamante • Para ampliación del canal de raíz

MODELO: **E4D**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217528**

NSK Satelec®



- No precisa agua • Para condensación lateral

MODELO: **E5**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217305**

NSK Satelec®



- No precisa agua • Para condensación lateral

MODELO: **E6**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217306**

NSK Satelec®



- No precisa agua • Para remoción de empastes y materiales extraños

MODELO: **E7**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217307**

NSK Satelec®



- Recubierto de diamante • Para ampliación del canal radicular

MODELO: **E7D**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217317**

NSK Satelec®



- No precisa agua • Para remoción de empastes y materiales extraños

MODELO: **E8**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217308**

NSK Satelec®



- Recubierto de diamante • Para ampliación del canal radicular

MODELO: **E8D**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217318**

NSK Satelec®

ø1.1





- Recubierto de diamante • Para localización del canal radicular

MODELO: **E15D**

CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217319**

NSK Satelec®

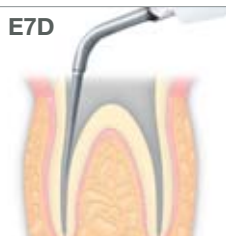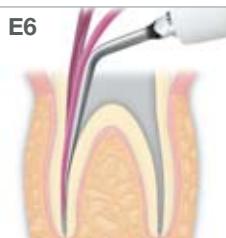

* La dirección del ángulo de la punta está definida por la vista anterior de la punta.



Lavable en termodesinfectante



Esterilizable con autoclave hasta 135°C

Retrógrado Endo

Corte Transversal





MODELO: **E30RD** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217212**  

• Recubierto de diamante • Para dientes posteriores (en ángulo derecho)



MODELO: **E30LD** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217213**  

• Recubierto de diamante • Para dientes posteriores (en ángulo izquierdo)



MODELO: **E31D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217210**  

• Recubierto de diamante • Para dientes anteriores y posteriores (70°)



MODELO: **E32D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217211**  

• Recubierto de diamante • Para dientes anteriores (90°)



Restauración (Para Intervenciones Mínimas)



0,9
1,0



MODELO: **G61D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217601**  

• Recubierto de diamante



1,23
1,4



MODELO: **G62D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217602**  

• Recubierto de diamante



1,33
0,75



MODELO: **G65D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217605**  

• Recubierto de diamante



0,75 1,33



MODELO: **G66D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217606**  

• Recubierto de diamante



1,63
1,0



MODELO: **G67D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217607**  

• Recubierto de diamante



1,0 1,63



MODELO: **G68D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217608**  

• Recubierto de diamante



Ampliación del Sistema Puntas-V



Soporte de Puntas-V



MODELO: **V30** CÓDIGO DE PEDIDO: **Z217030**  

• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.

Restauración

Para Intervenciones Mínimas



MODELO: **V-G70** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900118**

• Recubierto de diamante • Juego de 3



MODELO: **V-G71** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900119**

• Recubierto de diamante • Juego de 3



MODELO: **V-G72** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900120**

• Recubierto de diamante • Juego de 3



MODELO: **V-G75** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900121**

• Recubierto de diamante • Juego de 3



MODELO: **V-G76** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900122**

• Recubierto de diamante • Juego de 3

Para Terminación / Corte / Pulido



MODELO: **V-G77** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900165**

• Recubierto de diamante • Grado Normal • Juego de 3



MODELO: **V-G78** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900166**

• Recubierto de diamante • Grado Fino • Juego de 3



MODELO: **V-G79** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900167**

• Recubierto de diamante • Grado Superfino • Juego de 3

Para Caries de Dentina



MODELO: **V-S1** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900161**

• Punta de acero inoxidable • Juego de 3



MODELO: **V-S3** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900162**

• Punta de acero inoxidable • Juego de 3



MODELO: **V-S33** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900163**

• Punta de acero inoxidable • Juego de 3

Remoción de caries del cuello




Remoción de caries de la superficie de contacto



Ampliación del canal radicular



Remoción de caries de la raíz

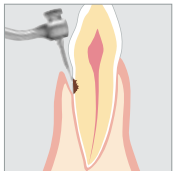

Endodoncia

Para Limpieza del Canal de Raíz



MODELO: **V-S50** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900169**

• Para limpieza de raíz 17mm • Juego de 3



MODELO: **V-S51** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900170**

• Para limpieza del canal de raíz 23mm • Juego de 3



MODELO: **V-S52** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900171**

• Para limpieza del canal de raíz 26mm • Juego de 3



MODELO: **V-S53** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900172**

• Para limpieza del canal de raíz 32mm • Juego de 3

Para Ampliación del Canal de Raíz



MODELO: **V-S50D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900173**

• Recubierto de diamante • Para ampliación del canal de raíz 17mm • Juego de 3



MODELO: **V-S51D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900174**

• Recubierto de diamante • Para ampliación del canal de raíz 23mm • Juego de 3



MODELO: **V-S52D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900175**


• Recubierto de diamante • Para ampliación del canal de raíz 26mm • Juego de 3




MODELO: **V-S53D** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y900176**

• Recubierto de diamante • Para ampliación del canal de raíz 32mm • Juego de 3

Limpieza de canal radicular

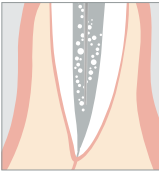

Remoción de limas rotas

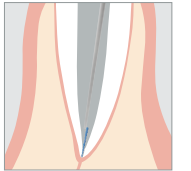


Lavable en termodesinfectante



Esterilizable con autoclave hasta 135°C

Repuestos

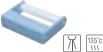MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO
 VA2-LUX-HP Pieza de mano Óptica	E351050	 Tubo de Suministro de Agua (4m) Para Varios 370	0914406 040	 Soporte para Pieza de mano Para Varios 370	10001505
 VA2-HP Pieza de mano No Óptica	E350050	 Alojamiento de Filtro de Agua	Y900069	 Botella VA 400 (400 mL) Para Varios 970	Z1047002
 VA970LUX-SC Cable de Pieza de mano para Varios 970 LUX	E351055	 Filtro de Agua	U387042	 Bomba Irrigación Para Varios 970	10000643
 VA970-SC Cable de Pieza de mano para Varios 970	E350055	 Anillo de Tubo (juego de 2)	Y900077	 O-ring (para Cable de Pieza de mano)	0310020 080
 FC-70 Pedal de control (2,5 m)	Z1008001	 Llave para Puntas (CR-10)	Z221076	 O-ring (Delgada) Para Botella VA 400	0312090 100
 FC-71 Pedal de control (5 m) Para Varios 370	Z1008002	 Llave de Sustitución de Puntas Tipo-E	Z217399	 O-ring (Gruesa) Para Botella VA 400	0310075 150
 Conector de Suministro de Agua	U387030	 Soporte para Puntas	Z221080	 Soporte de Varios 350/370	Z254
 Conjunto de Filtro de Agua (2m) (Tubo suministro de agua 2m, filtro de agua, estuche filtro de agua)	U387040	 Protector L para Puntas	Z217850	 Brazo de Montaje Varios 350/370	Z259
 Conjunto de Filtro de Agua (4m) (Tubo suministro de agua 4m, filtro de agua, estuche filtro de agua)	U1007046	 Protector S para Puntas	Z217851	 Soporte de Consola de mando Para Varios 370	Y1001812
 Tubo de Suministro de Agua (2m)	U387580	 Cassette para esterilización	Z1035001	 Llave española (5x8)	Y1001301