

Tu Nuevo spray frío Septodont



CryoPulp

Spray frío
con sabor a menta




CryoPulp - el nuevo spray frío de Septodont

CryoPulp es adecuado para la congelación rápida de los gránulos de espuma para pruebas de vitalidad de los dientes en la odontología y el enfriamiento de los materiales de impresión/fundición, es decir, hidrocoloides, etc.

Características	Ventajas	Beneficios
Boquilla de aplicación	Pulverización precisa	Facilidad y seguridad de uso
Gas butano-propano	Buen poder de enfriamiento	Eficiente
Aromas de menta	Agradable	La aceptación de los pacientes

Como usar

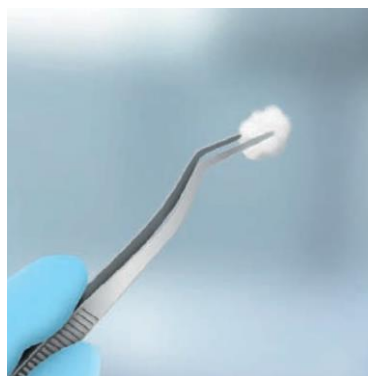

Usar la bolita de algodón



Pulverizar 1-2 segundos desde la distancia de 2-3 cm



La bolita debe aplicarse en el área medio-facial del diente. Los dientes adyacentes o contralaterales «normales» también deben ser probados

Información del producto

- 200 ml
- Temperatura de salida $\leq -40^{\circ}\text{C}$
- Dispositivo médico de clase I



Distribuidor:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Por favor, visite nuestra página web para más información:

www.septodont.es

