



50/15 PRIME M

Cod. PR-OF200-040-M


Compressore a secco, 2 cilindri, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada. Questo modello è disponibile anche in configurazione 10 BAR, visita la sezione apposita dei compressori a secco a 10 bar!

 Uso simultaneo massimo: 2

 Numero di riuniti: 3

Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto
PR-OF200-040-M	Si	m ³ /min/l/min 0.255 255	m ³ /min l/min 0.152 152	kW 1.5	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50
PR-OF200-040-M-400	Si	m ³ /min/l/min 0.255 255	m ³ /min l/min 0.152 152	kW 1.5	400V 50Hz	l 40	db(A) 66	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50

Diagramma di resa

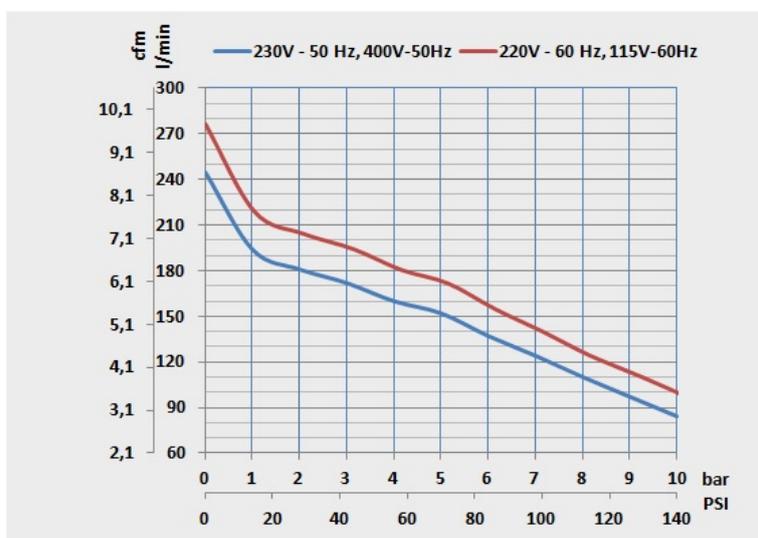

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K-SCP	Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M Kit sostituzione cartucce per gamma PURE AIR PRIME 2,3 M HP (cartucce+filtro aspirazione+cartucced filtro essiccatore a membrana). Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.	Ordinaria	1.500h/2y

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
PR-GC-031-K-SCP	<p>PRIME 1,5 kW</p> <p>Il kit ricambi PRIME 1,5 kW comprende: filtri di aspirazione, segmenti elastici, anello pistone, O-ring, cartuccia filtro di linea, fascia guida pistone e piastra valvolare completa. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y