

NUEVO INSTRUMENTO PIEZON® PI MAX


PARA LA ELIMINACIÓN SUAVE Y EFECTIVA DE CÁLCULOS ALREDEDOR DE IMPLANTES, RESTAURACIONES Y APARATOS DE ORTODONCIA

El nuevo PIEZON® El instrumento PI MAX es la última innovación del Centro de Investigación EMS en Nyon, Suiza. Desarrollado para maximizar la comodidad del paciente junto con el protocolo mínimamente invasivo Guided Biofilm Therapy, su material PEEK de alta tecnología proporciona un 50% más de flexibilidad y accesibilidad que la generación anterior.



MATERIALES

- ▶ Punta del instrumento: PEEK con 30% de fibra de carbono
- ▶ Soporte de la punta: Acero inoxidable de calidad médica

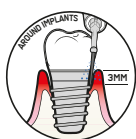

APLICACIONES CLÍNICAS

- ▶ Tratamientos no quirúrgicos alrededor de los implantes, restauraciones y aparatos de ortodoncia



COMPATIBILIDAD

- ▶ AIRFLOW® Prophylaxis Master
- ▶ Dispositivos EMS equipados con tecnología PIEZON® NO PAIN



CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

- ▶ Potencia: empezar al 30%, aumentar si es necesario hasta el 50%
- ▶ Agua: por encima del 70% en todo momento



TODA LA VIDA

- ▶ Punta del instrumento: hasta 3 mm de desgaste o 20 tratamientos
- ▶ El PIEZON® PI MAX ayuda a comprobar el desgaste de la punta del instrumento para sustituirla cuando sea necesario
- ▶ Soporte de puntas: 1.000 ciclos de reprocesamiento



VER EL VÍDEO EN
MI PI MAX

CONFIGURACIÓN, PRECIOS, REFERENCIAS Y PEDIDO

Aublicable a partir del 15 de noviembre de 2022.

REF	DESCRIPCIÓN	MSRP	CONFIGURACIÓN
DS-010A/A	Instrumento PIEZON® PI MAX	120 €	1 Instrumento PI MAX con su combitorque dedicado
DT-065A/A	Punta de instrumento PI MAX (x4)	125 €	4 puntas de instrumentos PI en un envase ecológico
FV-117	Herramienta de instrumento PI MAX	60 €	1 herramienta PI para cambio de punta y verificar el desgaste
FT-229	AIRFLOW® Prophylaxis Master	Ver lista de precios	Contiene DS-010A/A, DT-065A/A y FV-117

Su Departamento de Gestión de Productos y Desarrollo Comercial

Octubre, 2022
Nyon, Suiza

EMS 
MAKE ME SMILE.