



I AM
VERSATILE



AIR N GO
EASY

**Todas las aplicaciones
clínicas se vuelven sencillas
con el aeropulidor todo en uno.**

ACTEON

EL PULIDO ES MUCHO MÁS SIMPLE

Descontaminación bacteriana
Control activo
Supra Perio
Seguridad
Libertad de movimiento
Diseño

BRUNSAJ
DE LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL

Simplicidad



SOLUCIÓN COMPLETA

4 boquillas para un control proactivo del progreso del tratamiento periodontal.

Dependiendo de sus necesidades clínicas, elija:

- Polvos "CLASSIC" a base de bicarbonato de sodio.
- Polvo "PERIO" a base de glicina.



CON AIR N GO EASY

FUNCIONES DUALES

ACTEON® EQUIPMENT ha creado la nueva generación de aeropulidores portátiles, AIR-N-GO® easy con doble función:

- Función "SUPRA" para pulido supragingival: pulido profiláctico a diario.
- Función "PERIO" para pulido subgingival: mantenimiento, tratamientos de periodoncia y periimplantitis.

Este dispositivo médico alía simplicidad con rendimiento.



UNA SOLA PIEZA DE MANO

Una sola pieza de mano para cubrir un completo rango de cuidados y tratamientos.

AIR-N-GO® easy combina funciones esenciales con fiabilidad para facilitar su trabajo diario:

- Puesta en marcha rápida: raccord de conexión directo.
- Gran libertad de movimiento: rotación de 360°, tratamiento rápido y preciso de las áreas que requieren atención.
- Limpieza sencilla de la pieza de mano: las partes principales pueden desmontarse.

SUS ALIADAS EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO


Las boquillas AIR-N-GO[®], que resultan de los más avanzados estudios de dinámica de fluidos, proporcionan un spray continuo, preciso y controlado en cualquier contexto clínico.

En su práctica diaria, estas boquillas proporcionan potencia y eficiencia para la eliminación del biofilm supra y subgingival.

BOQUILLA
AIR-N-GO[®]
SUPRA
(Estándar)



- Herramienta adecuada para cualquier tratamiento profiláctico supragingival en combinación con el polvo AIR-N-GO[®] "CLASSIC".
- Garantiza un procedimiento rápido y eficaz para una mayor comodidad de trabajo.

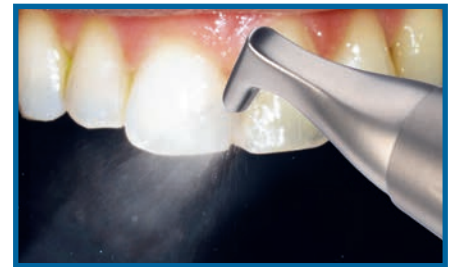


Caso clínico Dr. P. ROUAS (Francia).

BOQUILLA
AIR-N-GO[®]
PERIO
MAINTENANCE
(Opcional)



- Consumo reducido de partículas finas del polvo AIR-N-GO[®] "PERIO" durante la fase de mantenimiento.
- Tratamiento de mucositis y retorno a una situación clínica saludable.
- Acción contra el progreso de la enfermedad periodontal.

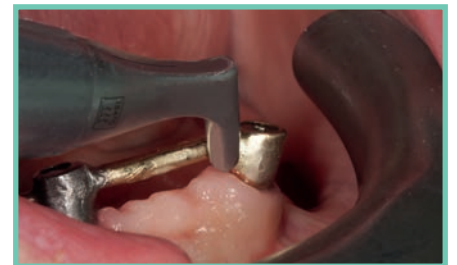

Caso clínico Dr. C. LIM (U.K.).



BOQUILLA AIR-N-GO® PERIO EASY

(Kit PERIO easy
opcional)



- Diseño innovador en forma de “calzador” que proporciona una fácil inserción subgingival.
- De gran ayuda para el tratamiento subgingival no quirúrgico en dientes e implantes (bolsas periodontales de 3 a 8 mm).
- 5 segundos por cara es todo lo que necesita.



Caso clínico Dr. C. LIM (U.K.).

BOQUILLA AIR-N-GO® PERIO

(Opcional)



- Uso subgingival para tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos (túneles y colgajos abiertos).
- Potente spray lateral doble.
- Descontaminación de bolsas periodontales profundas (de 8 a 10 mm).



Caso clínico Dr. A. PATEL (U.K.).

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA

Los polvos AIR-N-GO® han sido especialmente diseñados y estudiados para producir un tratamiento efectivo y suave en todas las superficies tratadas. Estos polvos son compatibles con el AIR-N-GO® easy y no requiere ningún cambio de pieza de mano.

POLVOS AIR-N-GO® "CLASSIC"

A base de bicarbonato de sodio.


(≈ 76µm)

- **Completa gama de polvos supragingivales** que responden a las preferencias de sus pacientes.
- Limpieza escrupulosa con resultados instantáneos.
- Eliminación de manchas y placa bacteriana, incluso en áreas de difícil acceso.
- Mejor aceptación del tratamiento: menos sangrado y menos dolor en el paciente.



5 sabores frescos basados en aromas 100% naturales o aceites esenciales:
Neutro, Cola, Frambuesa, Menta y Limón.


COMPETENCIA

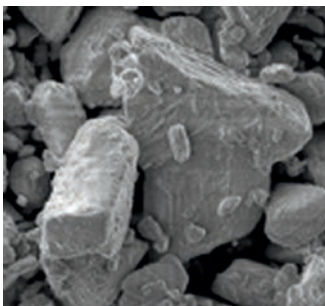


Partículas estratificadas con geometría agresiva (x1000).



El esmalte tratado muestra numerosos rasguños (x300).

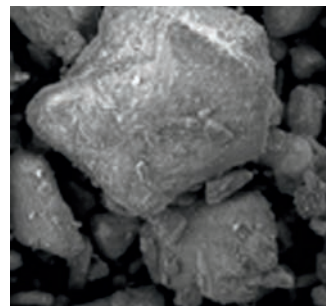

Partículas con geometría suavizada (x1000).

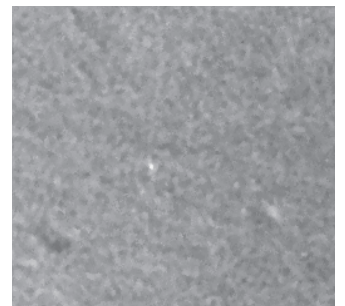

Esmalte tratado: superficie preservada sin impactos ni rasguños (x300).

SUS NECESIDADES CLÍNICAS

AIR N GO PERIO

POLVO
AIR-N-GO®
"PERIO"

Basado en glicina natural.
(≈ 25µm)




- **Uso exclusivo para tratamientos subgingivales** como complemento de la terapia inicial.
- Bajo poder de abrasión para preservar las superficies tratadas (dientes e implantes) y las zonas anatómicas más frágiles.
- Previene la progresión del biofilm subgingival.

Propiedades únicas con múltiples ventajas:

- Eliminación de placa: durante el mantenimiento periodontal en superficies radiculares expuestas, sin erosionarlas.
- Reducción de la carga bacteriana en las bolsas periodontales.

El AIR-N-GO® Perio reemplaza el polvo "Pearl".

- Para pacientes sensibles, se recomienda a los profesionales utilizar el polvo Perio con:
 - Boquilla Perio Maintenance para uso en zona supra (abierta).
 - Boquillas Perio y Perio Easy para uso en zona periodontal.

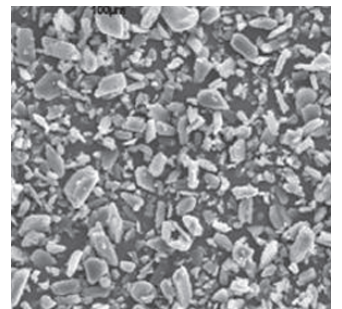

AIR-N-GO® "PERIO" (x1000)

Source: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) S.E.M. photos

AIR N GO

EASY



Fácil mantenimiento.

GO SUPRA

GO PERIO
Dientes e Implantes

	Boquillas	Polvos	Indicaciones
	 <p>AIR-N-GO® EASY SUPRA 120° Dotación estándar.</p>	 <p>"CLASSIC" A base de bicarbonato de sodio. Tamaño medio de partícula: 76 µm. SABORES: Limón, Menta, Frambuesa, Cola y Neutro.</p> 	<p>Acabado después del detartraje, preparación para el blanqueamiento, limpieza de áreas interproximales, fisuras y resquicios, preparación de la superficie dental antes del grabado, limpieza de brackets, eliminación de biofilm supragingival, placa, manchas y residuos temporales de cemento.</p>
	 <p>AIR-N-GO® PERIO EASY Suministrada con el kit PERIO, opcional.</p>	 <p>"PERIO" A base de glicina. Tamaño medio de partícula: 25 µm. SABOR: Neutro.</p>	<p>Eliminación del biofilm subgingival, tratamiento periodontal y periimplantitis. Bolsas de 3 a 8 mm.</p>
	 <p>AIR-N-GO® PERIO opcional.</p>		<p>Tratamiento periodontal y periimplantitis. Bolsas de 8 a 10 mm.</p>
	 <p>AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Opcional.</p>		<p>Mantenimiento periodontal. Bolsas hasta 4 mm.</p>

Para más información sobre buenas prácticas y uso del AIR-N-GO® easy, consulte nuestro canal YouTube:



DOTACIONES

Estándar

AIR-N-GO® easy: 1 pieza de mano AIR-N-GO® easy con adaptador según referencia (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1 boquilla SUPRA de 120°, 1 kit intro de polvo "CLASSIC" de 10 sobres multisabor, 1 kit de AIR-N-GO® easy maintenance.

*KaVo, Bien-Air, W&H, Sirona y Midwest son marcas registradas.

Opcional

Kit PERIO easy: Boquilla AIR-N-GO® PERIO easy y un frasco de 160 gr de polvo de glicina AIR-N-GO® "PERIO".
Boquilla AIR-N-GO® PERIO: Se suministra sola.
Boquilla AIR-N-GO® PERIO Maintenance: Se suministra sola.