

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Duradera, compacta, precisa.

Piezas de mano y
contra-ángulos



alegra

CLIP DE SPRAY EXTERNO

para la refrigeración óptima del lugar de tratamiento.

DISEÑO ERGONÓMICO

para un trabajo sin cansancio.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

para la máxima robustez y durabilidad.



CABEZAL REDUCIDO

para una visibilidad óptima del lugar de tratamiento.

BOTÓN DE PRESIÓN SISTEMA DE SUJECIÓN

para un cambio de fresa rápido y sencillo sin apenas ejercer fuerza.

ROTACIÓN DE 360°

para un trabajo sin cansancio y la máxima ergonomía.

TORQUE ELEVADO

para un tratamiento rápido y eficiente.

Máxima eficiencia y seguridad durante el tratamiento

Con Alegria podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad. Piezas de mano y contra-ángulos «Made in Austria» desarrolladas conforme a la acreditada calidad de W&H.

A la última

W&H es una empresa dinámica y en fuerte expansión. Le garantizamos el mejor asesoramiento y un servicio excepcional. Nuestra receta del éxito: Tecnologías innovadoras, materiales de alta calidad, estrictos criterios de calidad y años de experiencia en el desarrollo de instrumentos de precisión dentales son la receta del éxito de W&H.

Made in AUSTRIA



Preparación rápida y precisa

Para el uso eficaz de las piezas de mano y los contra-ángulos con los potentes micromotores de aire de W&H.



Cambio de fresa fácil

El botón de presión del sistema de sujeción permite un cambio fácil y rápido de la fresa.



Refrigeración del spray externa

La opción del clip del tubo de spray externo permite la refrigeración del lugar de tratamiento.



Su compañero perfecto

Esta combinación convierte a las piezas de mano y los contra-ángulos de W&H en el compañero perfecto para trabajar con sus pacientes.



Trabajo sin esfuerzo

Gracias a su excelente ergonomía evitará que sus manos realicen grandes esfuerzos durante el tratamiento. ¡Descubra las nuevas piezas de mano y los contra-ángulos Alegra para obtener los mejores resultados!



Máxima ergonomía

Una fácil rotación de 360° del contra-ángulo en el micromotor de aire, un reducido peso total y un diseño estilizado aseguran un trabajo sin cansancio.



AM-25 RM, AM-25 BC, AM-25 E RM, AM-25 E BC

W&H ofrece una amplia gama de micromotores de aire para sus piezas de mano y contra-ángulos Alegra.

Máximo rendimiento

Los potentes micromotores de aire le permiten el uso eficiente de las piezas de mano y los contra-ángulos.



Trabajo sin cansancio

gracias a su diseño ergonómico.



Equilibrio perfecto

El contra-ángulo se ajusta a la mano y se equilibra perfectamente con el micromotor de aire.

La mejor visibilidad y una durabilidad excepcional

El diseño de las piezas de mano y los contra-ángulos Alegra permite una gran visibilidad del lugar de tratamiento. Esto es especialmente útil para su uso en zonas de difícil acceso.



Máxima visibilidad

El reducido cabezal del contra-ángulo le garantiza una visión directa del lugar de tratamiento.



Robusto y duradero

La alta calidad de los materiales empleados hace que las piezas de mano y los contra-ángulos Alegra sean especialmente robustos y duraderos.



Otras ventajas

- > Cambio de componentes in situ
- > Termodesinfectable
- > Esterilizable a 135 °C

Higiene y mantenimiento de sus contra-ángulos y piezas de mano



Servicio técnico de W&H

«Cuanto mejor es la atención, mayor es la satisfacción.» La limpieza y el cuidado regulares de sus instrumentos protegen contra el desgaste prematuro y los costes innecesarios del servicio técnico.



El proceso de trabajo exacto para el mantenimiento de los instrumentos de transmisión y los motores puede encontrarlo en **wh.com**.

Esterilización en tiempo récord

Limpios, bien cuidados y esterilizados. El proceso de limpieza de Assistina 3x3 en combinación con el ciclo rápido Lisa reduce todo el tiempo de preparación. Después de tan solo 19 minutos, tendrá los instrumentos nuevamente disponibles.



Mantenimiento con solo pulsar un botón

La validación del proceso de limpieza está confirmada por expertos y puede consultarse en wh.com.




Assistina 3x2

En el caso de Assistina 3x2 el mantenimiento de los instrumentos se realiza en dos pasos: limpieza interior y lubricación.



Assistina TWIN

Es la primer unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna.

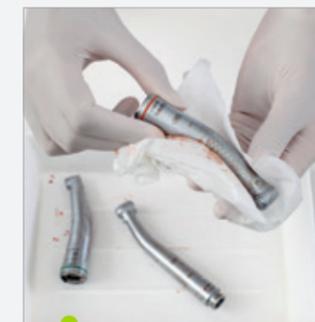

0 min

Desinfección mediante un paño desinfectante

Antes de la limpieza y el mantenimiento debería efectuarse una desinfección mediante un paño desinfectante.



6 min

Limpieza y mantenimiento

En la Assistina 3x3 se limpian y cuidan por dentro y por fuera tres instrumentos en tan solo 6 minutos.



13 min

Esterilización

Con el ciclo rápido Lisa podrán retirarse los instrumentos del esterilizador, listos para volver a usarse, después de tan solo 13 minutos.

Datos técnicos



Modelo:	WE-56	WE-57	WE-66	HE-43
Transmisión:	1:1	1:1	4:1	1:1
Tamaño del cabezal:	Ø 10,1 mm	Ø 10,1 mm	Ø 10,1 mm	–
Altura del cabezal (con fresa 19 mm):	20,8 mm	22,7 mm	20,8 mm	–
Instrumentos rotatorios:	Fresa de contra-ángulo	Fresa FG	Fresa de contra-ángulo	Fresa de piezas de mano y contra-ángulos
Diámetro del vástago del instrumento:	2,35 mm	1,6 mm	2,35 mm	2,35 mm
Máx. longitud:	34 mm	25 mm	34 mm	50 / 34 mm
Peso:	65 g	65 g	65 g	72 g
Spray (opcional):	Simple externo			

Micromotores de aire AM-25



Modelo:	AM-25 E RM AM-25 RM	AM-25 E BC AM-25 BC
Acoplamiento del lado de la manguera:	Conexión fija 4 vías estándar	Conexión fija 2(3) vías estándar
Spray:	externo –	externo –
Peso:	75 g 73 g	74 g 73 g
Potencia:	20 W	
Regimen de revoluciones (min ⁻¹) con una presión de funcionamiento de:	2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*	
Sentido del giro:	Giro a derecha/izquierda	

* La potencia y las revoluciones de los accionamientos neumáticos dependen de la calidad de la manguera de la turbina utilizada y, por tanto, podrá variar de los valores indicados.

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com