

SYSTEM
zetaplus



Clinical
C-Silicone Impression Material

Zhermack 
Dental

zetaplus system

Soluciones para las diferentes situaciones clínicas.

ZHERMACK reafirma el éxito de **ZETAPLUS SYSTEM**.

ZETAPLUS SYSTEM, apreciado en todo el mundo desde hace 25 años, ha mantenido en el tiempo elevadas prestaciones clínicas y una fiabilidad constante para alcanzar el mejor resultado en la *realización* de la *prótesis*.

zetaplus

zetaplus soft

oranwash L

thixoflex M

oranwash VL

REDUCCIÓN DEL MARGEN DE ERROR

› **Contraste cromático evidente** para una **disminución del riesgo de error** con el consiguiente **ahorro de tiempo y de material**.

REACTIVIDAD BALANCEADA

- › **Relación ideal** entre tiempo de trabajo y tiempo de polimerización (efecto **snap-set**).
- › **Dosificación óptima** del catalizador que aumenta el tiempo útil de trabajo, disminuyendo la contracción de la impresión.

EFECTO “FLOW CONDITIONING”

- › Aumento de **la fluidez, elevada estabilidad dimensional** gracias a la tecnología de las cargas esféricas a alta actividad SAS (Synthetic Amorphous Silicas).

zetaplus system

Efecto “flow conditioning” para una impresión de alta definición.

ZETAPLUS CON ORANWASH L Y THIXOFLEX M

ZETAPLUS, fluidez inicial y rigidez final

El **efecto “flow conditioning”** favorece la **fluidez** del material y **reduce la compresión** de las mucosas. **ZETAPLUS** es la **masilla que**, gracias a su **rigidez final**, se aconseja en la técnica de la doble impresión.

ORANWASH L, hidrocompatible y fluida


La silicona **light hidrocompatible y fluida**, es apta para la técnica de la doble impresión.

THIXOFLEX M, tixotropía, fluidez y hidrocompatibilidad

La silicona **light, tixotrópica y con una excelente fluidez**, garantiza una **precisa lectura de los detalles en ambiente húmedo gracias a su acentuada capacidad hidrocompatible**. Resulta indicada para la técnica de un solo paso.



Fluidez por efecto “flow conditioning”

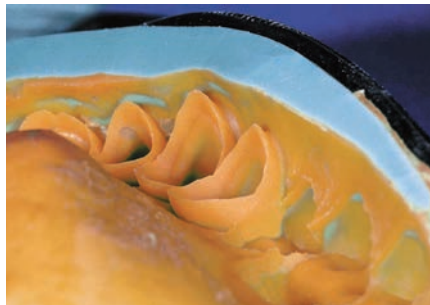

Fluidez en el surco gingival

ZETAPLUS SOFT CON ORANWASH VL

ZETAPLUS SOFT, fluidez y elasticidad


La silicona **putty fluida y elástica**, es apta para las diferentes situaciones clínicas. Se demuestra especialmente aconsejable para la técnica de un solo paso.




Rigidez óptima

ORANWASH VL, hidrocompatibilidad y elevada fluidez

La silicona **very light, hidrocompatible y altamente fluida**, es apta para todas las técnicas de impresión.

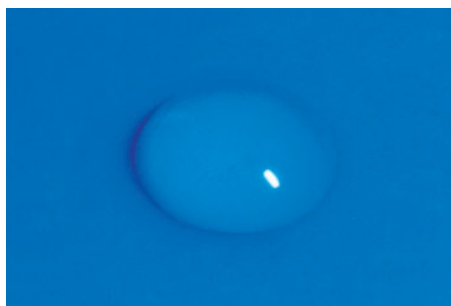

Fluidez en la elaboración

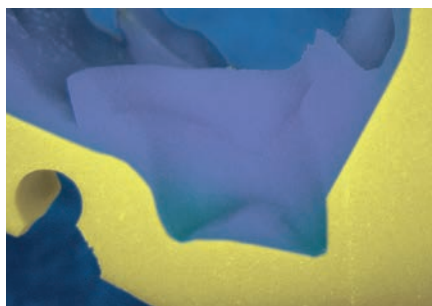


Hidrocompatible después de 1 minuto

indurent gel y zetaplus system

El contraste cromático ideal.

El catalizador **INDURENT GEL** garantiza una **mezcla homogénea tanto con la putty, como con las fluidas de ZETAPLUS SYSTEM.**

Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de endurecimiento

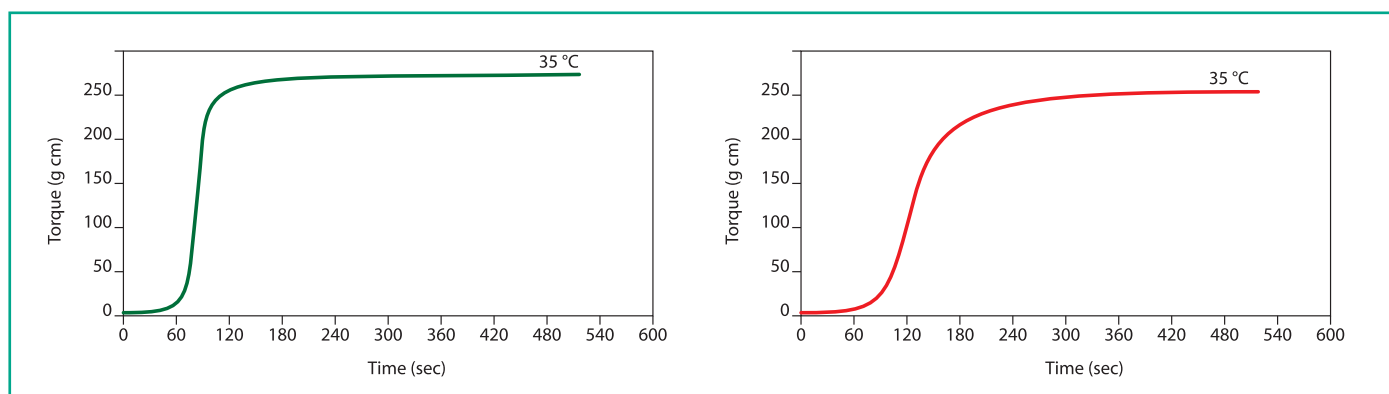

Efecto SNAP-SET (*zetaplus - zetaplus soft*)

Efecto SNAP-SET (*oranwash VL – oranwash L*)

DATOS TÉCNICOS

	ZETAPLUS	ZETAPLUS SOFT	ORANWASH VL	ORANWASH L	THIXOFLEX M
Tiempo de mezcla	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.
Tiempo total de trabajo	1 min. 15 sec.	1 min. 15 sec.	1 min. 30 sec.	1 min. 30 sec.	2 min.
Permanencia en la cavidad oral	3 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Tiempo de polimerización	4 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.	5 min.	5 min.	5 min. 30 sec.
Deformación a la compresión (mín/máx)	2% - 5%	2% - 5%	2% - 8%	2% - 8%	2% - 8%
Recuperación elástica	> 98%	> 98%	> 99%	> 99%	> 99%
Estabilidad dimensional	< -0,2%	< -0,2%	< -0,7%	< -0,7%	< -0,7%

Resultados ZETAPLUS SYSTEM

zetaplus system
Fiable en todas las situaciones.

Zhermack 
Dental

SYSTEM**zetaplus****Confecciones**

C100600 ZETAPLUS	1 bote de 900 ml/1.53 Kg + medidor
C100312 ZETAPLUS	1 bote de 1800 ml/3 Kg + medidor
C100468 ZETAPLUS	1 bidón de 10 Kg + medidor
C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L	1 bote Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + medidor + 1 tubo Oranwash L, 140 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla
C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L	1 bote Zetaplus, 200 ml + medidor + 1 tubo Oranwash L, 40 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla
C100610 ZETAPLUS SOFT	1 bote, 900 ml/1.53 Kg + medidor
C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL	1 bote Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + medidor + 1 tubo Oranwash VL, 140 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla
C100650 ORANWASH VL	1 tubo, 140 ml
C100660 ORANWASH L	1 tubo, 140 ml
C100670 THIXOFLEX M	1 tubo, 140 ml

Catalizadores

C100700 INDURENT GEL	1 tubo de 60 ml en gel
----------------------	------------------------

Aparatos

C303230 ALGHAMIX II	Mezclador mecánico para siliconas y alginatos (230 V)*
C303215 ALGHAMIX II	Mezclador mecánico para siliconas y alginatos (115 V)*

Accesorios

C207200	Espátula para siliconas, 1 pz.
C303020	Block de mezcla, 15 hojas
C303030	Disco para siliconas con bloques de mezcla para Alghamix
C207201	Block de mezcla para Alghamix, 20 hojas
D510010	Putty Cut

* Disco para siliconas disponible como accesorio

BRANCHES**GERMANY****Zhermack GmbH Deutschland**

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND**Zhermapol Sp. z o.o.**

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA**Zhermack Inc.**

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack