

El **Adhesivo Universal Proclinic Expert** proporciona restauraciones seguras y duraderas gracias a su alta fuerza adhesiva en esmalte y dentina. En una sola aplicación, resulta efectivo para cualquier tipo de preparación cavitaria y para todas las técnicas de adhesión.

1 PRODUCTO

1 PASO, 1 CAPA


VERSATILIDAD TOTAL

TODAS LAS TÉCNICAS DE ADHESIÓN

Autograbado Grabado total Grabado selectivo en esmalte

TODAS LAS SUPERFICIES

La fórmula del **Adhesivo Universal Proclinic Expert** cuenta con el equilibrio perfecto en sus propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas para asegurarte la mejor adhesión. Incluso en dentina húmeda, el adhesivo se reparte de forma homogénea en toda la superficie, dejándola libre de aire y minimizando así la sensibilidad del paciente.

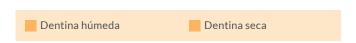

TODAS LAS RESTAURACIONES



INDICACIONES

- → Restauraciones directas de composite y compómeros fotopolimerizables.
- → Core build-up y cementación de postes, en composites duales y autopolimerizables, si es posible fotopolimerizar el adhesivo con luz.
- → Restauraciones indirectas como inlays, onlays, coronas y puentes, de composites duales y autopolimerizables, si es posible usar la luz de polimerización con el adhesivo.
- → Reparación de restauraciones fracturadas de composite.



COBERTURA UNIFORME


RESTAURACIONES **DURADERAS**



MÁXIMA ADHESIÓN

La resistencia al cizallamiento del **Adhesivo Universal Proclinic Expert** ha sido testada en combinación con diferentes técnicas de adhesión. Los resultados muestran la comparativa con el líder del mercado.

TÉCNICA DE AUTOGRABADO 35 MPa 28,7 MPa 19,1 MPa 20,4 MPa 19,1 MPa En esmalte Adhesivo Universal Proclinic Expert

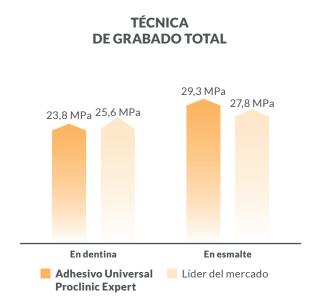



Dra. Carmen MiñanaClínica Miñana-Peris
Número colegiado: 46001971

"Es un adhesivo fluido, fácil de extender y sin embargo no gotea. La primera capa de composite se pega al fondo correctamente, señal inequívoca de su poder de adhesión. No necesita grabado ácido, con lo cual, el procedimiento se ve simplificado sin perder eficacia".

