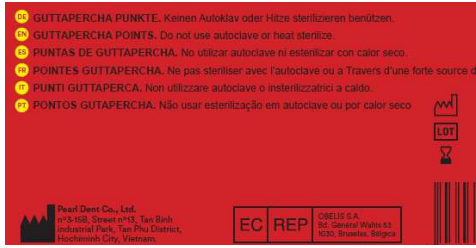

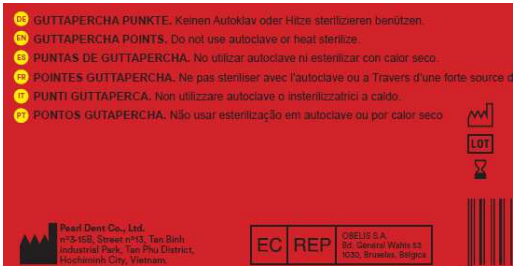
	FICHA TÉCNICA	TDS_
	PUNTAS GUTTA PERCHAS RECIPROC	Fecha: 24/May/18
	BESTDENT	Versión: 01

PRODUCTO	BESTDENT PUNTAS GUTTA PERCHA	
REFERENCIAS	81814 GUTTAPERCHA RECIPROCANTE PARA R25 (60u) 81815 GUTTAPERCHA RECIPROCANTE PARA R40 (60u) 81816 GUTTAPERCHA RECIPROCANTE PARA R50 (60u) 81817 GUTTAPERCHA RECIPROCANTE SURTIDA (60u)	
COMPAÑÍA	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.	
CLASSIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Gutta Percha es un dispositivo hecho de savia coagulada de ciertos árboles tropicales destinados a llenar el conducto radicular de un diente. La Gutta Percha se ablanda por el calor y se inserta en el conducto radicular, donde se endurece a medida que se enfría.	
ESPECIFICACIONES	<p>La punta Gutta Percha es redonda y tiene un color rosado, con una cabeza grande y una cabeza pequeña.</p> <p>Dependiendo del tipo y tamaño, las puntas Gutta Percha tienen diferentes tamaños, que se clasifican de acuerdo a la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño estándar ISO, código de color n. ° 8 - n. ° 140; - Tamaño de Detrey (XXF, XF, F, M); - A, B, C, D Tamaño; - Taper 0.04 / Taper 0.06; - X-Prototype F1, F2, F3, F4, F5; - Tipo de GC; - Tamaño de Regulador - Tamaño de Japón; - Tamaño de micropunta; Tamaño de proceso (R25, R40, R50) 	
COMPOSICIÓN	Óxido de Zinc, Sulfato de Bario, Colorante	
ENVASE	Embalaje: Caja de plástico compartimentalizada. Cuantificación: La caja está dividida en 6 compartimentos. Contiene: 60 puntas / caja; Dentro de la caja de diapositivas: 10 puntas / compartimento.	
USO PREVISTO	Sólo para uso dental. Material de relleno permanente de los canales radiculares de los dientes.	
TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. No esterilizar en autoclave ni por calor.	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_
	GUTTA PERCHA RECIPROC POINTS	Date: 24/May/18
	BESTDENT	Version: 01

PRODUCT	BESTDENT GUTTA PERCHA RECIPROC POINTS	
REFERENCES	81814 81815 81816 81817	
COMPANY	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.	
CLASSIFICATION	Class IIa medical device, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Gutta Percha is a device made from coagulated sap of certain tropical trees intended to fill the root canal of a tooth. The Gutta Percha is softened by heat and inserted into the root canal, where it hardens as it cools.	
SPECIFICATIONS	Gutta Percha Point is round and have pink color, with a large head and a small head. Depending on the type and size, Gutta Percha Point has different sizes, which are classified according to each type as follows : <ul style="list-style-type: none"> - ISO Standard Size, Color coded #8 - #140 ; - Detrey Size (XXF, XF, F, M) ; - A, B, C, D Size ; - Taper 0.04/ Taper 0.06 ; - X-Prototype F1, F2, F3, F4, F5 ; - GC Type ; - Reguler Size ; - Japan Size ; - Microtip Size ; Proc size (R25, R40, R50)	
COMPOSITION	Zinc oxide, Barium sulfate, coloring agent	
PACKAGING	Packaging: Box of PS plastic: Slide box Quantification: Slide box (6 compartments) contain: 60 points / box; Inside of Slide box: 10 points / compartment.	
INTENDED USE	Only for dental use. Filling material (permanent use) of the cleaned root canals of tooth.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry area, away from direct sunlight. Protect from moisture. The device should not be sterilized by autoclave or heat.	