




# EL NUEVO IMPLACARE™ II

Hu-Friedy

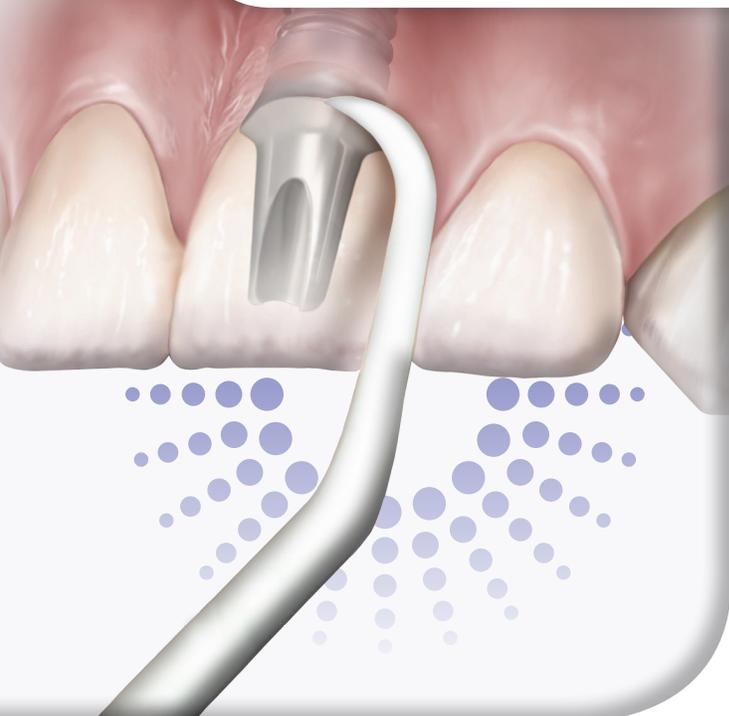

## INFORMACIÓN

La investigación ha demostrado la relación entre las alteraciones de superficie periimplantarias y el desarrollo de mucositis periimplante y periimplantitis<sup>1</sup>.

## DESAFÍO

Los profesionales clínicos deben poder limpiar los implantes eficientemente y con mínima alteración de las superficies de sostén. Las superficies alteradas pueden ser una fuente de acumulación de placa, lo cual puede provocar mucositis periimplantarias y peri-implantitis.

## SOLUCIÓN

La nueva cureta Implacare II de Hu-Friedy, Implacare II, proporciona hojas más delgadas con un nuevo diseño que permite adaptarse mejor, para una limpieza eficaz y mínima alteración a la superficies de sostén del implante.

## CARACTERÍSTICAS DEL IMPLACARE II

- **Hechas de PLASTEEL™:** Una resina sin relleno, lo que permite una mínima alteración en la superficies de sostén del implante
- **La hoja de corte es un 20% más delgada:** Mejora el acceso a las superficies de sostén del implante, lo que permite un mantenimiento y cuidado más efectivo de los implantes
- **Dos nuevos diseños de curetas universales:** La hoja Barnhart 5/6 y el Langer 1/2 se unen a la Columbia 4R/4L, 204S y H6/H7 para ofrecer una solución completa y una mejor adaptación a las necesidades de cada paciente

CONSULTE LA LISTA COMPLETA DE KITS Y PUNTAS LMPLACARE II Y EQUIPOS AL DORSO.

<sup>1</sup> Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, et al: The influence of abutment surface roughness on plaque accumulation and peri-implant mucositis, Clin Oral Implants Res 7:201-III, 1996.  
<sup>2</sup> Datos en archivo.

How the best perform

**Hu-Friedy**

## CURETAS UNIVERSAL

Hoja de corte diseñada con dos bordes cortantes y punta curva que permite adaptarse a todas las superficies.



### **NUEVO** Langer 1/2

IMPLLG1/26  
Kit Implacare™ II LG1/2  
(Mango + 12 pares)  
IMPLLG1/2  
Repuesto Implacare II LG1/2 12  
(12 pares)

*Combina los ángulos de un cureta Gracey con los bordes cortantes duales de un cureta universal.*



### **NUEVO** Barnhart 5/6

IMPLBH5/66  
Kit Implacare II BH5/6  
(Mango + 12 pares de repuestos)  
IMPLBH5/6  
Repuesto Implacare II BH5/6  
(12 pares)



### **Columbia** 4R/4L

IMPL4R/4L6  
Kit Implacare II 4R/4L  
(Mango + 12 pares de repuestos)  
IMPL4R/4L  
Repuesto Implacare II 4R/4L  
(12 pares)

## RASPADORES

Hojas de corte que terminan en punta, diseñadas para la remoción de cálculo supragingivales.



### **H6/7**

IMPLH6/76  
Kit Implacare II H6/H7  
(Mango + 12 pares de repuestos)  
IMPLH6/7  
Repuesto Implacare II H6/H7  
(12 pares)

*El ángulo del mango proporciona acceso a todas las superficies anteriores y premolares.*



### **204S**

IMPL204S6  
Kit Implacare II 204S  
(Mango + 12 pares de repuestos)  
IMPL204S  
Repuesto Implacare II 204S  
(12 pares)

*Proporciona un acceso óptimo a la zona posterior para limpieza supragingival interproximal.*



## OPCIONES ADICIONALES

### **Kit Implacare II Intro**

IMPLINTRO6

#### **Incluye:**

- 1 mango para Implacare II
- 1 par de Columbia 4R/4L
- 1 par de 204S
- 1 par de H6/H7
- 1 par de Barnhart 5/6
- 1 par de Langer 1/2

### **Opciones variadas de Implacare II**

IMPLSORT6 (incluye mango)

IMPLSORT

#### **Ambos juegos incluyen:**

- 4 pares de Columbia 4R/4L
- 4 pares de 204S
- 4 pares de H6/H7

### **kit de inicio para el mantenimiento de los implantes**

IMPCKITII

#### **Incluye:**

- Mango Colorvue®
- 3 puntas Colorvue
- 1 mango para Implacare II
- 5 pares de puntas para Implacare II

Visite nuestro sitio web [Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com)

Para más información llame al 0011 800 HU-FRIED (483-7433) o contacte a su representante autorizado de Hu-Friedy.  
©2012 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HF-22025/1212.

