

KaVo RONDOflex® plus

Trabajo brillante
en la práctica
diaria.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo RONDOflex® plus. Sistema de abrasión por aire con spray.

Un trabajo limpio.

KaVo RONDOflex plus es la alternativa limpia frente a los aparatos de abrasión por aire habituales.

El principio: Las partículas de polvo definidas se aceleran en una corriente de aire a gran velocidad (20 m/seg.). Durante el impacto de estas partículas sobre la superficie a limpiar, se erosiona la sustancia dental exactamente en el punto deseado por medio de energía cinética.

La particularidad de KaVo RONDOflex plus:


Un manto de agua envuelve la corriente de polvo en la punta de la cánula. De esta forma se captan todas las partículas de polvo. Esto significa menos carga de ambiente y suciedad con la misma eficacia. Y también los pacientes sienten la diferencia: Sin una boca reseca por el polvo después del tratamiento.



El multi-talento para el empleo flexible:

Gracias al acoplamiento – MULTIflex el RONDOflex plus está listo inmediatamente para su uso. Simplemente acoplar y ya está. Sin aparatos o conexiones adicionales. Sin montaje.

Esto significa para Vd.: Trabajo altamente eficaz y limpio, ligero, preciso y con una protección óptima de la sustancia dental sana.

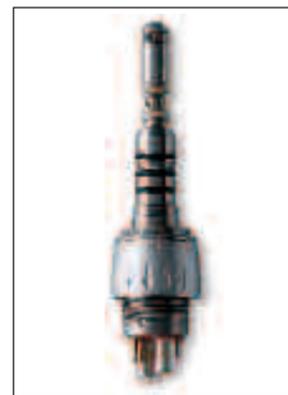

Multiflexible:
KaVo RONDOflex plus encaja sobre el acoplamiento – MULTIflex y por lo tanto se puede emplear inmediatamente en cualquier unidad de tratamiento.

Esto significa para sus pacientes:

Tratamiento cuidadoso sin fresa, sin jeringa, sin ruido, sin vibración y sin sensación desagradable en la boca.

KaVo RONDOflex plus – tan fuerte. Tan limpio. Tan eficaz.

KaVo RONDOflex® plus.

Trabajo flexible.


Con KaVo RONDOflex plus hay muchas posibilidades:

- Preparación de caries mínimoinvasivas
- Abrir fisuras
- Preparación de superficies de pegamento
- Eliminación de restos de cemento de coronas y puentes – extra oral.


Vd. puede cubrir de forma ideal todas las indicaciones para la abrasión por aire con RONDOflex plus. Para una potencia

de abrasión fuerte utilice el polvo con el tamaño de partícula 50 µm. Para una potencia de abrasión menor el polvo del tamaño de partícula 27 µm. Además dispone Vd. de cuatro cámulas diferentes.

KaVo RONDOflex plus – tan económico. Tan flexible. Tan bueno.

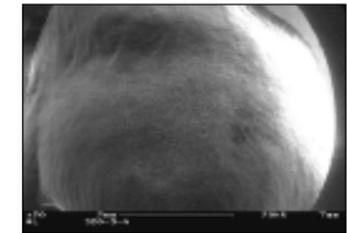

Cavidad después de 60 segundos de chorreo con polvo de 50 µm. Rendimiento de abrasión excelente y contornos claramente reconocibles.

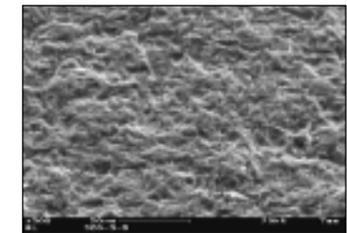

Superficie de la cavidad de arriba aumentada 500 veces. La rugosidad de la estructura de la superficie es uniforme en toda la cavidad.




Vd. puede elegir entre dos polvos de corindón con una granulación de 50 µm y 27 µm – diferenciados por colores.

Trabajo en equipo.

La apariencia de caries ha variado en los últimos años. Cada vez más destruye el diente desde dentro sin que se pueda ver desde fuera. Un caso claro para KaVo DIAGNOdent y RONDOflex plus. Contra este equipo la caries no tiene la más mínima posibilidad.

Si ha detectado una caries con DIAGNOdent en un estado temprano, el RONDOflex plus despliega sus cualidades: Vd. abre las cavidades de forma precisa y exactamente en el punto necesario, cuidando la sustancia dental sana al máximo.

KaVo RONDOflex plus y KaVo DIAGNOdent – simplemente un equipo perfecto.

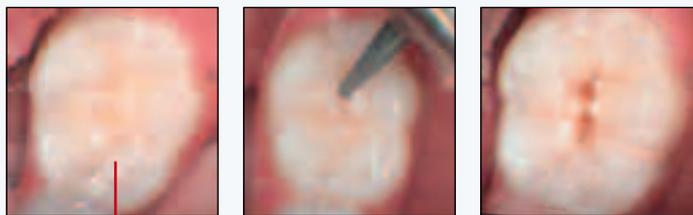

Detectada a tiempo

Abierta con cuidado

Caries eliminada



Detección de caries precoz con KaVo DIAGNOdent:
para un hallazgo completo y un tratamiento suave.



KaVo. Dental Excellence.