


**Maxcem Elite**

Cemento de resina de polimerización dual de autograbado/autoadhesivo



Your practice is *our* inspiration.™

**Maxcem Elite** | Simplicidad refinada.

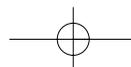

## Maxcem Elite

Llevar la simplicidad a un nivel superior.



Maxcem Elite, el cemento de resina de autograbado y autoadhesivo para restauraciones indirectas es una solución de simplicidad refinada – con mayor resistencia de fijación y excelente facilidad de uso – y tecnología comprobada en la que no se sacrifica el rendimiento. Limpieza fácil, sin necesidad de mezclas ni refrigeración. Para mayor comodidad, las puntas intraorales y del canal de la raíz permiten dispensar el material en lugares de difícil acceso.

*Inspirado en: Los agentes de fijación propician la sensibilidad técnica y constituyen un reto diario para los dentistas. Maxcem Elite elimina este paso para ofrecer el mejor rendimiento posible y la comodidad y tranquilidad que necesita el dentista.*

### Investigación

Maxcem Elite emplea el mismo adhesivo exclusivo que se emplea en la familia de adhesivos OptiBond de Kerr. La matriz de resina optimizada y los sistemas de relleno mejoran la capacidad para humedecerse, lo cual genera una mayor adherencia y permite una fotopolimerización inmediata y una mejor estabilidad en almacenamiento. La propiedad isotrópica de Maxcem Elite facilita la colocación del material y la limpieza. Un sistema iniciador redox patentado elimina la decoloración inherente a los sistemas iniciadores de BPO/aminas terciarias para restauraciones proporcionando unos mejores resultados estéticos.

### Características

**Resistencias de fijación entre 22-36 MPa.** Alta resistencia de fijación sin adhesivos.

**Facilidad de uso.** Limpieza fácil, no es necesaria la refrigeración ni la mezcla manual.

**Compatibilidad con los sustratos más comunes.** Cerámicas anteriores o posteriores, restauraciones metálicas y PFM y materiales CAD/CAM.

**Mecanismo eficaz de autopolimerización.** Polimeriza totalmente cuando no se dispone de luz.

## Información sobre pedidos

### 34055 - Kit estándar de Maxcem Elite

Contiene: 5 jeringas de 5g (2 transparentes, blancas, blanco opaco, amarillas) 30 puntas de automezcla normales, 20 puntas de automezcla con aberturas anchas, 10 puntas intraorales, 10 puntas del canal de la raíz, guía técnica.

### 34056 - Kit Económico Maxcem Elite

Contiene: 2 jeringas transparentes de 5g, jeringa de automezcla de 11,7 g de TempBond NE, 10 puntas de automezcla normales, 10 puntas de automezcla con aberturas anchas, 10 puntas intraorales de automezcla, 10 puntas de automezcla TempBond, guía técnica.

### 34057 - Kit mini de Maxcem Elite

Contiene: 1 jeringa transparente de 5g, 5 puntas de automezcla normales, 5 puntas de automezcla con aberturas más anchas y 5 puntas intraorales, guía técnica.


### Paquetes de repuestos de tonos individuales de Maxcem Elite

Contiene: 2 jeringas de 5g, 10 puntas de automezcla normales, 10 puntas de automezcla con abertura ancha, guía técnica.


- 34058 - Transparente
- 34059 - Blanco
- 34060 - Blanco opaco
- 34061 - Amarillo
- 34062 - Marrón

### Accesorios

- 34074 - 50 puntas de mezcla normales de Maxcem Elite
- 34075 - 10 puntas intraorales, puntas de automezcla (anchas) de Maxcem Elite
- 34076 - 10 puntas de canal de raíz, puntas de automezcla (anchas) de Maxcem Elite

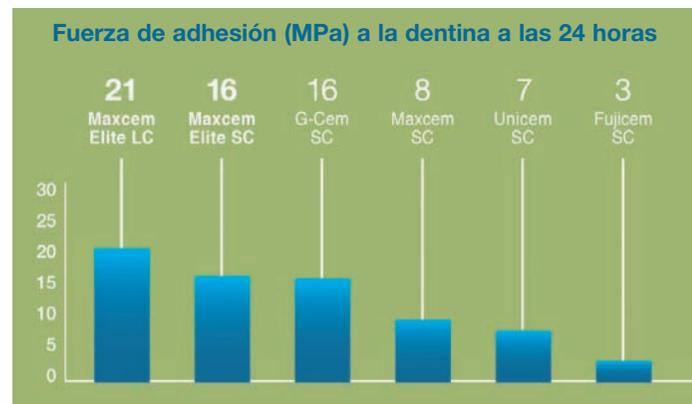

Prueba de 24 horas. Datos Dr. Carlos Muñoz, SUNY (Buffalo). Disponible previa petición.

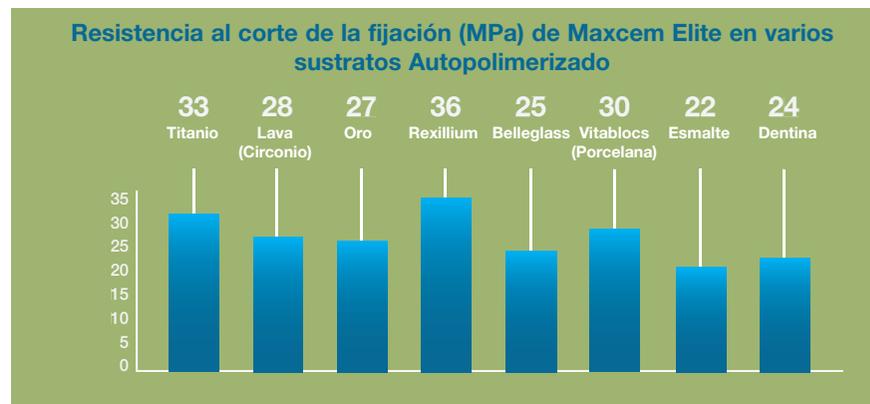

Prueba de 24 horas. Datos internos. Disponible previa petición.