

Máxima protección contra aerosoles

La gama de cánulas de aspiración y piezas de mano de Dürr Dental




¡ÚNICO!
Absorción de aerosoles hasta dos veces mayor con la cánula de aerosoles



**DÜRR
DENTAL**

THE BEST, BY DESIGN

La cánula de aerosol: hasta 2 veces más absorción de aerosol

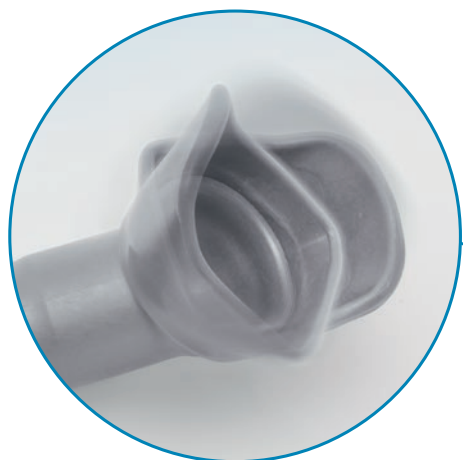

El protector de la punta de la cánula puede girar por completo. Esto permite una aspiración especialmente eficaz de la nube de aerosol.



Más protección para el paciente y el profesional

La cánula de aerosol de Dürr Dental es única en el mundo. Con su protector giratorio y ajustable, la cánula permite una aspiración extremadamente eficaz del aerosol. Gracias a la orientación de la cánula en la boca, el flujo de polvo puede dirigirse con precisión a los dientes y aspirarse, lo que proporciona una protección óptima de la mucosa oral y reduce significativamente la nebulización del aerosol alrededor del paciente. Las entradas de aire proporcionan la mejor protección contra el reflujo del sistema de aspiración.

Otra ventaja es el protector de posición variable en la punta de la cánula que permite realizar una aspiración extraordinariamente ergonómica. Cuando se usan diques de goma, la aspiración resulta aún más cómoda. En tratamientos protésicos o de conservación, como por ejemplo la retirada de empastes o el corte de coronas o puentes, es necesario aspirar partículas más grandes. En estos casos la pieza protectora mejora claramente la protección. La elevada absorción de aerosoles hace que la cánula de aerosoles resulte ideal para tratamientos sin necesidad de un asistente.

En resumen:

- Duplica la entrada de aerosol en comparación con las cánulas de aspiración
- Previene la irritación de las membranas mucosas causada por el aerosol
- Tratamiento ergonómico
- Entradas de aire externo Protect para evitar el reflujo



Prevención segura contra las infecciones

Reduce el aerosol cargado de gérmenes directamente en la boca del paciente - ¡hasta el 100%!

Nuestra gama de cánulas de aspiración



■	Cánula Universal Protect gris	pack 20 ud.	0700-059-00
■	Cánula Universal Protect gris	pack 5 ud.	0700-059-50
■	Cánula Universal Protect amarilla	pack 5 ud.	0700-059-51
■	Cánula Universal Protect azul	pack 5 ud.	0700-059-54



■	Cánula de profilaxis	pack 4 ud.	0700-058-50
---	----------------------	------------	-------------

Protección contra el reflujo: Cánula Universal Protect

Las entradas de aire externas pueden evitar que durante la aspiración en las cánulas se produzca un reflujo de secreciones contaminadas procedentes del sistema de aspiración. La cánula universal Protect no tiene ángulos ni bordes, ni deja marcas.

Cánula de profilaxis: Una absorción de aerosoles hasta dos veces mayor

Exclusiva de Dürr Dental: una pieza protectora giratoria y ajustable, desarrollada especialmente, permite captar una gran cantidad de aerosoles y aspirar en posición ergonómica. Es especialmente eficaz durante tratamientos profilácticos con aparatos de proyección de polvo.



■	Cánula Universal gris	pack 20 ud.	0700-054-00
■	Cánula Universal gris	pack 5 ud.	0700-055-50
■	Cánula Universal amarillo	pack 5 ud.	0700-055-51
■	Cánula Universal rosa	pack 5 ud.	0700-055-53
■	Cánula Universal azul	pack 5 ud.	0700-055-54
■	Cánula Universal turquesa	pack 5 ud.	0700-055-55



Cánula Universal III para adultos

Las cánulas universales de Dürr Dental son especialmente silenciosas. Según un estudio realizado por el Instituto Fraunhofer, el ruido medido estaba claramente por debajo del nivel de otros fabricantes comparables de la competencia. Por eso ofrecen una aspiración de neblina de spray con un bajo nivel de ruido demostrado. Y sin que queden marcas una vez retirada la cánula.




■	Cánula Universal Petito 16 mm gri	pack 5 ud.	A700056050
■	Cánula Universal Petito 16 mm amarillo	pack 5 ud.	A700056051
■	Cánula Universal Petito 16 mm rosa	pack 5 ud.	A700056053
■	Cánula Universal Petito 16 mm azul	pack 5 ud.	A700056054
■	Cánula Universal Petito 16 mm turquesa	pack 5 ud.	A700056055

∅ 16 mm

Cánula Universal Petito para niños

Para los niños se necesita una cánula altamente funcional que permita un tratamiento ergonómico. La cánula universal Petito es más pequeña que la cánula universal y garantiza la máxima protección contra reflujo del sistema de aspiración con las entradas de aire secundario Protect. Tampoco presenta ángulos ni bordes, ni deja marcas.

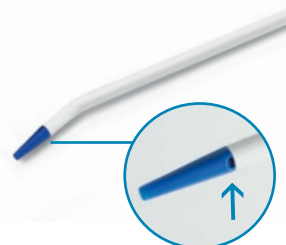

Cánula aspiración quirúrgica desechable	∅ 2,5 mm	pack 20 ud.	0700-007-50
Cánula aspiración quirúrgica desechable	∅ 2,5 mm	pack 100 ud.	0700-007-51

Cánula de aspiración quirúrgica desechable

Cánulas quirúrgicas de un solo uso con un diámetro de 2,5 mm y una longitud de cánula de aprox. 17 cm. La cánula dispone de una punta con entrada de aire secundario Protect integrada. Ofrecen la mejor protección posible contra el reflujo procedente del sistema de aspiración. El paquete de cánulas está envasado y esterilizado individualmente.

Piezas de mano a medida

La gama de piezas de mano de Dürr Dental

Dürr Dental ofrece el adaptador de aspiración adecuado prácticamente para todos los fabricantes del mercado. Esto permite una configuración a medida de las piezas de mano de aspiración. Para trabajar en una postura ergonómica y sin cansarse, se puede utilizar el empalme esférico. Ofrece el ángulo adecuado, reduce la palanca y mejora el manejo de forma decisiva. Cada una de las piezas de mano se puede adquirir con o sin corredera giratoria. Con la corredera se puede interrumpir por corto tiempo el poder de aspiración. Con la cubierta giratoria con entradas de aire secundario Protect se simplifica aún más el trabajo.


En resumen:

- Configuración a medida de las piezas de mano de aspiración
- Corredera giratoria para la interrupción de la fuerza de aspiración
- Sin ningún tipo de ruido de flujo molesto encontrándose colgados los tubos flexibles de aspiración, gracias al empleo de válvulas especiales
- Articulación esférica para un mayor confort de manejo (opcional)
- Piezas de mano esterilizables en autoclave a una temperatura de 134 °C
- La articulación esférica facilita un aumento de la vida útil del tubo flexible de aspiración

Ejemplo: combinación 1



Ejemplo: combinación 2

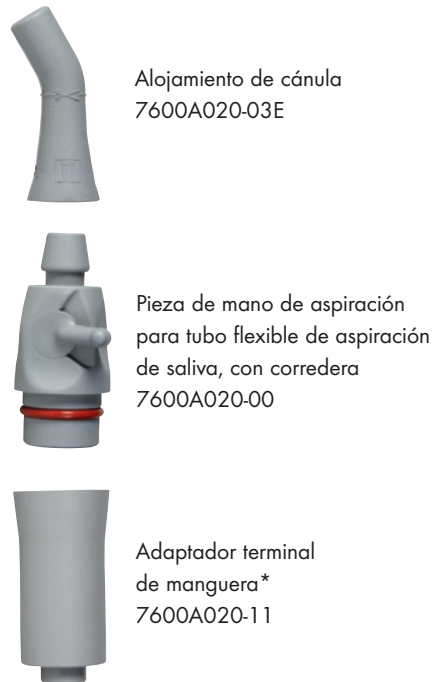

Ejemplo: combinación 3




Embudo/Tolva para pieza de mano de aspiración grande

Esterilizable en autoclave (134 °C)
7068-003-05



*Adaptador terminal de manguera para soportes Dürr Dental Comfort



Una calidad excelente para el paciente y el equipo de la clínica

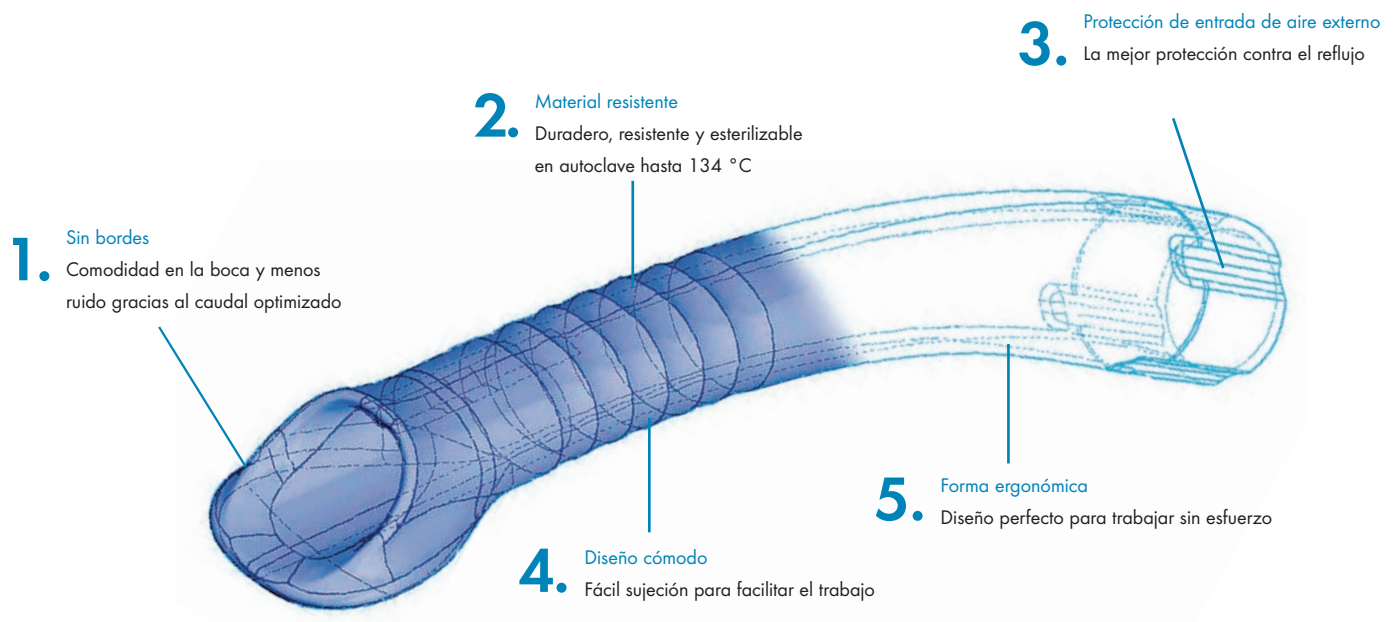

Máxima calidad de un fabricante

Con su variedad de cánulas extraordinariamente silenciosas, Dürr Dental contribuye a mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la clínica. Pero ésta es sólo una de sus múltiples ventajas.

Las cánulas se han diseñado para que resulten extremadamente cómodas en la boca del paciente y para no causar molestias una vez retiradas. Otro aspecto destacable son las entradas de aire externo de las cánulas Protect, que protegen contra el reflujo de secreciones procedentes del sistema de aspiración.**

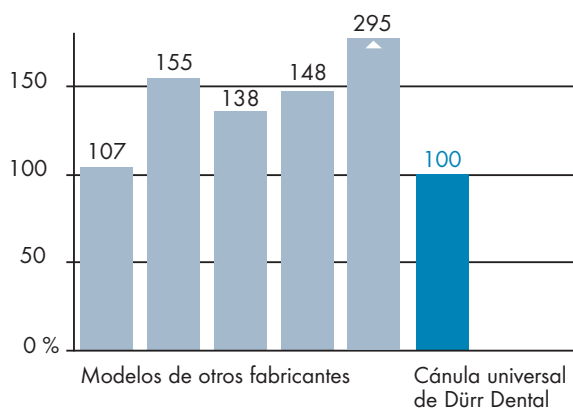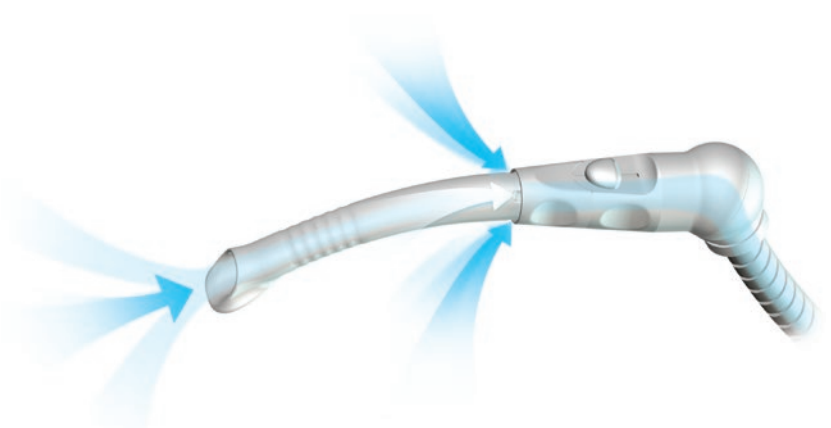

Muy silencioso*:
la cánula universal
de Dürr Dental

En resumen:

- Entradas de aire externo Protect para evitar el reflujo**
- Reducción de la nube de aerosol
- Sin bordes ni cantos: las cánulas son perfectas para garantizar la postura ergonómica durante el trabajo
- Cánulas quirúrgicas para grandes volúmenes de sangre

* Fraunhofer Institute for Building Physics

** Véase el comunicado de la Comisión para higiene hospitalaria y prevención de infecciones del Instituto Robert Koch para la „Prevención de infecciones en odontología: requisitos para la higiene”, capítulo 5.2, publicado en el boletín del Departamento Federal de Salud Pública 4/2006 (Springer-Verlag, Heidelberg)

DÜRR DENTAL MEDICS IBÉRICA SAU
Serra de la Salut, 11 Nave 6. Pol. Ind. Santiga
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
España
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

