

Mini Sprint® Brackets

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*										
MAXILAR										
	780-0513	780-0413	780-0313	780-0203	780-0103	779-0103	779-0203	779-0313	779-0413	779-0513
	780-0503	780-0403	780-0303	—	—	—	—	779-0303	779-0403	779-0503
 Mini-Sprint  CE 0297	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-7 °	-7 °	-7 °	+10 °	+17 °	+17 °	-7 °	-7 °	-7 °
	Angulation	0 °	0 °	+8 °	+8 °	+4 °	+4 °	+8 °	0 °	0 °
	In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	0,9	1,3
	Rotation									
	Torque	-17 °	-12 °	-6 °	-6 °	-6 °	-6 °	-6 °	-12 °	-17 °
	Angulation	+2 °	+2 °	+3 °	0 °	0 °	0 °	+3 °	+2 °	+2 °
	In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
	Rotation									
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	780-1613	780-1513	780-1413	780-1203	780-1203	780-1203	780-1203	779-1413	779-1513	779-1613
	780-1603	780-1503	780-1403	780-1213	780-1213	779-1213	779-1213	779-1403	779-1503	779-1603
MANDIBULAR										
Casos	1	5	10	20	50					
Brackets	20	100	200	400	1000					
	706-1031	706-1032	706-1033	706-1034	706-1035					
 3	706-1036	706-1037	706-1038	706-1039	706-1040					
 3-5	706-1041	706-1042	706-1043	706-1044	706-1045					

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*										
MAXILAR										
	780-0511	780-0411	780-0311	780-0201	780-0101	779-0101	779-0201	779-0311	779-0411	779-0511
	780-0501	780-0401	780-0301	—	—	—	—	779-0301	779-0401	779-0501
 Mini-Sprint  CE 0297	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-7 °	-7 °	-7 °	+10 °	+17 °	+17 °	-7 °	-7 °	-7 °
	Angulation	0 °	0 °	+8 °	+8 °	+4 °	+4 °	+8 °	0 °	0 °
	In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	1,3
	Rotation									
	Torque	-17 °	-12 °	-6 °	-6 °	-6 °	-6 °	-6 °	-12 °	-17 °
	Angulation	+2 °	+2 °	+3 °	0 °	0 °	0 °	+3 °	+2 °	+2 °
	In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
	Rotation									
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	780-1611	780-1511	780-1411	780-1201	780-1201	780-1201	780-1201	779-1411	779-1511	779-1611
	780-1601	780-1501	780-1401	780-1211	780-1211	790-1211	790-1211	779-1401	779-1501	779-1601
MANDIBULAR										
Casos	1	5	10	20	50					
Brackets	20	100	200	400	1000					
	706-1046	706-1047	706-1048	706-1049	706-1050					
 3	706-1051	706-1052	706-1053	706-1054	706-1055					
 3-5	706-1056	706-1057	706-1058	706-1059	706-1060					

Mini Sprint® Brackets – Starter Kits



Roth-System*

Slot .018"	CE 0297
707-1131	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema Roth, Slot .018" sin gancho, 20 casos, 5 – 5
707-1132	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Roth-System, Slot .018", 3 con gancho, 20 casos, 5 – 5
707-1133	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema Roth, Slot .018", 3-5 con gancho, 20 casos, 5 – 5

Slot .022"	CE 0297
707-1134	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema Roth, Slot .022" sin gancho, 20 casos, 5 – 5
707-1135	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema Roth, Slot .022" 3 con gancho, 20 casos, 5 – 5
707-1136	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema Roth, Slot .022" 3-5 con gancho, 20 casos, 5 – 5
	Contenido adicional en cada kit: 2 paquetes arcos BioStarter .012" max./man. 2 paquetes arcos BioTorque .016" x .022" max./man. 100 ligaduras de acero de acuerdo a Dr. Ch. Sander

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

Slot .018"	CE 0297
707-1231	Starter Kit Mini Sprint® Brackets, Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .018" sin gancho, 20 casos, 5 – 5
707-1232	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .018" 3 con gancho, 20 casos, 5-5
707-1233	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .018" 3-5 con gancho, 20 casos, 5-5

Slot .022"	CE 0297
707-1234	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .022" sin gancho, 20 casos, 5-5
707-1235	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .022" 3 con gancho, 20 casos, 5-5
707-1236	Starter Kit Mini Sprint® Brackets Sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi, Slot .022" 3-5 con gancho, 20 casos, 5-5
	Contenido adicional en cada kit: 2 paquetes arcos BioStarter .012" max./man. 2 paquetes arcos BioTorque .016" x .022" max./man. 100 ligaduras de acero de acuerdo a Dr. Ch. Sander

Mini Sprint® Brackets





Mini Sprint® Brackets

estético, práctico y confiable.

Mini Sprint® Brackets – los brackets de calidad para su práctica.



Estética

Los Mini Sprint® brackets son estéticamente más sofisticados que los brackets tradicionales. La altura oclusal-gingival ha sido reducida un 20% en comparación con el Sprint® bracket Standard, lo cual mejora la estética y el confort drásticamente. 1

Práctico

El Mini Sprint® Bracket es el 1º bracket en el mercado que combina los aspectos estéticos y las ventajas mecánicas de un bracket de tamaño normal. El Mini Sprint® Bracket presenta unas profundas aletas para un fácil y seguro doble ligado mediante el uso de elásticos y cadenas elásticas. 2

El sistema de brackets Mini Sprint® proporciona una dimensión ideal en el sentido mesio-distal, garantizando un excelente control de rotación. La base del bracket presenta una geometría que se adapta perfectamente al contorno natural del diente. Como clínico puede beneficiarse de una mejora importante en la manipulación. 3

Los ganchos redondeados y en forma de hongo proporcionan una segura colocación de los elásticos y el marcado del eje central hace muy fácil la colocación del bracket en la corona.

Confiable

La única base patentada en 3D en el mercado, proporciona más de un 30% de incremento en la resistencia de cementado comparado con una base de malla. El descementado es fácil, confiable y eficiente, quedando gran parte del adhesivo en la base durante el mismo. Clínicas y pacientes se podrán beneficiar de una notable reducción del tiempo de sillón. 4

Rapidez de tratamiento

Los ángulos redondeados de la ranura y las superficies súper pulidas reducen significativamente la fricción y acortan el tiempo de tratamiento. Los brackets Mini Sprint® son fabricados utilizando la técnica MIM (Metal Injection Moulding) con una ingeniería de precisión sin igual, en el diseño y fabricación de los moldes. Como resultado los brackets Mini Sprint® producen un 45 % menos de fricción que los brackets mecanizados*. 5

Alta Calidad

Los Brackets Mini Sprint®, están fabricados en una sola pieza de acero inoxidable utilizando la técnica MIM. Están libres de Níquel y altamente pulidos, para una apariencia perfecta. Para no comprometer el rendimiento del producto solamente son utilizados materiales de alta tecnología: una resistencia superior a la corrosión y la ausencia de Níquel hace al Bracket Mini Sprint® la elección ideal para pacientes con alergia al Níquel***.

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.
PHD-Thesis. Dr. Talebnasab, University Bonn 2003. *Prof. Dr. H. F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999.

1


Estética



Los brackets Mini Sprint® son estéticamente más agradables que los de tamaño standard.

2


Fácil de usar

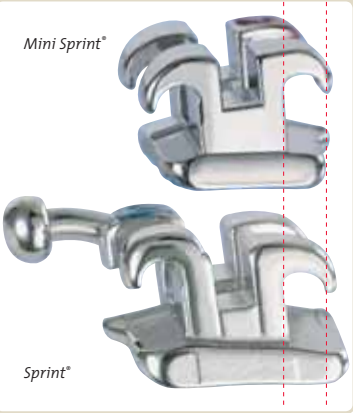

Los brackets Mini Sprint® presentan unas profundas aletas par aun fácil ligado.

3


Prácticos

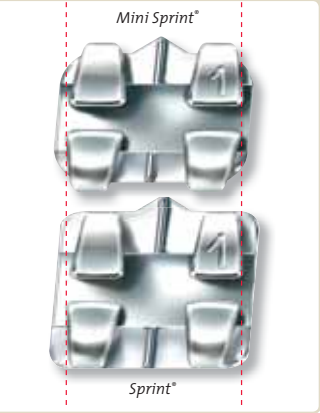

Los brackets Mini Sprint® presentan una dimensión mesio-distal ideal para un buen control de rotación.

4


Confiable

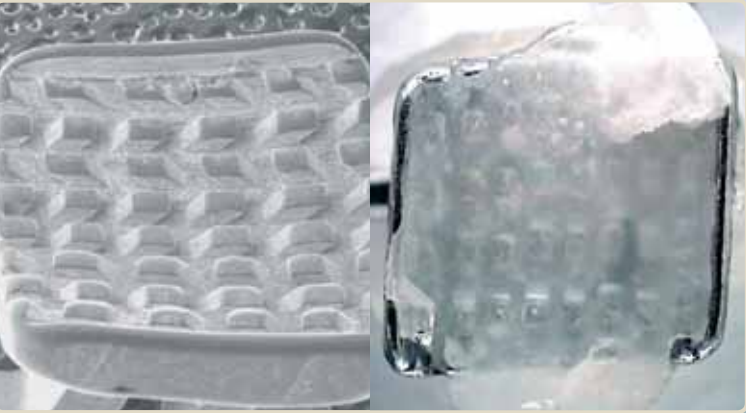

La única base patentada de 3D proporciona un 30% de incremento en la resistencia de cementado. Gran parte del adhesivo permanece en la base en el descementado.

5

Rapidez de tratamiento

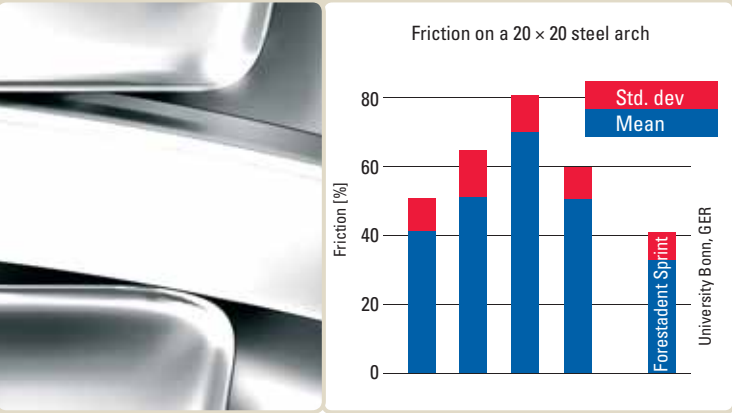

Ejes redondeados en la ranura y una superficie super suave reduce significativamente la fricción.

Mini Sprint® Brackets



Slot .018"		M A X I L A R									
		788-0513	788-0513	788-0313	788-0203	788-0103	787-0103	787-0203	787-0313	787-0513	787-0513
		788-0503	788-0503	788-0303	—	—	—	—	787-0303	787-0503	787-0503
Mini Sprint® 		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-7 °	-7 °	-2 °	+8 °	+12 °	+12 °	+8 °	-2 °	-7 °	-7 °
	Angulation	0 °	0 °	+11 °	+9 °	+5 °	+5 °	+9 °	+11 °	0 °	0 °
	In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
	Rotation	2 ° distal	2 ° distal	4 ° mesial	—	—	—	—	4 ° mesial	2 ° distal	2 ° distal
C€ 0297		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-22 °	-17 °	-10 °	0 °	0 °	0 °	0 °	-10 °	-17 °	-22 °
	Angulation	0 °	0 °	+7 °	0 °	0 °	0 °	0 °	+7 °	0 °	0 °
	In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
	Rotation	4 ° distal	4 ° distal	2 ° mesial	—	—	—	—	2 ° mesial	4 ° distal	4 ° distal
		788-1613	788-1513	788-1413	787-1203	787-1203	787-1203	787-1203	787-1413	787-1513	787-1613
		788-1603	788-1503	788-1403	—	—	—	—	787-1403	787-1503	787-1603
M A N D I B U L A R											
Casos		1	5	10	20	50					
Brackets		20	100	200	400	1000					
		706-1001	706-1002	706-1003	706-1004	706-1005					
		706-1006	706-1007	706-1008	706-1009	706-1010					
		706-1011	706-1012	706-1013	706-1014	706-1015					
		3-5									

Roth-System*

Slot .022"		M A X I L A R									
		788-0511	788-0511	788-0311	788-0201	788-0101	787-0101	787-0201	787-0311	787-0511	787-0511
		788-0501	788-0501	788-0301	—	—	—	—	787-0301	787-0501	787-0501
Mini Sprint® 		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-7 °	-7 °	-2 °	+8 °	+12 °	+12 °	+8 °	-2 °	-7 °	-7 °
	Angulation	0 °	0 °	+11 °	+9 °	+5 °	+5 °	+9 °	+11 °	0 °	0 °
	In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
	Rotation	2 ° distal	2 ° distal	4 ° mesial	—	—	—	—	4 ° mesial	2 ° distal	2 ° distal
C€ 0297		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	Torque	-22 °	-17 °	-10 °	0 °	0 °	0 °	0 °	-10 °	-17 °	-22 °
	Angulation	0 °	0 °	+7 °	0 °	0 °	0 °	0 °	+7 °	0 °	0 °
	In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
	Rotation	4 ° distal	4 ° distal	2 ° mesial	—	—	—	—	2 ° mesial	4 ° distal	4 ° distal
		788-1611	788-1511	788-1411	787-1201	787-1201	787-1201	787-1201	787-1411	787-1511	787-1611
		788-1601	788-1501	788-1401	—	—	—	—	787-1401	787-1501	787-1601
M A N D I B U L A R											
Casos		1	5	10	20	50					
Brackets		20	100	200	400	1000					
		706-1016	706-1017	706-1018	706-1019	706-1020					
		706-1021	706-1022	706-1023	706-1024	706-1025					
		706-1026	706-1027	706-1028	706-1029	706-1030					
		3-5									