

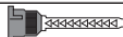
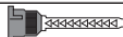
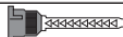
FICHA TÉCNICA

ADHESIVO/PRIMER REBASE BLANDO CARTUCHO																				
REFERENCIA	41524																			
FABRICANTE / RESPONSABLE	DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany																			
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.																			
DESCRIPCIÓN	Adhesivo para el Rebase Blando Proclinic Expert en cartuchos, de silicona A blanda y de curado frío, para mejorar la comodidad y falta de retención de las prótesis de forma rápida y sencilla en una sola sesión. Indicación -Adecuado para plásticos PMMA. -Elaboración de rebases de blandura permanente de forma directa en la consulta o de forma indirecta en el laboratorio. -Eliminación de puntos de presión en las zonas del maxilar superior e inferior. -Para aislar la línea de vibración palatina en caso de dificultades de adherencia y cresta blanda. -Como margen de cierre elástico en prótesis del maxilar superior y para asegurar la posición de prótesis mediante mayor adherencia. -Para cubrir de forma elástica procesos alveolares agudos. -Para cubrir zonas de implantes y como sobredentadura.																			
ESPECIFICACIÓN	<table><thead><tr><th>Datos técnicos DIN EN ISO 10139-2 tipo A, blando</th><th>Proclinic Expert soft relining material automix system</th></tr></thead><tbody><tr><td>Volumen de mezcla</td><td>Cartuchos de 50 ml</td></tr><tr><td>Color del producto base/catalizador</td><td>bermejo/blanco</td></tr><tr><td>Tiempo de mezcla</td><td>se suprime (sistema Automix)</td></tr><tr><td>Tiempo de procesamiento*</td><td>aprox. 1 min 30 s</td></tr><tr><td>Tiempo de fraguado*</td><td>aprox. 6 min 30 s</td></tr><tr><td>Tiempo en la boca</td><td>aprox. 5 min</td></tr><tr><td>Dureza final</td><td>aprox. 28 Shore A</td></tr><tr><td>Cánula de mezcla</td><td> Automix2, rosa</td></tr></tbody></table>		Datos técnicos DIN EN ISO 10139-2 tipo A, blando	Proclinic Expert soft relining material automix system	Volumen de mezcla	Cartuchos de 50 ml	Color del producto base/catalizador	bermejo/blanco	Tiempo de mezcla	se suprime (sistema Automix)	Tiempo de procesamiento*	aprox. 1 min 30 s	Tiempo de fraguado*	aprox. 6 min 30 s	Tiempo en la boca	aprox. 5 min	Dureza final	aprox. 28 Shore A	Cánula de mezcla	 Automix2, rosa
Datos técnicos DIN EN ISO 10139-2 tipo A, blando	Proclinic Expert soft relining material automix system																			
Volumen de mezcla	Cartuchos de 50 ml																			
Color del producto base/catalizador	bermejo/blanco																			
Tiempo de mezcla	se suprime (sistema Automix)																			
Tiempo de procesamiento*	aprox. 1 min 30 s																			
Tiempo de fraguado*	aprox. 6 min 30 s																			
Tiempo en la boca	aprox. 5 min																			
Dureza final	aprox. 28 Shore A																			
Cánula de mezcla	 Automix2, rosa																			
COMPOSICIÓN	Resina de silicona alquil en solución orgánica.																			
PRESENTACIÓN	Bote de 5 ml.																			

FICHA TÉCNICA

LIMPIEZA	Cepillar y enjuagar a fondo la prótesis rebasada con agua corriente varias veces al día usando un cepillo de dientes blando y jabón neutro; baño de limpieza: max. de 10 min.
FINALIDAD	Rebase definitivo directo de prótesis dentales.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Proteger de la luz solar, almacenar a temperaturas de 15 y 25 °C. 15 °C 59 °F 25 °C 77 °F 

TECHNICAL DATA SHEET

ADHESIVE/PRIMER FOR RELINING MATERIAL																				
REFERENCES	41524																			
MANUFACTURER	DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany																			
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.																			
DESCRIPTION	Proclinic Expert Soft Rebase Adhesive in cartridges, made of soft, cold-curing A-silicone, to improve the comfort and lack of retention of the prosthesis quickly and easily in a single session. INDICATION - Suitable for all PMMA-based plastic materials. - Production of permanently soft relinings directly at the chairside or indirectly in the laboratory. - Removal of pressure points in the mandibular and maxillary areas. - For post-damming the A line in case of adhesion problems and flabby ridges. - As an elastic margin on maxillary dentures and for securing the position of the dentures by increased adhesion. - For elastic covering of sharp-ridged alveolar processes. - For covering implant areas and as overdentures.																			
SPECIFICATION	<table><tr><th>Technical specifications DIN EN ISO 10139- 2 type A, soft</th><th>Proclinic Expert soft relining material automix system</th></tr><tr><td>Mixing volume</td><td>50-ml cartridges</td></tr><tr><td>Product color base/catalyst</td><td>red-brown / white</td></tr><tr><td>Mixing time</td><td>not applicable (Automix system)</td></tr><tr><td>Open time*</td><td>approx. 1 min 30 s</td></tr><tr><td>Curing time*</td><td>approx. 6 min 30 s</td></tr><tr><td>Retention time in the mouth</td><td>approx. 5 min</td></tr><tr><td>Final hardness</td><td>approx. 28 Shore A</td></tr><tr><td>Mixing cannula</td><td> Automix2, pink</td></tr></table>		Technical specifications DIN EN ISO 10139- 2 type A, soft	Proclinic Expert soft relining material automix system	Mixing volume	50-ml cartridges	Product color base/catalyst	red-brown / white	Mixing time	not applicable (Automix system)	Open time*	approx. 1 min 30 s	Curing time*	approx. 6 min 30 s	Retention time in the mouth	approx. 5 min	Final hardness	approx. 28 Shore A	Mixing cannula	 Automix2, pink
Technical specifications DIN EN ISO 10139- 2 type A, soft	Proclinic Expert soft relining material automix system																			
Mixing volume	50-ml cartridges																			
Product color base/catalyst	red-brown / white																			
Mixing time	not applicable (Automix system)																			
Open time*	approx. 1 min 30 s																			
Curing time*	approx. 6 min 30 s																			
Retention time in the mouth	approx. 5 min																			
Final hardness	approx. 28 Shore A																			
Mixing cannula	 Automix2, pink																			
COMPOSITION	Silicone alkyl resin in organic solution.																			

TECHNICAL DATA SHEET

PACKAGING	5 ml bottle.
CLEANING	Thoroughly brush and rinse the relined denture several times a day with a soft toothbrush and neutral soap under running water; cleaning bath: max. 10 minutes.
INTENDED USE	Definitive direct relining of dental prostheses.
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Protect from sunlight, store at temperatures between 15 and 25 °C. 15 °C 59 °F  25 °C 77 °F 