

NUEVO

# SR Vivodent® SPE

El diente singular para elevadas exigencias



*¡Simplemente  
Brillante!*



  
**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# SR Vivodent® S PE / SR Orthotyp® S PE

Inspirado por la naturaleza, protésicamente optimizado




La naturaleza crea las formas y los colores de los dientes más bellos y esto nos ha guiado para diseñar la nueva línea de dientes Vivodent® S PE. Estética y protésicamente optimizada, la nueva línea de dientes está diseñada para satisfacer los requisitos individuales de los pacientes actuales y futuros.



## Colores vibrantes

La nueva línea de dientes se presenta en 20 colores con matices vivos. Su característica intensidad, luminosidad y translucidez replican el color natural de los dientes, dando como resultado prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno.


La guía de colores multifuncional está diseñada para cumplir con varias tareas, según lo solicitado por el clínico. Permite que el operador determine no sólo el color, sino también el tamaño de los dientes y la línea de cierre de los labios. Esto se ha logrado gracias a la integración del de dos herramientas de medición integradas para medir la papila y otra para medir la distancia nasal, que nos ayudarán a determinar el tamaño del diente.

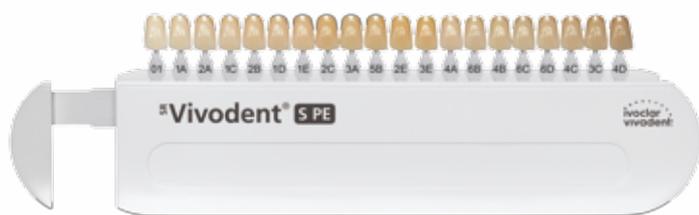

## DCL altamente reticulado

Los nuevos SR Vivodent S PE y SR Orthotyp S PE están fabricados enteramente de polímero DCL altamente reticulado (Doble reticulado). Este material consiste en una variante claramente modificada del polimetil metacrilato en la que tanto el polímero como la matriz están reticulados.


El resultado es un material que muestra una mayor resistencia a la compresión, pero con una flexibilidad similar al PMMA convencional. Por esta razón, se espera que la longevidad de la prótesis aumente. Otra ventaja del material DCL es la fuerte adhesión de los dientes al material de la base de la prótesis.

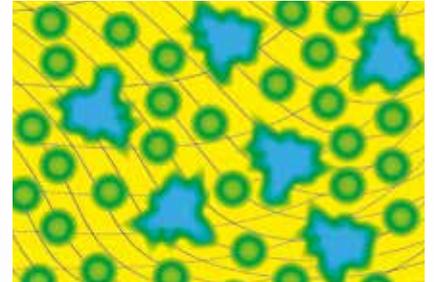


- Matriz PMMA reticulada
- Difusión capa
- Rellenos de polímero PMMA perlado
- Rellenos de prepolímeros altamente reticulados



Prótesis diseñadas por:  
Jean-Ives Ciers, Francia  
Y Davide Nadalini, Italia

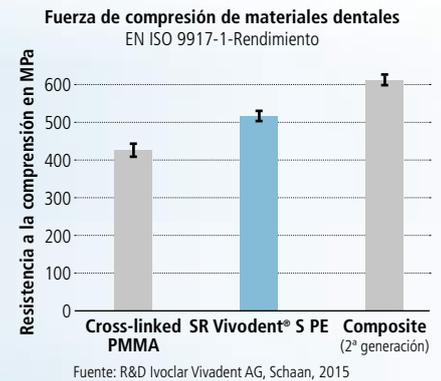

Métodos de fabricación CAD/CAM de vanguardia y nuestro amplio conocimiento en la fabricación de dientes ha contribuido a optimizar la estratificación de la estructura, la reproducción al detalle y una simetría equilibrada de esta línea de dientes.

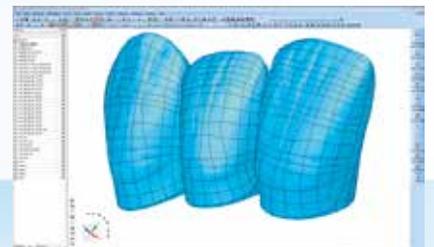

## CARACTERISTICAS DESTACADAS

Indicación	Prótesis parciales, completas e implantes
Estética	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
Resistencia al desgaste	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: gray;"></div>
Opciones Oclusales	<div style="width: 50%; height: 10px; background-color: gray;"></div>

# SR Vivodent® S PE

Diseñado por la naturaleza, probado y testado más de un millón de veces

La naturaleza es la mejor guía para el diseño de dientes. Este era ya el principio rector del Maestro Técnico Dental Eugen Schlaich, cuando creó la base de los moldes de dientes Vivodent hace más de cincuenta años.

Este principio aún sigue en pie. El Maestro Técnico Dental Rudolf Wohlgenannt, que ha prestado asesoramiento durante el desarrollo de los dientes, considera que los moldes de la nueva línea de dientes Vivodent S PE SR han ganado en belleza.

## Diseño excepcional

Cada una de las 15 formas superiores y 5 inferiores están específicamente diseñadas para adaptarse a las características de cada diente individual:

- Dimensiones naturales
- Curvaturas fisiológicas
- Características superficiales vivas
- Estratificación natural
- Cuellos dentales pronunciados

SR Vivodent S PE está diseñado para satisfacer los requisitos esenciales que las prótesis dentales modernas deberían cumplir:



Esmalte de cobertura total que da lugar a la creatividad en la configuración de dientes anteriores.



Cuello del diente ancho para que cubra los elementos estructurales



Cierres interdentes especialmente diseñados para lograr una mayor estética blanca





## Características únicas reproducidas constantemente

Las formas naturales de los dientes se pueden clasificar en tres formas básicas:



### Forma triangular

Este grupo de dientes está caracterizado por coronas estrechas con forma de embudo hacia la zona cervical. Estos moldes tienen una ligera curvatura cervical.

### Forma ovoide

Las características de curvatura de este grupo son más evidentes. La curvatura labial es especialmente pronunciada.

### Forma cuadrada

Este grupo está dominado por los incisivos centrales. Los dientes muestran una moderada curvatura labial vertical.

Estos moldes están además agrupados en tamaños S, M y L para asegurar una rápida y fácil selección del molde.

## Formatos de suministro de SR Vivodent® S PE

15 formas maxilares  
5 formas mandibulares



# SR Orthotyp® S PE

Completamente funcional

Las formas posteriores originales fueron diseñadas por el Dr. Rainer Strack en colaboración con el Maestro Técnico Dental Eugen Schlaich. Están basados en un análisis funcional detallado del sistema estomatológico.

Las formas posteriores SR Orthotyp S PE han sido desarrollados para ofrecer un aspecto más moderno y cumplir con las altas exigencias de las características estéticas de las formas actuales. El funcional diseño oclusal, sin embargo, ha permanecido inalterable.

## Esquema oclusal

En línea con el principio de la función de grupo, las formas Typ se configuran en una relación dental de uno-a-dos.



Progresión armónica de las longitudes de corona para crear una transición estéticamente suave desde las formas anteriores a las posteriores



Cuello ancho del diente para ocultar elementos estructurales estéticamente colocados



Estructura superficial diseñada de forma natural para que coincida con el aspecto estético de las formas anteriores



## Formatos de suministro de SR Orthotyp® S PE

4 formas maxilares  
4 formas mandibulares





## Más sistema – más eficiencia

Ivoclar Vivadent ofrece un protocolo clínico y técnico para prótesis removibles. Estas guías se basan en módulos consecutivos interrelacionados que ayudan a los técnicos dentales y odontólogos a colaborar eficazmente para lograr resultados exitosos mediante la adopción de un enfoque sistemático.



Innovadores materiales de alto rendimiento y aparatos facilitan el flujo del proceso. Están funcionalmente coordinados entre sí para aumentar la eficiencia en el laboratorio dental y en la clínica.

Estas líneas de dientes se guardan en la biblioteca del diente para la fabricación de prótesis dentales diseñadas digitalmente. Para más información, visite: [www.alldigitalaloptions.com](http://www.alldigitalaloptions.com)



## Prótesis Removibles

SR Vivodent® S PE forma parte de la categoría de productos denominada "Prótesis removable". Los productos de esta categoría cubren el procedimiento involucrado en la fabricación de prótesis removibles – desde la planificación del tratamiento y toma de impresión hasta el cuidado posterior. Estos productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un exitoso procesamiento y aplicación.



### ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORIA:

#### Stratos®

Articuladores probados y testados



Calidad y precisión convincentes

Simulación de los movimientos de la mandíbula para asegurar restauraciones de alta calidad tanto fijas como removibles.

#### Material base de prótesis

Fiable y fácil de usar



Impresionante variedad y precisión

- Pre dosificado o convencional, según el uso más conveniente
- Disponible para inyección, empaquetado y técnica de vertido
- Cumple con las diferentes necesidades en cuanto a resistencia

¿Le gustaría saber más sobre los productos de la categoría "Prótesis Removibles"? Simplemente póngase en contacto con su representante de ventas de Ivoclar Vivadent o visite nuestra web: [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent AG**  
 Bendererstr. 2  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 Tel. +423 235 35 35  
 Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent S.L.U**  
 Carretera de Fuencarral nº 24  
 Portal 1 – Planta Baja  
 28108-Alcobendas (Madrid), Spain  
 Telf. +34 91 375 78 20  
 Fax +34 91 375 78 38  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

Las descripciones y los datos no constituyen ninguna garantía de atributos.  
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan  
 es/2015-05-18

**ivoclar**  
**vivadent**  
 passion vision innovation