

CGF

Factores de crecimiento concentrados

ALGUNOS PRODUCTOS/APLICACIONES CLÍNICAS DEL MANEJO DEL PLASMA






1.- MATRIZ DE FIBRINA CON FACTORES DE CRECIMIENTO - CGF

2.- BIOMOLD PRESERVACION DE ALVEÓLOS CGF

APARATOS: Medifuge CGF

MATERIALES: 1 Tubo rojo 10 ml (Silfradent)


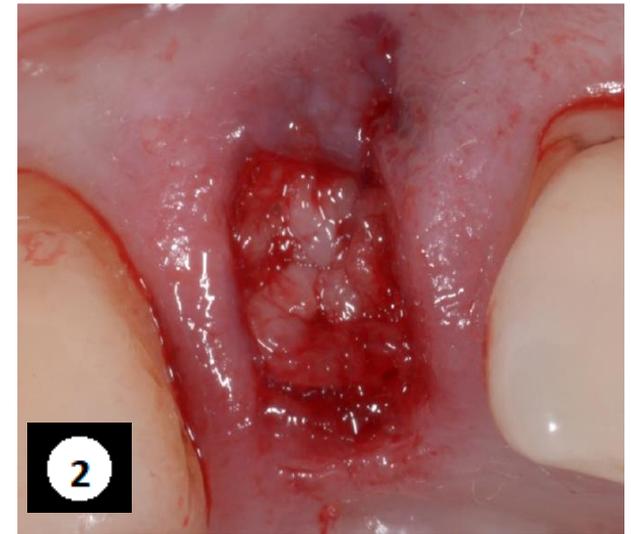
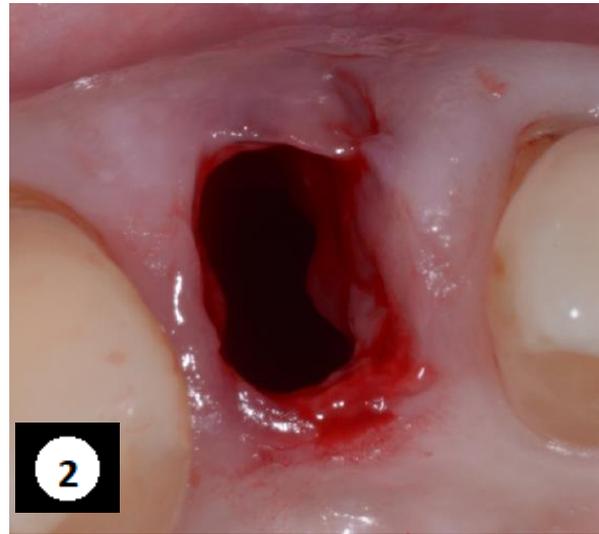
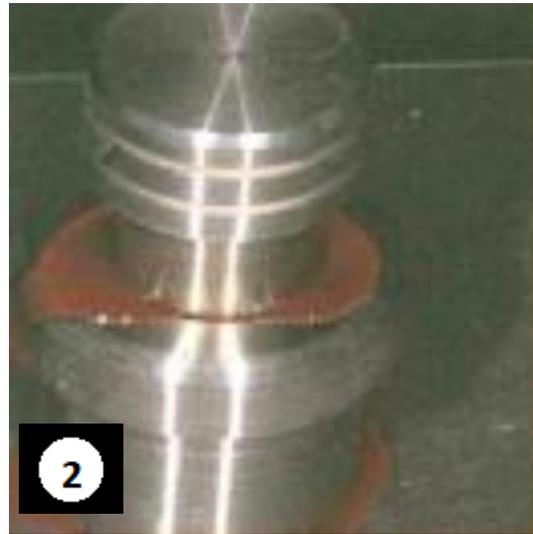


3.- MEMBRANAS BIOLÓGICAS CGF

4.- BIOPONCHO CGF

APARATOS: Medifuge CGF

MATERIALES: 1 Tubo rojo 10 ml (Silfradent)

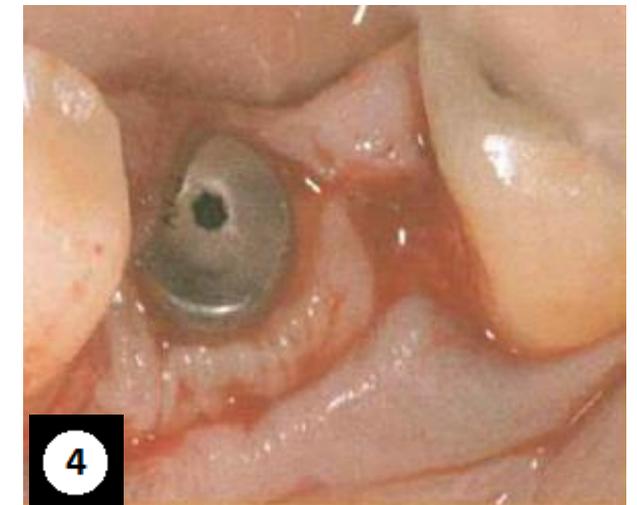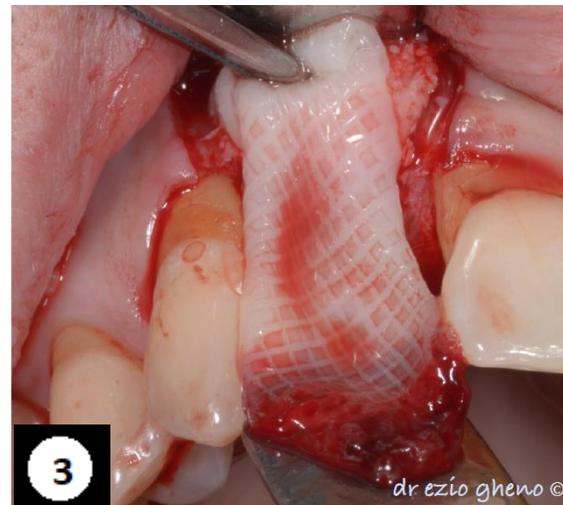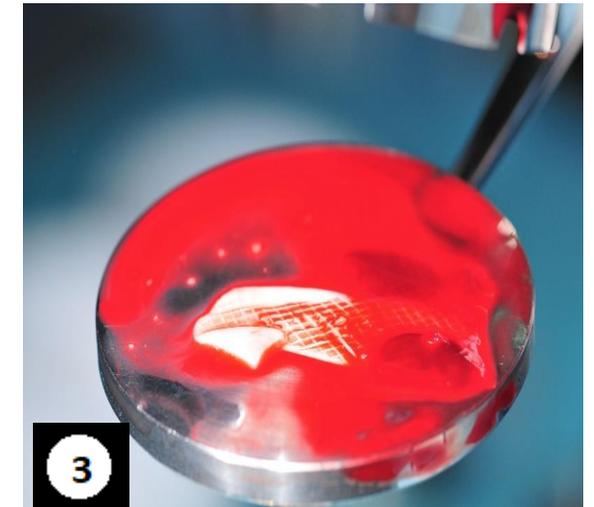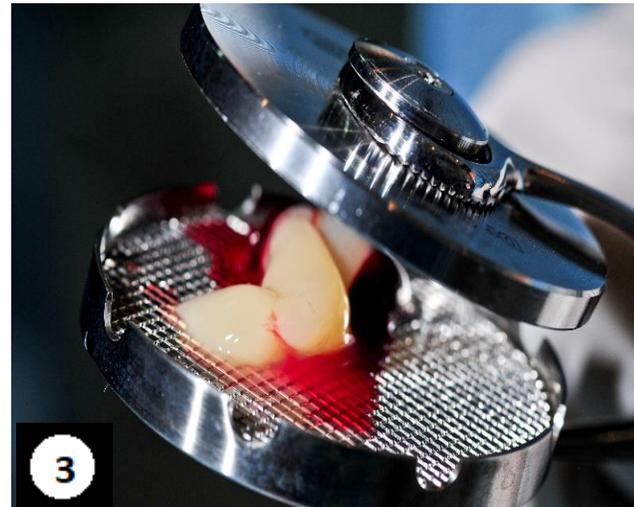



5.- BIOBONE (CGF)

APARATOS: Medifuge CGF y Round-up

MATERIALES: 1 Tubo rojo 10 ml (Silfradent) rojo y
1 Tubo blanco 9ml (Vacuette)

APLICACIONES

Se obtiene una membrana ósea estable y homogénea rica en factores de crecimiento para regeneración ósea


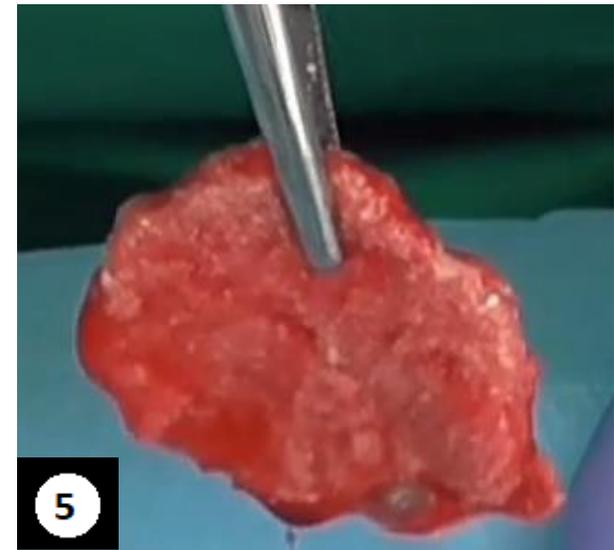
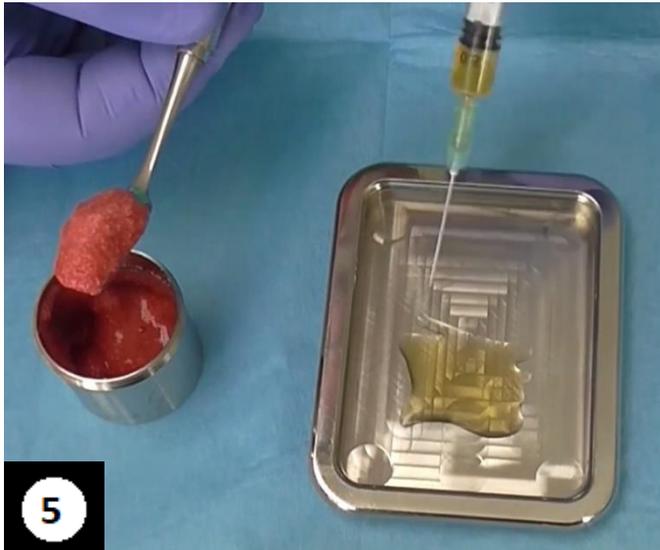


6.- STICKY BONE (CGF)

APARATOS: Medifuge CGF y Round-up

MATERIALES: 1 Tubo rojo 10 ml (Silfradent)
1 Tubo blanco 9ml (Vacuette)

APLICACIONES: Se obtiene una masa polimerizada estable con factores de crecimiento para regeneración ósea

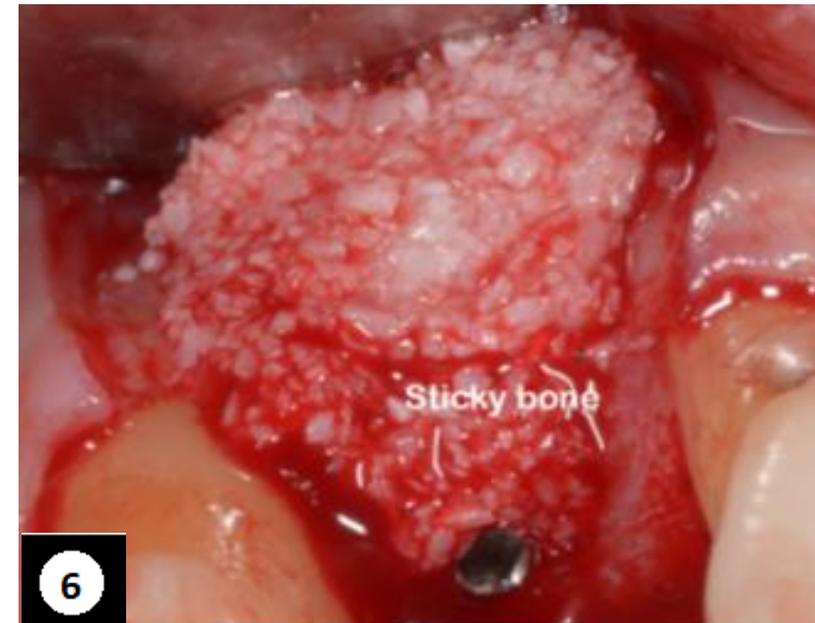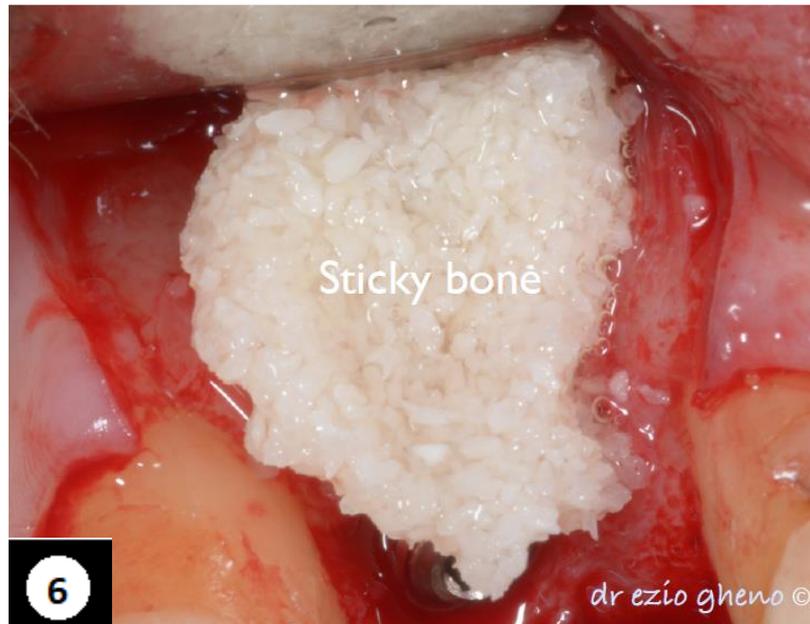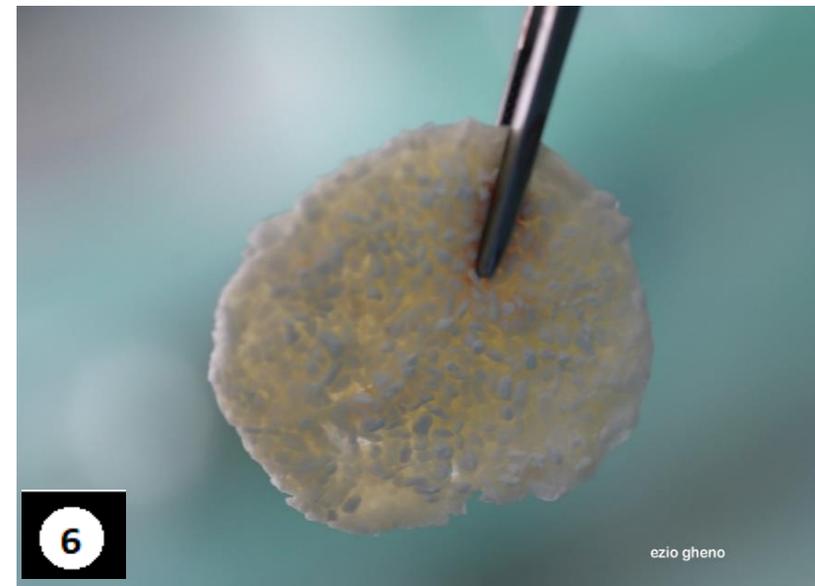


7.- COLAGENO & LPCGF

APARATOS: Medifuge CGF

MATERIALES: 1 Tubo blanco 9ml (Vacuette)

APLICACIONES



Características del colágeno mejorada con las propiedades de los factores de crecimiento CGF.

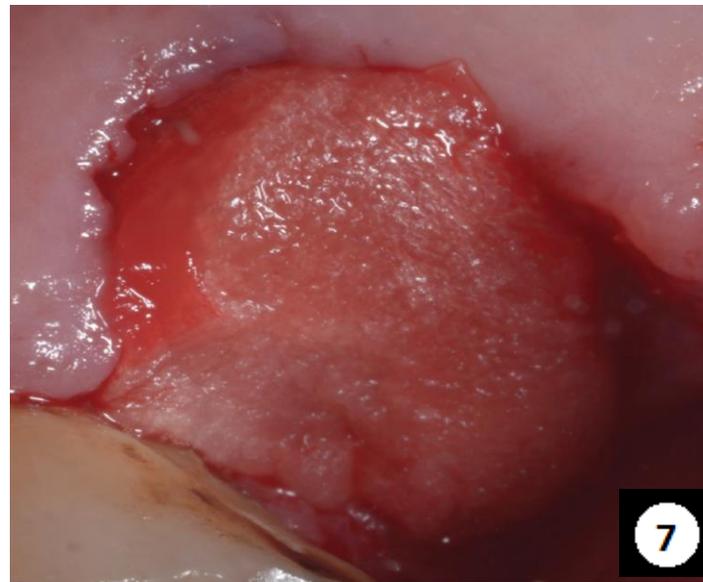

8.- BONE RING CGF- PERMEABILIZACIÓN DE BLOQUES DE HUESO

APARATOS: Medifuge CGF y Round-up

MATERIALES: 1 Tubo blanco 9ml (Vacuette)

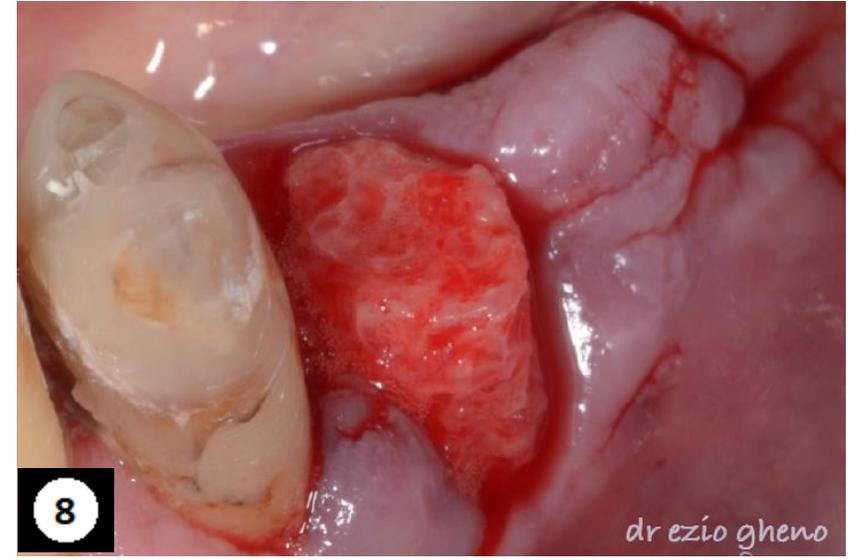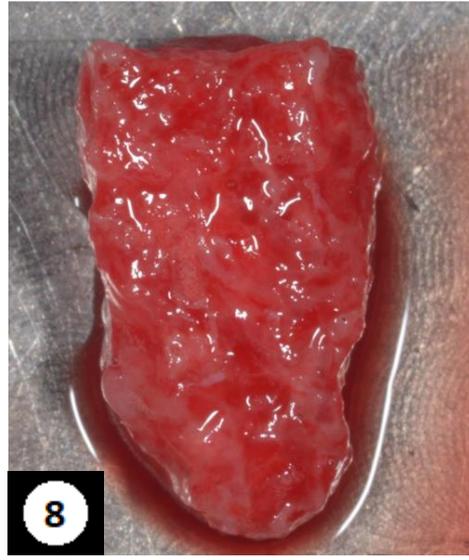


APLICACIONES: Técnica de aumento óseo con bloque de hueso.

9.- APAG GEL

APARATOS: Medifuge CGF

MATERIALES: 1 Tubo blanco 9ml (Vacuette) o
1 Tubo verde 9 ml (Vacuette)

Tratamiento: El gel obtenido sirve como relleno autólogo en pequeños gaps (p. ej. colocación inmediata de implantes en implantes post-extracción), para elevaciones de seno hidrodinámicas, bolsas periodontales...etc. Es un excelente ligante para particulados de hueso.

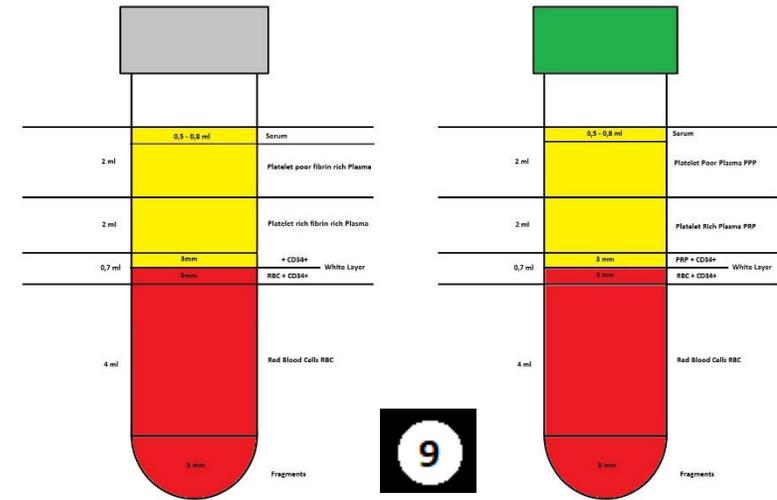

10.- BIOSTEM - tratamiento superficial de implantes con membrana bioactiva CGF

APARATOS: Medifuge CGF y Round-up

MATERIALES: Tubo blanco 9ml (Vacuette)

APLICACIONES

Superficie de implante homogeneizada con Factores de Crecimiento Concentrados-CGF



TRATAMIENTOS ESTETICOS



11.- APAG (LPCGF) ESTETICA (MESOTERAPIA Y FILLERS)

APARATOS: Medifuge CGF y APAG

MATERIALES: 2 Tubo verde 9ml (Vacuette)



Tratamiento: infiltraciones faciales, mesoterapia autóloga con LPCGF

Se utiliza una aguja 30G 4 mm. (inyectar con una angulación de 5-15°).

Tratamiento: el gel obtenido sirve como relleno autólogo en tratamientos estéticos (filler).

Se inyecta con una aguja 26G 12 mm.

Tratamiento: infiltraciones Mesoterapia autóloga. Utilizar aguja 30G 12 mm

12.- JUVENTUTE BEAUTY KIT (CREMAS AUTOLOGAS)

APARATOS: Medifuge CGF y Round-up

MATERIALES: 2 Tubo verde 9ml (Vacuette)

APLICACIONES:

Mascarilla JUVENTUTE*: Mezclar 10 grs. de mascarilla JUVENTUTE con 3 ml de PPP en el Round-up durante 14 segundos

Crema JUVENTUTE*: mezclar cada bote de 15 grs. de crema GREEN CRE con 0,5 ml de células madre CD34+ y 1 ml de PRP en el Round-up durante 14 segundos



Juventute Beauty Kit es un conjunto de Mascarilla, Crema y Loción.
Siga sus instrucciones de aplicación.

Equipment for Medical Line



SILFRADENT
via G. di Vittorio 35/37
47018 Santa Sofia (FC) - Italy

Tel. +39 0543 970684 www.silfradent.com
Fax +39 0543 970770 info@silfradent.com

Distribuidor para España

incotrading

Camino de Hormigueras,
119-121
Pol. Ind. de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) 91 380 74 90 incotrading@incotrading.net
F. (+34) 91 303 68 63