

Una **SONRISA** natural, fácil y linda

el sistema restaurativo lógico e innovador,
diseñado para ahorrar tiempo en cada sesión



Your Smile. Our Vision.



Cómo la composición dental determina el color del diente.


- Puesto que el color del diente está determinado por la dentina, no por el esmalte, el color de la dentina juega un papel importante al determinar el color general de los dientes.
- El esmalte es relativamente translúcido, pero requiere de una alta capacidad de pulido.

La dentina contiene el 95% del color¹ del diente

- Opacidad individual
- Saturación del tono
- Fluorescencia

El esmalte contiene el 5% del color¹ del diente

- Translucidez
- Tono bajo
- Opalescencia

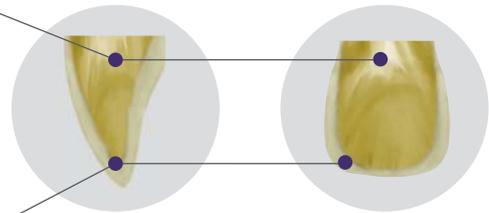

Aura – como una escala lineal proporciona un método fácil para la selección de color de los dientes.

Aura es el resultado de cinco años de colaboración con materiales y expertos en restauración dental internacionales.


- Casi toda la dentina tiene un “Tono” similar, y que se sitúa en el rango rojo-café-amarillo.
- Aura se enfoca donde los colores de los dientes varían, la “Intensidad”.
- La Intensidad consiste en como de fuerte o débil es un color (tono), lo cual se mide en % de saturación.


Esta formación científica y lineal ofrece previsibilidad y simplicidad en la personalización de tonos.

LA AMPLIA Y EQUIDISTANTE DISPOSICIÓN DE LA INTENSIDAD OFRECE PREVISIBILIDAD.



AURA POSEE UNA ESTRUCTURACIÓN ÚNICA DE OPACIDAD EXCLUSIVA

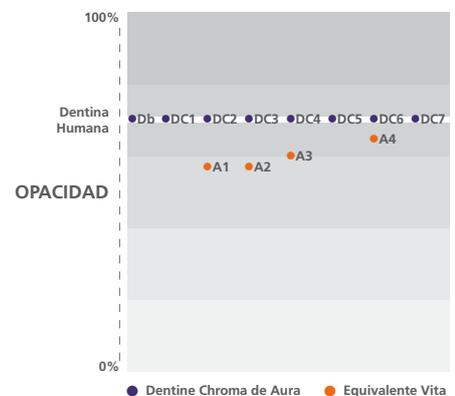

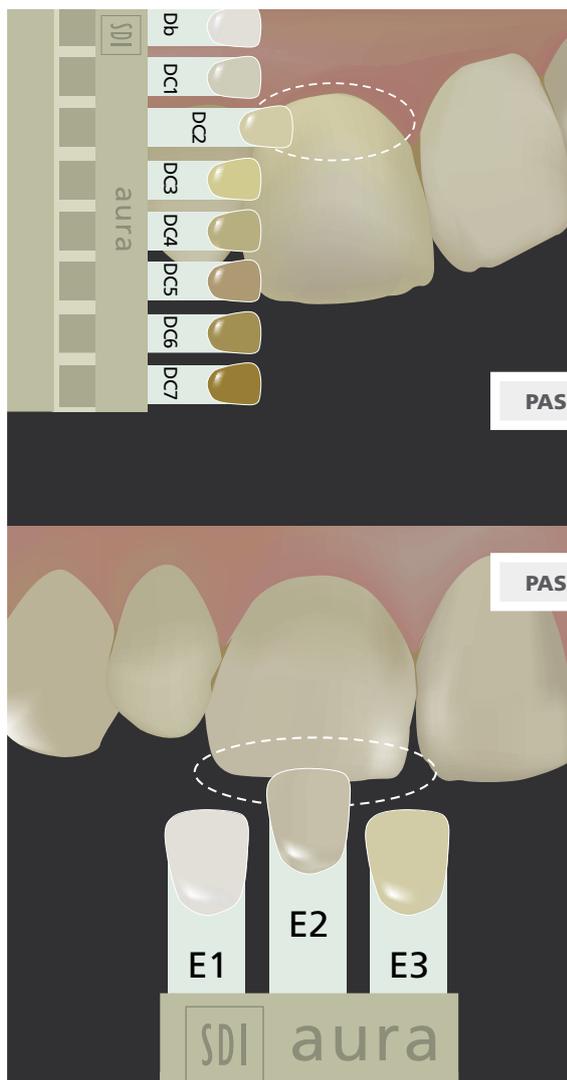

PASO 1

Aura – una manera fácil de identificar y adaptar el color de los dientes.

En vista de que el color general del diente está determinado por la dentina, no por el esmalte, la elección del color de dentina debe ser la primera prioridad.

► Seleccione **el tono de la dentina** cuando haya dentina expuesta o cuando el área cervical del diente sea más delgada.

PASO 2

► Seleccione **el tono del esmalte** a partir del borde incisal de los dientes cercanos al diente a ser restaurado.

Aura – un enfoque sencillo para lograr un acabado brillante.

El esmalte de Aura es tipo microrrelleno para facilitar un pulido con acabado brillante. Este acabado brillante se conserva de forma indefinida.

Seleccione el tono de esmalte mediante la observación del paciente:


- E1 Joven o dientes blanqueados
- E2 Dientes adultos
- E3 Dientes en pacientes de la tercera edad



Contracción volumétrica mínima para una estabilidad dimensional máxima.

- Aura combina una nueva composición de resina de baja contracción con un nuevo relleno de Ultra Alta Densidad (UAD).


CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA (%)²

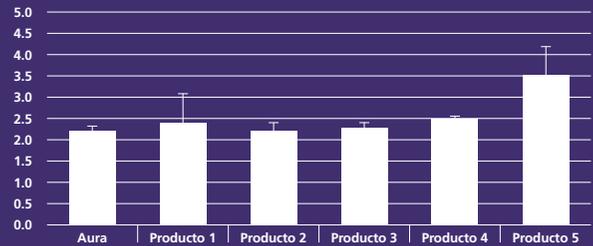

Alta resistencia a la flexión de Aura con resultados sobresalientes

- La resistencia a la flexión superior de Aura significa que es capaz de soportar fuerzas transmitidas en la boca.


RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPa)²

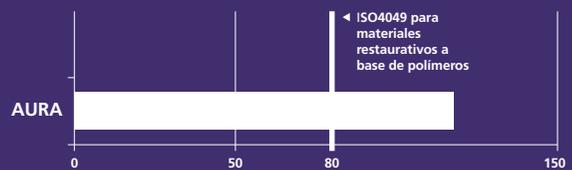

Impresionante resistencia de Aura a la compresión

- La morfología única del relleno de UAD proporciona una superficie de contacto de muy alta resistencia que puede soportar altas fuerzas de compresión.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)²

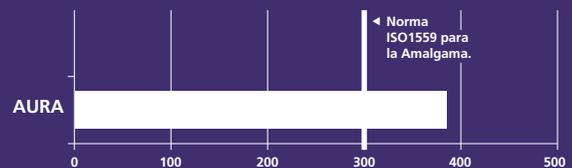

Bulk fill

- Para rápidas restauraciones en dientes posteriores donde la superposición del esmalte no sea necesaria.
- Diseñado para lograr una alta profundidad de curado y resistencia.

Uso diversificado

- También disponible en 4 tonos de intensidad multipropósito MC2, MC3, MC4 y MC5. Estos son ideales para los requisitos de relleno a gran escala y los de tipo estético sin estratificación.

aura 

Aura, una innovación Australiana.

- Basado en las particularidades de los dientes y los colores del esmalte y la dentina.
- Sencilla técnica de estratificación para reproducir los colores naturales de los dientes.
- Alta capacidad modelable y de pulido.
- Diseñado para simplificar la adaptación de colores por dentistas prácticos.



NÚMERO DE PIEZA	CANT	JERINGAS	NÚMERO DE PIEZA	CANT	COMPLETS
 8565100		Kit Introductorio Maestro de Aura - Jeringas	 8565101		Kit Introductorio Maestro de Aura - Complets
	8	Jeringa de 4g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7)		24	Complets de 0.25g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7)
	3	Jeringa de 3g (E1, E2, E3)		24	Complets de 0.2g (E1, E2, E3)
	1	Jeringa de 4g (Bulk Fill)		3	complet de 0.25g (bulk fill)
	2	GUÍA DE COLORES MAESTRO DE AURA		1	aplicador de complet
				2	GUÍA DE COLORES MAESTRO DE AURA
 8565102		Kit Iniciador de Aura en Jeringa - Claro	 8565103		Kit Iniciador de Aura en Complet - Claro
	3	Jeringa de 4g (DC1, DC2, DC4)		60	Complets de 0.25g (DC1, DC2, DC4)
	1	Jeringa de 3g (E2)		20	Complets de 0.2g (E2)
	1	GUÍA DE COLORES CLAROS DE AURA		1	GUÍA DE COLORES CLAROS DE AURA
 8565104		Kit Iniciador de Aura en Jeringa - Medio	 8565105		Kit Iniciador de Aura en Complet - Medio
	3	Jeringa de 4g (DC1, DC3, DC5)		60	Complets de 0.25g (DC1, DC3, DC5)
	1	Jeringa de 3g (E2)		20	Complets de 0.2g (E2)
	1	GUÍA DE COLORES MEDIOS DE AURA		1	GUÍA DE COLORES MEDIOS DE AURA
 8565106		Kit de Aura Multipropósito en Jeringa	 8565107		Kit Multipropósito de Aura en Complet
	4	Jeringa de 4g (MC2, MC3, MC4, MC5)		80	Complets de 0.25g (MC2, MC3, MC4, MC5)
	1	GUÍA DE COLORES AURA DE MULTI INTENSIDAD		1	GUÍA DE COLORES AURA DE MULTI INTENSIDAD
		Rellenos de Aura en Jeringa			Rellenos de Aura en Complet
 8560011	1	Db - 4g	 8565011	20	Db - 0.25g
8560004	1	DC1 - 4g	 8565004	20	DC1 - 0.25g
8560005	1	DC2 - 4g	 8565005	20	DC2 - 0.25g
8560006	1	DC3 - 4g	 8565006	20	DC3 - 0.25g
8560007	1	DC4 - 4g	 8565007	20	DC4 - 0.25g
8560008	1	DC5 - 4g	 8565008	20	DC5 - 0.25g
8560009	1	DC6 - 4g	 8565009	20	DC6 - 0.25g
8560010	1	DC7 - 4g	 8565010	20	DC7 - 0.25g
8560012	1	Bulk Fill - 4g	 8565012	20	Bulk Fill - 0.25g
8560001	1	E1 - 3g	 8565001	20	E1 - 0.2g
8560002	1	E2 - 3g	 8565002	20	E2 - 0.2g
8560003	1	E3 - 3g	 8565003	20	E3 - 0.2g
8560014	1	MC2 - 4g	 8565014	20	MC2 - 0.25g
8560015	1	MC3 - 4g	 8565015	20	MC3 - 0.25g
8560016	1	MC4 - 4g	 8565016	20	MC4 - 0.25g
8560017	1	MC5 - 4g	 8565017	20	MC5 - 0.25g



Your Smile. Our Vision.

Aura se fabrica con orgullo en Australia por SDI Limited Bayswater, Victoria 3153. 1 800 337 003
www.sdi.com.au. Austria 00800 022 55 734, Brasil 0800 770 1735, Francia 00800 022 55 734,
Alemania 0800 100 5759, Irlanda 01 886 9577, Italia 800 780625, Nueva Zelanda 0800 734 034,
España 00800 022 55 734, Reino Unido 00800 022 55 734, USA & Canadá 1 800 228 5166.

Referencias: 1. Chu S.J, Devigus A, Paravina R.D, Mielieszko A. J; Fundamentals of Color – Shade Matching and Communications in Esthetic Dentistry; p.89, 2nd Edn.
2. Data on file, SDI Limited 2014.



M100173

+D036M1001731-