

NEW BORA 2

# Iconic reliability



La turbina Bora ha seguido confirmando la calidad de su ingeniería y su alta fiabilidad, que la han hecho perdurar todos estos años.

Actualmente es la turbina más vendida de Bien-Air.

Gracias a la confianza depositada en ella, era importante para nosotros mantener vivo este legado.

# EN 1991

nace un icono

BORA 2


*A partir de ahora,  
el pasado habla por sí mismo  
y el futuro está garantizado.*

La fiabilidad y la vida  
útil de la turbina  
Bora son evidentes.



El nuevo diseño de la Bora 2 ofrece un rendimiento mejorado, al mismo tiempo que mantiene la legendaria fiabilidad que ha caracterizado a las versiones anteriores desde 1991.

SWISS  MADE

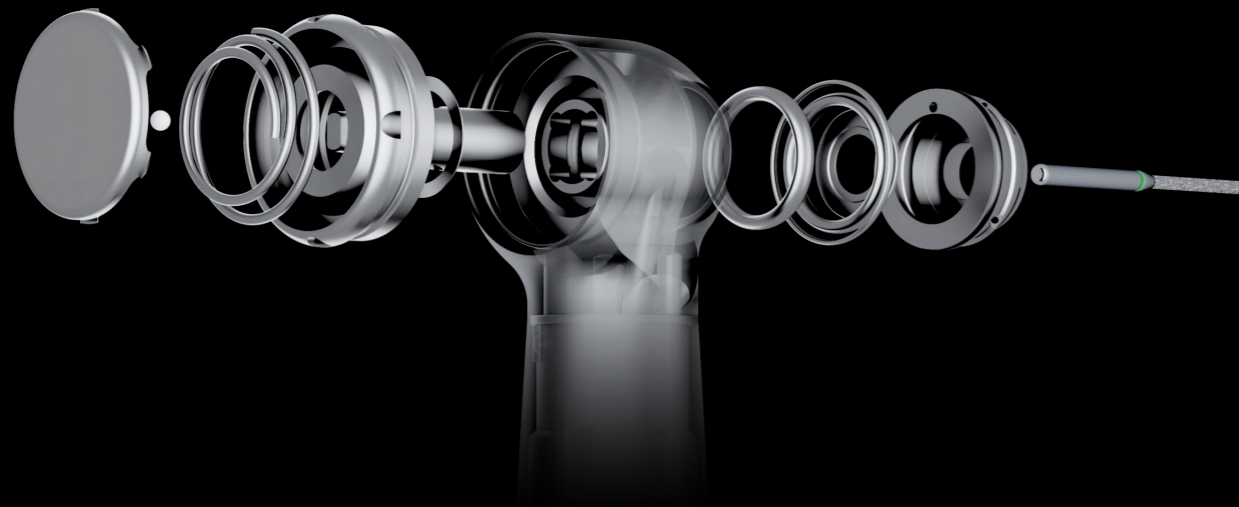

## FIABILIDAD EXTREMA Y RENDIMIENTO MEJORADO.

El nuevo diseño de la Bora 2 ofrece un rendimiento mejorado, al mismo tiempo que conserva la legendaria fiabilidad que ha caracterizado a las versiones anteriores desde 1991.



## MAYOR ROBUSTEZ.

La cabeza de la Bora 2 está realizada completamente en acero inoxidable. Esto aumenta su durabilidad, haciéndola más resistente a los impactos.



## MAYOR POTENCIA.


Con un aumento del **20%** tanto en potencia como en torque, la Bora 2 le permite realizar cortes **dos veces más rápido**. ¡Ahorre un precioso tiempo!




## NADA SE INTERPONDRÁ EN SU CAMINO.

Para garantizar una mejor irrigación de la zona de intervención, el sistema **Accu-Spray Quattro Mix™** concentra cuatro sprays de aire/agua asimétricos dirigidos hacia la punta de la fresa con precisión láser. En combinación con la iluminación LED, también garantiza una perfecta visibilidad de la cavidad bucal.

# NEW DESIGN.

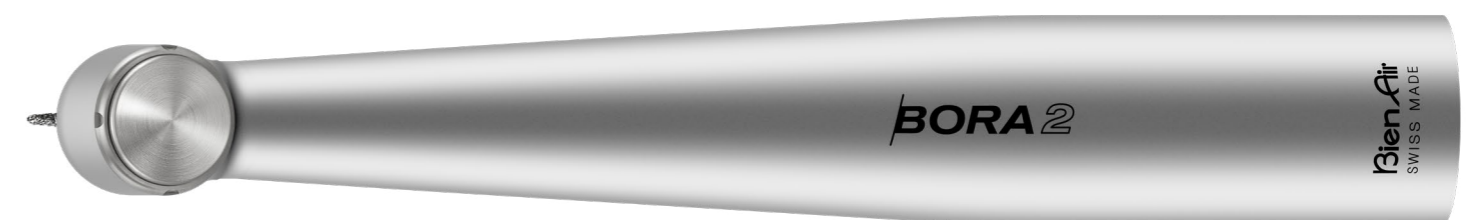

S W I S S  M A D E

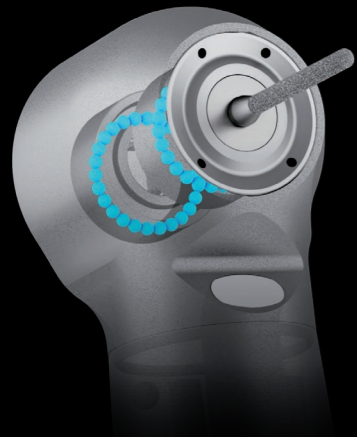

## MAYOR VIDA ÚTIL.

El diseño optimizado del rotor y los nuevos rodamientos de bolas cerámicas con mayor resistencia al desgaste garantizan una vida útil un **35 %** superior en comparación con la generación anterior.





## MAYOR PRECISIÓN.

El mecanismo de accionamiento y de fijación **Accu-Chuck PreciPlus** garantiza una sujeción eficaz de la fresa. Las vibraciones se reducen notablemente, lo que le confiere a la Bora 2 una estabilidad y confort sin igual en los trabajos odontológicos de mayor precisión.



## MAYOR SEGURIDAD.

La tecnología antirrecalentamiento patentada **Cool Touch**, integrada en el pulsador de la cabeza de la turbina, evita que se acumule el calor, disminuyendo el riesgo de quemaduras en sus pacientes.

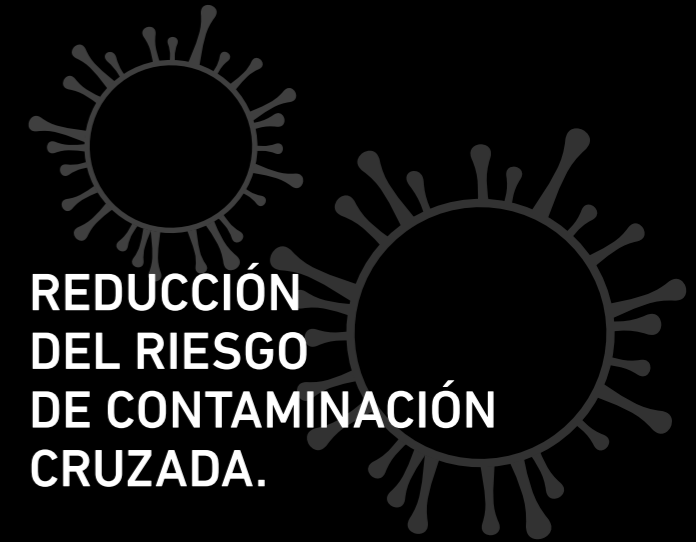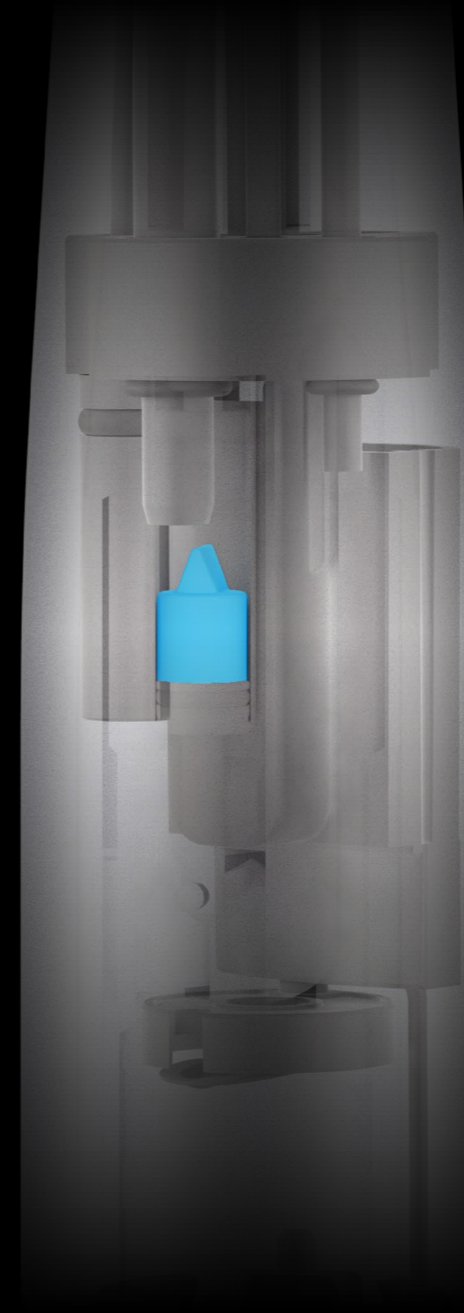

## REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.

Disminución de los riesgos de contaminación cruzada gracias a la **válvula antirretorno** y a la protección **Sealed Head**.

La válvula antirretorno reduce considerablemente el retorno de fluidos de la cavidad oral hacia los tubos del equipo. Además, el mecanismo de protección **Sealed Head** reduce el efecto de aspiración de fluidos en la cabeza del instrumento.

# ¡ MÁS PEQUEÑO MEJOR !



## CABEZA MÁS PEQUEÑA.

Gracias a la reducción de la cabeza de la Bora 2, con unas dimensiones de menos de **12 mm** de diámetro y tan solo **13 mm** de altura, su campo de visión aumenta. También se facilita el acceso a la parte posterior de la cavidad bucal, para un mayor confort.

## BORA 2 LED

20 watts

59 dBA

Dimensiones cabezal Ø 11.9mm 13.2mm

4 sprays asimétricos combinados

válvula antirretorno

Luz LED

2 años de garantía

Bora 2 LED 1601152-001



## BORA 2 LK

20 watts

59 dBA

Dimensiones cabezal Ø 11.9 mm 13.2 mm

4 sprays asimétricos combinados

válvula antirretorno

Luz LED

2 años de garantía

Bora 2 LK 1601153-001



**WWW.BIENAIR.COM**

S W I S S  M A D E

Leer más

