



Filtek™

Bulk Fill
Fluido

El composite fluido para obturación en bloque más fácil de inyectar.

El composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido está disponible en una nueva jeringa ergonómica, diseñada para mejorar la comodidad y facilitar la inyección. Esto le proporciona mayor control y visibilidad para una aplicación precisa en restauraciones profundas.

Reducción de burbujas y desperdicios

Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material durante la dispensación, lo que proporciona un mayor control.

Adiós a la incertidumbre

El vástago verde de la jeringa indica el volumen de material restante. Cuando la jeringa esté vacía, solo será visible el émbolo blanco.

Fácil de manejar e inyectar

La placa para los dedos y el émbolo triangulares le permiten personalizar su agarre con facilidad y rapidez.



Cánula flexible

Se flexiona fácilmente sin torcerse para facilitar el acceso.



Ventajas clave

- Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material
- La cánula se flexiona fácilmente para facilitar el acceso
- Diseño ergonómico que facilita el manejo y la inyección
- Aplicación inyectable en un solo paso en incrementos de hasta 4 mm
- Adaptación excelente y bajo estrés de contracción


Puede calentarse para la técnica de composite inyectado

Se puede calentar hasta 70 °C durante un periodo de hasta una hora, como máximo 25 veces.



Indicaciones

(Incrementos de hasta 4 mm)

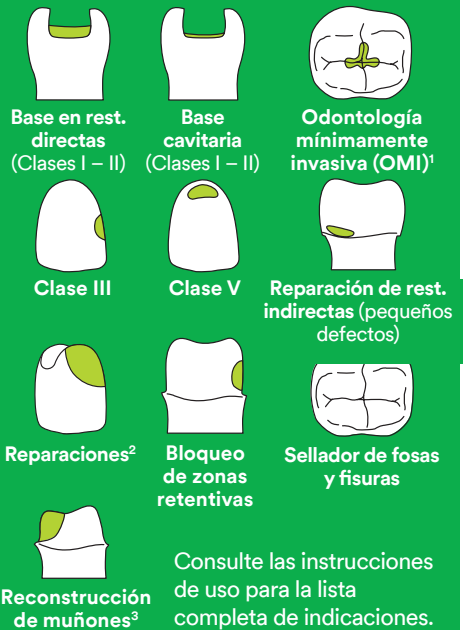

Restauraciones simplificadas en el sector posterior



Prepare el diente y aplique un adhesivo, p. ej., adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal.



Dispense hasta 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido en la cavidad preparada y polimerice, p. ej., con la lámpara de fotopolimerización LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.



Aplique una capa de 2mm de espesor (como mínimo) de un composite estético, por ejemplo 3M™ Filtek™ Universal Restorative, y polimerice.

Fotografías clínicas cortesía del Dr. Reich, Seefeld (Alemania)

Información para pedidos



Reposiciones de composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido

Las reposiciones incluyen: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas dispensadoras.

TONO	REF.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

REF.	INFORMACIÓN DE PRODUCTO
3740T	Puntas dispensadoras de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido, (20 unidades)



3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

1. Incluidas pequeñas restauraciones oclusales no sometidas a carga.
2. Restauraciones en provisionales confeccionados con resina acrílica o bisacrílica.
3. En casos en los que aún este presente por lo menos la mitad de la estructura coronal del diente para proporcionar apoyo estructural para la corona.

3M, Elipar, Filtek y Scotchbond son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizado bajo licencia en Canadá. Por favor, recicle. Impreso en España. © 3M 2020. Reservados todos los derechos. 70-2013-7232-6