


Brackets autoligados Proclinic Expert

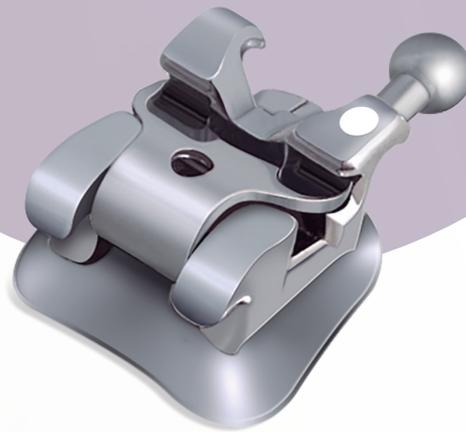

Comodidad y precisión en tus tratamientos

Los Brackets de autoligado metálicos Proclinic Expert ofrecen un tratamiento confortable para el paciente gracias a su diseño y a sus dimensiones reducidas.

Control interactivo

Su tapa interactiva permite una gestión clínica eficiente en todas las fases del tratamiento.



FASE PASIVA

Los arcos redondos iniciales no serán vinculados por la tapa, reduciendo la fricción y facilitando la fase de alineación y nivelación.



FASE INTERACTIVA

Los arcos rectangulares para cierre de espacios deforman elásticamente la tapa obteniendo un control biomecánico.



FASE ACTIVA

Los arcos rectangulares para el acabado rellenan completamente el slot, entrando en contacto activo con la tapa y permitiendo movimientos mínimos.

GANCHOS DE BOLA

Con forma perfectamente esférica y low profile para el máximo confort.

SLOT BISELADO EN LAS PAREDES MEDIO-DISTALES

Favorece el deslizamiento del arco en caso de fuertes desalineaciones, evitando el notching y el binding.

TAPA FABRICADA EN ALEACIÓN TOTALMENTE ELÁSTICA

Permite movimientos de apertura y cierre simples y seguros.

ALETAS PARA APLICACIÓN DE LIGADURAS

Permiten conseguir un control biomecánico absoluto.

TECNOLOGÍA MIM

Máxima precisión del slot, evitando retrasos en el tratamiento.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DISTO-GINGIVAL

Elimina los posibles errores de colocación.

FÁCIL APERTURA Y CIERRE

No requiere instrumentos específicos.



Dr. Orlando Oio

Colegiado 393 de la XI Región
Miembro Diplomado de la SEDO - N° 1495

"Los Brackets autoligados metálicos Proclenic Expert ofrecen una de las herramientas más cómodas y precisas para realizar sus tratamientos sin sacrificar el control del torque en las fases finales. Cuentan con una base anatómica 80 mesh, identificación con láser y coloraciones distogingivales. Además, son aplicables en todos los casos: tanto en niños adolescentes como en adultos."

CASOS

.022" x 0.30"

ROTH con ganchos en 3,4, 5

L8260

MBT con ganchos en 3,4, 5

L8261



Consulte las referencias de las reposiciones en www.proclenic.es