
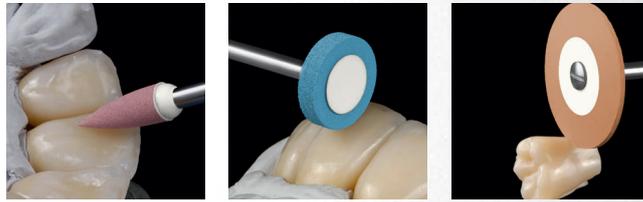




C F C A M
E E I C U
R L R R L
Á D C Í T
M E O L I
I S N I F
C P I C U
A Á O O N
T C
I I
C Ó
A N

PULIDORES

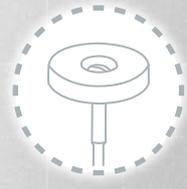

LOS MEJORES RESULTADOS AL ALCANCE DE TU MANO

Pulidores para todo tipo
de materiales protésicos

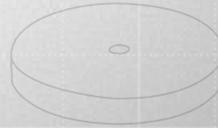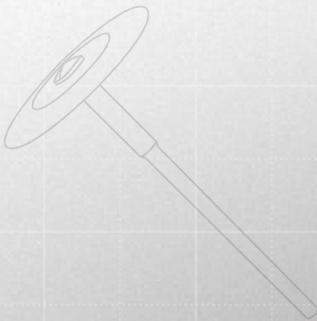

Pulidores de diamante



**ABRASIVO
DIAMANTADO**
para una máxima eficacia

Corrección de superficies
**SIN NECESIDAD
DE GLASEADO**

PROCESADO EN TRES PASOS

- 1 Alisado con el grano grueso
- 2 Pre-pulido con el grano medio
- 3 Pulido brillante con el grano fino

INDICACIONES

Pulidores de diamante de alto brillo para todo tipo de materiales cerámicos.



Velocidad de trabajo recomendada:

7.000-12.000 min⁻¹
max¹ 20.000 min⁻¹

■ Contenido: 1 unidad



Medidas (mm)	26 x 2			11 x 2			4 x 13		
Grano	■ Grueso	■ Medio	■ Fino	■ Grueso	■ Medio	■ Fino	■ Grueso	■ Medio	■ Fino
Ref.	H211132	H211133	H211134	H211135	H211136	H211137	H211138	H211139	H211140

Pulidores en dos pasos: repasado y pulido



**FÁCIL
ADAPTACIÓN**
a las superficies gracias
a su ligado con silicón

■ Medidas (mm): 22 x 3




Velocidad de trabajo recomendada:

7.000-15.000 min⁻¹
max¹ 25.000 min⁻¹



Contenido	10 unidades		100 unidades	
Grano	■ Grueso	■ Medio	■ Grueso	■ Medio
Ref.	H211128	H211130	H211129	H211131

Abrasivos para el repasado

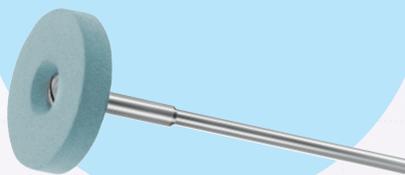

■ Contenido: 1 unidad

**MANTIENE
LA FORMA**
durante el uso




Velocidad de trabajo recomendada:

10.000-15.000 min⁻¹
max¹ 35.000 min⁻¹



Medidas (mm)	3,5 x 11	4,8 x 13	22 x 4,5	12 x 2
Ref.	H211120	H211121	H211122	H211123

Abrasivos para el repasado

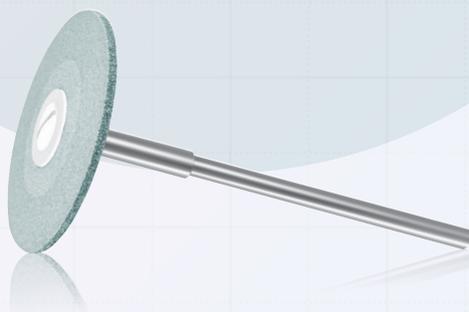

Reducción precisa
SIN RIESGO DE FRACTURAS

DESGASTE REDUCIDO
debido a la dureza del ligazón

MÁXIMA DURABILIDAD
y creación de calor reducida

INDICACIONES

Recomendados especialmente para reducir material en áreas críticas como márgenes de coronas o carillas.

Combinan desgaste eficaz con un muy buen pre-pulido de la superficie.



Velocidad de trabajo recomendada:

10.000-15.000 min⁻¹
max⁻¹ 20.000 min⁻¹

■ Contenido: 1 unidad



Medidas (mm)	26 x 2,5	22 x 3	17 x 3	4 x 10
Ref.	H211124	H211125	H211126	H211127

Pulidores diamantados



Especialmente indicado para
**CIRCONIO
MONOLÍTICO**

**ELIMINA EL
RE-GLASEADO**
después de las correcciones

**ALTA
CONCENTRACIÓN**
de diamante para
mayor eficacia

CONSEJO DE USO

Antes del pulido, se recomienda reparar con abrasivo diamantado.



Velocidad de trabajo recomendada:

7.000-12.000 min⁻¹
max⁻¹ 20.000 min⁻¹

■ Contenido: 1 unidad



Medidas (mm)	26 x 2		11 x 2		4 x 13	
Grano	■ Medio	■ Fino	■ Medio	■ Fino	■ Medio	■ Fino
Ref.	H211141	H211144	H211143	H211146	H211142	H211145

Pulidores con carburo de silicio



DIFERENTES FORMAS
para todo tipo de áreas de aplicación

PROCESADO EN TRES PASOS

1
Alisado con el grano grueso

2
Pre-pulido con el grano medio

3
Pulido brillante con el grano fino



Velocidad de trabajo recomendada:

5.000-7.000 min⁻¹
max¹ 15.000 min⁻¹

■ Contenido: 10 unidades



Medidas (mm)	10 x 20			10 x 24		
Grano	■ Grueso	■ Medio	■ Fino	■ Grueso	■ Medio	■ Fino
Ref.	H211147	H211148	H211149	H211150	H211151	H211152

Cepillos de pulido



Fibras para la aplicación
**SIN PASTA
DE PULIDO**

**REDUCCIÓN
DE CALOR**
gracias a su
estructura porosa

**ALTA
FLEXIBILIDAD**
para superficies contorneadas
y curvadas

INDICACIONES

- Acrílicos de prótesis
- Rebases blandos
- Composites
- Aleaciones no nobles
- Planchas de termoconformado

PULIDO EXCEPCIONAL

Del pre-pulido

al pulido final
de la superficie



Velocidad de trabajo recomendada:

5.000-7.000 min⁻¹
max⁻¹ 10.000 min⁻¹

■ Contenido 25 unidades
+ 1 mandril

■ Medidas (mm): 25 x 11



Grano	Fino	Grueso
Ref.	H20705	H20706

Gama completa de pulidores de laboratorio Proclinic Expert.

CERÁMICA

Pulidores de diamante



Medidas (mm)	26 x 2			11 x 2			4 x 13		
Grano	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Ref.	H211132	H211133	H211134	H211135	H211136	H211137	H211138	H211139	H211140

Pulidores en dos pasos: repasado y pulido



Contenido	10 unidades		100 unidades	
Grano	Grueso	Medio	Grueso	Medio
Ref.	H211128	H211130	H211129	H211131

Abrasivos para el repasado



Medidas (mm)	3,5 x 11	4,8 x 13	22 x 4,5	12 x 2
Ref.	H211120	H211121	H211122	H211123

CIRCONIO

Pulidores diamantados



Medidas (mm)	26 x 2		11 x 2		4 x 13	
Grano	Medio	Fino	Medio	Fino	Medio	Fino
Ref.	H211141	H211144	H211143	H211146	H211142	H211145

Abrasivos para el repasado



Medidas (mm)	26 x 2,5	22 x 3	17 x 3	4 x 10
Ref.	H211124	H211125	H211126	H211127

ACRÍLICOS

Pulidores con carburo de silicio



Medidas (mm)	10 x 20			10 x 24		
Grano	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Ref.	H211147	H211148	H211149	H211150	H211151	H211152

MULTIFUNCIÓN

Cepillos de pulido



Grano	Fino	Grueso
Ref.	H20705	H20706

www.proclinic.es

900 800 880