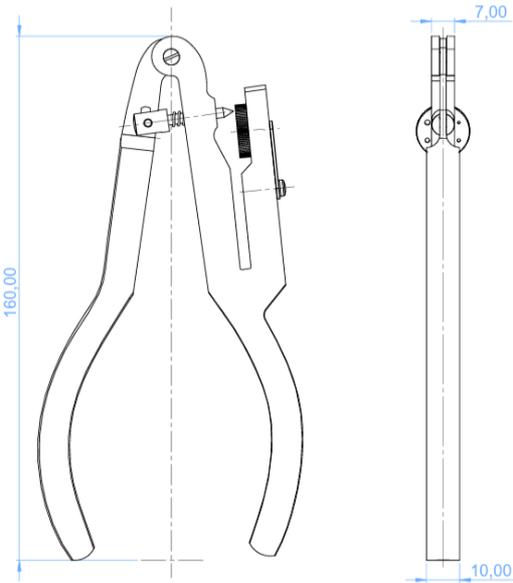


FICHA TÉCNICA

PERFORADOR DIQUES PROCLINIC		
REFERENCIAS	59927	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL S.p.A. Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO (LUCCA) - ITALIA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Instrumento de perforación manual tipo "Ivory" diseñado para perforar diques de goma utilizados en procedimientos dentales. No estéril, reutilizable. Esterilizable en autoclave (177 °C) y sin alteraciones con los desinfectantes químicos.	
ESPECIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Referencia fabricante: 3033 • Longitud: 16,2 cm • Anchura: 10 mm • Grosor: 7 mm • Estéril: No (requiere esterilización antes de uso) • Monouso: No (reutilizable) • Dureza entre 40-44hrc <div style="text-align: center;">  </div>	

COMPOSICIÓN	Acero inoxidable conforme a EN ISO 7153-1 (instrumentos quirúrgicos – acero inoxidable).
PRESENTACIÓN	1 unidad
VIDA ÚTIL	No aplica (N.A.). Las propiedades, función o uso no se ven afectadas automáticamente si se almacena y utiliza correctamente.
FINALIDAD	Utilizado en clínicas dentales para la perforación de diques de goma en procedimientos de aislamiento dental, exclusivamente por personal cualificado.
INSTRUCCIONES DE USO	Esterilizar (177 °C) el instrumento antes del primer uso y tras cada utilización. Inspeccionar visualmente antes de cada uso. Si presenta indicios de óxido o daño, no debe utilizarse.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad. Mantener alejado de la luz solar directa.