

# VITA SMART.FIRE

El aparato de cocción eficiente para restauraciones CAD/CAM



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 06.19

VITA – perfect match.

**VITA**

## Descripción del producto

VITA SMART.FIRE es un aparato de cocción CAD/CAM, que permite realizar cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillajes y de corrección de todos los materiales habituales. La selección del material y el inicio del programa tienen lugar en un solo paso. Sus programas preinstalados

están específica y perfectamente adaptados a cada material, a fin de facilitar el proceso de cocción. Gracias a su diseño compacto, el aparato de cocción puede instalarse CAD/CAM con toda comodidad y ocupando muy poco espacio.

## SISTEMA VITA SMART.FIRE: RESUMEN DE TODAS LAS SOLUCIONES



**Juego de  
accesorios  
integrado**

**Aparato de cocción CAD/CAM**

**Unidad de mando**

### ¿Qué?

- VITA SMART.FIRE es un aparato de cocción especialmente desarrollado para CAD/CAM realizar cocciones de cristalización, de glaseado, de maillajes y de corrección de todos los materiales habituales para restauraciones CAD/CAM.

### ¿Para qué?

- El aparato de cocción se controla mediante una unidad de mando táctil. Sus programas preinstalados están específica y perfectamente adaptados a cada material, a fin de facilitar el proceso de cocción.

### ¿Con qué?

- El SISTEMA VITA SMART.FIRE incluye el aparato de cocción, la unidad de mando y un juego de accesorios integrado.

## TOUCH & FIRE!

*Seleccione un programa preinstalado e inicie directamente el proceso de cocción: ¡listo!*



**1. Manejo intuitivo**

**2. Comodidad de uso**

**3. Funcionamiento fiable**

# TOUCH & FIRE

### **Intuitivo**

- Manejo intuitivo gracias a la selección del material y al inicio del programa en un solo paso
- Menús claramente estructurados con símbolos de programa autoexplicativos

### **Cómodo**

- Programas preinstalados para todos los materiales habituales CAD/CAM
- Comodidad de uso gracias al diseño sumamente compacto

### **Fiable**

- Funcionamiento fiable gracias a la larga vida útil de la tecnología de cocción
- Carcasa resistente con superficies selladas

## LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE:

El aparato de cocción



Para todas las cocciones y los materiales de uso habitual

### Aparato de cocción VITA SMART.FIRE

#### ¿Qué?

- Aparato de cocción compacto y cómodo
- Tecnología de cocción longeva y robusta para garantizar un funcionamiento fiable
- Carcasa resistente con superficies selladas para facilitar la limpieza
- Cajón de servicio integrado para tener siempre a mano los accesorios, como p. ej., soportes de cocción
- Calibración de la temperatura totalmente automática para garantizar resultados fiables

#### ¿Para qué?

- Para cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillaje y de corrección

## LOS COMPONENTES DE **VITA SMART.FIRE**:

La unidad de mando



Glaseado

Maquillajes

Corrección

### Unidad de mando **VITA SMART.FIRE**

#### ¿Qué?


- Unidad de mando con programas preinstalados para todos los materiales habituales para confeccionar restauraciones CAD/CAM
- Manejo perfecto y calidad de imagen óptima gracias a la pantalla táctil de alta resolución de 10 pulgadas
- Concepto de manejo intuitivo que permite la selección del material y el inicio del programa en un solo paso
- Menú claramente estructurado con símbolos autoexplicativos para la selección rápida del programa
- Función de asistencia basada en software que proporciona una guía paso a paso por el proceso de cocción

#### ¿Para qué?

- Permite un proceso de cocción sencillo e intuitivo

## LOS COMPONENTES DE **VITA SMART.FIRE**:

Los accesorios

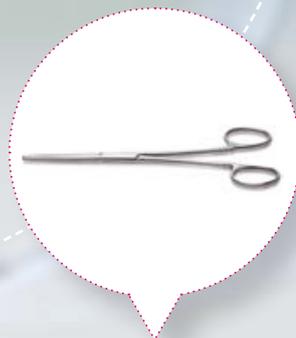

### Accesorios **VITA SMART.FIRE**


#### ¿Qué?

- Juego de accesorios integrado en el aparato de cocción para facilitar el proceso de cocción
- Componentes: soporte de cocción, soporte de cocción de guata refractaria, pernos de platino, pinza para piezas de cocción y mesa de enfriamiento

#### ¿Para qué?

- De este modo, tiene siempre a mano todo lo importante directamente junto al aparato de cocción


## VISIÓN DE CONJUNTO DE LOS PRODUCTOS Y DEL SISTEMA

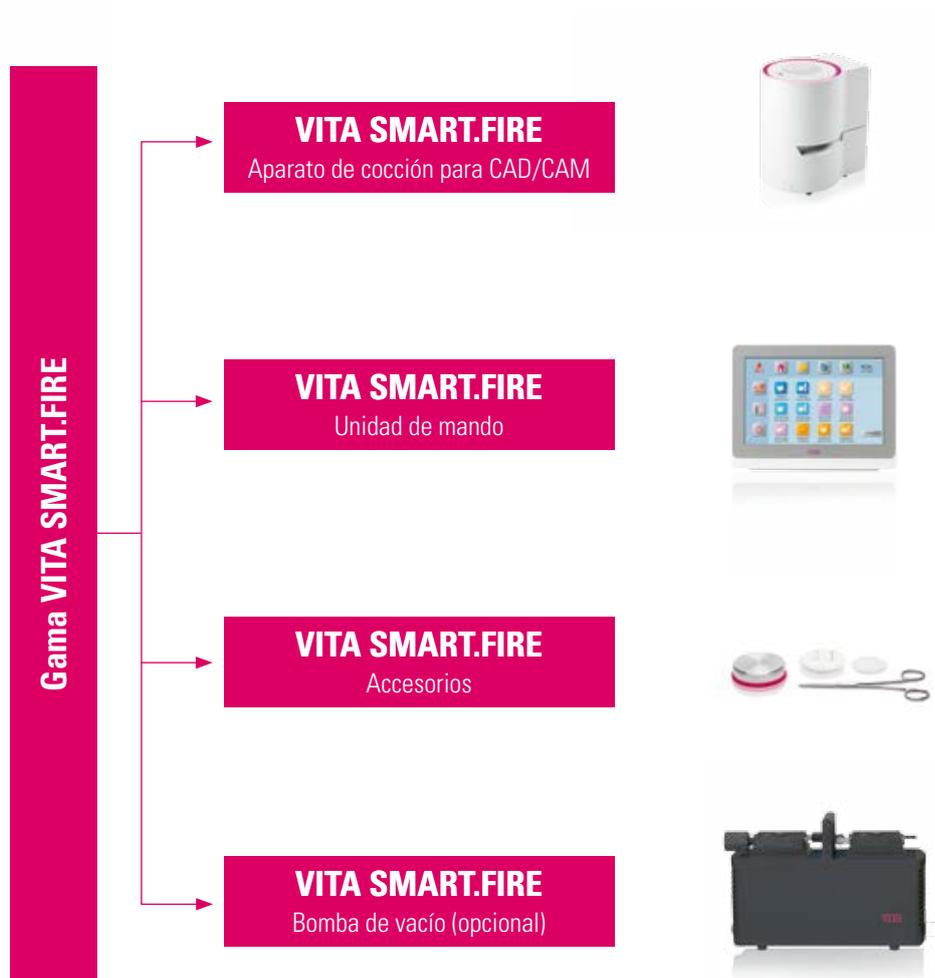

### VITA SMART.FIRE

| Denominación                    | Dimensiones   | Datos técnicos  | Volumen de suministro  | Ref.  |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| Aparato de cocción para CAD/CAM | <b>Carcasa</b><br>ø 230 mm<br>P: 300 mm<br>Al: 340 mm<br><b>Cámara de cocción</b><br>ø 80 mm<br>Al: 43 mm | <b>Conexión eléctrica:</b><br>230 voltios CA, 50 Hz o bien<br>100/110 voltios CA, 50/60 Hz<br><b>Consumo de potencia:</b><br>950 W<br><b>Temperatura de la cámara de cocción:</b> 1050 °C | 1 aparato de cocción<br>1 juego de accesorios<br>1 Manual de instrucciones   | <b>DSF220</b><br>(versión de 230 V)<br><br><b>DSF100</b><br>(versión de 100 V)<br><br><b>DSF110</b><br>(versión de 110 V) |
| Unidad de mando                 | An: 260 mm<br>P: 150 mm<br>Al: 200 mm   | Pantalla táctil TFT<br>10 pulgadas, 1280 x 800<br>Interfaces USB/SD   | 1 cable de conexión  |   |
| Accesorios                      | –   | –   | 2 pernos de platino<br>1 soporte de cocción de guata refractaria<br>1 soporte de cocción<br>1 pinza para piezas de cocción<br>1 mesa de enfriamiento |   |
| Bomba de vacío (opcional)       | –   | –   | 1 bomba de vacío<br>1 tubo de vacío  | <b>DVPU220</b>  |

Encontrará más información acerca de VITA SMART.FIRE  
en nuestra web: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

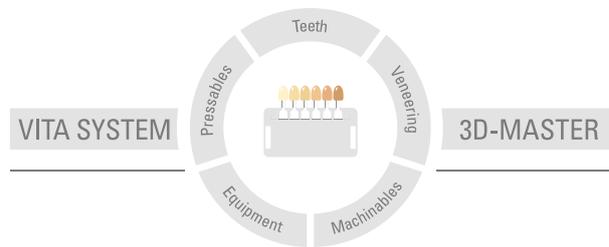

**Nota importante:** nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 06.19

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE** lleva el marcado CE conforme a las Directivas CE 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2011/65/CE.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)