

**Renfert**

making work easy



MT premium

**NOVEDAD** Recortadora en húmedo

## NOVEDAD MT premium

Recortadora en húmedo con luz de trabajo y sistema Aqua Stop

Recortado en húmedo con calidad superior: las sofisticadas peculiaridades perfeccionan el uso diario y hacen de MT premium una recortadora extraordinaria.

### Ventajas

- Recorte en húmedo eficaz y preciso de modelos dentales de yeso.
- Trabajo sin fatiga gracias a la iluminación que lleva integrada.
- Reducción de costes y conservación de recursos gracias al sistema Aqua Stop.
- Rápida modificación del ángulo de la mesa de la recortadora gracias a un práctico mecanismo basculante (90°/98°).

### Detalles

- Limpieza rápida y sencilla gracias a la retirada sin herramientas de la mesa de la recortadora, de la puerta y del tubo de rociado.
- Trabajo limpio y fluido gracias a una estanqueidad óptima.

### Otros detalles

- Motor con potencia superior a la media para una excelente remoción de la superficie incluso con yesos duros.
- Guiado fácil de los modelos de yeso con ayuda de líneas de ángulo ranuradas en la mesa de la recortadora.
- Visión óptima hacia el modelo gracias a una inclinación del aparato de 10°.
- Un tubo de rociado óptimamente posicionado evita el atascamiento del disco de la recortadora mediante pulverización uniforme.



tool included



easy use



perfect view



Iluminación óptima de la zona de trabajo

### Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V   100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	1300 W (230 V)   1325 W (120 V)
Potencia del motor (P1)	1300 W
Potencia del motor (P2)	900 W
Número de revoluciones	2880–3400 rpm
Consumo de agua máx.	7 l/min
Presión de agua mín. / máx.	1–5 bar
Ø (Tubos de conexión para el tubo de desagüe)	36 mm
Ø (Disco recortador)	234 mm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	305 x 330 x 410 mm
Peso (sin disco)	~13,2 kg

### Referencias

MT premium incl. disco de recorte Klettfix, 220-240 V	No. 18070000
MT premium incl. disco de recorte Marathon, 220-240 V	No. 18070500
MT premium incl. disco de recorte Klettfix, 100-120 V	No. 18071000
MT premium incl. disco de recorte Marathon, 100-120 V	No. 18071500

## NOVEDAD ORTHO guide

### Juego complementario de ortodoncia para MT premium o MT3

ORTHO guide hace de MT premium y MT3 unas recortadoras especiales para las necesidades de la ortodoncia.

#### Ventajas

- Recorte rápido y preciso, que tiene en cuenta todos los planos oclusales, de modelos de ortodoncia con plantilla intuitiva y mesa de recortadora especial.
- Mayor precisión y alineación óptima de la línea media del rafe gracias a la luz direccional (solo en MT premium).
- Rectificado preciso del plano de tubérculo del modelo maxilar superior.
- Producción de modelos maxilares, orientados con precisión tridimensional, considerando todos los planos oclusales.

#### Detalles

- Gracias al concepto de guiado especial, la plantilla no se instala fija en la unidad, por lo que puede retirarse fácilmente sin herramientas.
- Limpieza sencilla, rápida y sin herramientas de todos los componentes.
- Instrucciones paso a paso con modelos maxilares de mandíbula superior e inferior (indicados también para documentar el proceso).

#### Otros detalles

- El montaje posterior no requiere personal especializado y puede ser realizado sin dificultad por el propio usuario.



easy use



Recorte preciso, considerando todos los planos oclusales, con plantilla intuitiva

#### Características técnicas

Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	25 x 42 x 115 mm
Peso	~40 g
Láser clase	1

#### Referencias

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100

## Más recortadoras

### MT3

Recortadora en húmedo

incl. disco de recorte Klettfix, 220-240 V  
No. 18080000

incl. disco de recorte Marathon, 220-240 V  
No. 18080500

incl. disco de recorte Klettfix, 100-120 V  
No. 18081000

incl. disco de recorte Marathon, 100-120 V  
No. 18081500



### MT plus

Recortadora en húmedo y en seco

incl. disco de recorte Klettfix, 220-230 V  
No. 18030000

incl. disco de recorte Marathon, 220-230 V  
No. 18030500



## Discos de recorte

### Klettfix MT plus

Disco de recorte en carburo de silicio y 2 granos



5 x Klettfix MT plus, (3 x grano 80, 2 x grano 120) + disco de soporte  
No. 18031000

### Klettfix MT3/MT premium

Disco de recorte en carburo de silicio y 2 granos



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x grano 80, 2 x grano 120) + disco de soporte  
No. 18031001

### Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquete de reposición grano 80



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18031100

### Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquete de reposición grano 120



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18031200

### Marathon MT plus


Disco de recorte parcialmente diamantado



Marathon MT plus  
No. 18032000

### Marathon MT3/MT premium

Disco de recorte parcialmente diamantado

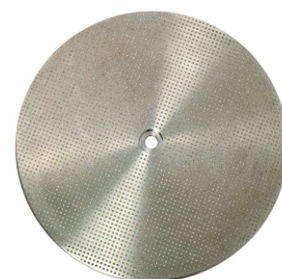

Marathon MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18032001

### Infinity MT plus

Disco de recorte totalmente diamantado



Infinity MT plus  
No. 18033000

### Infinity MT3/MT premium

Disco de recorte totalmente diamantado



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18033001