
YOTUEL® PATIENT

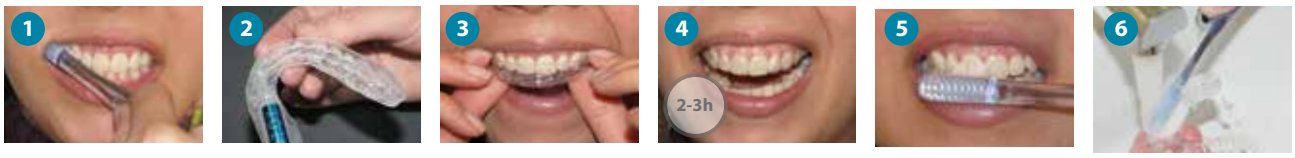

ENGLISH INSTRUCTIONS

1. Brush your teeth with YOTUEL whitening toothpaste for three minutes.
2. Place a fine layer of YOTUEL whitening gel in the mouthguard.
3. Fix the mouthguard comfortably onto the teeth and wipe away any excess gel with a tissue. For the first few minutes you may notice a slight increase of saliva.
4. Keep the mouthguard on for at least 1 hour a day. For quicker results you may keep the mouthguard on for 2-3 hours or as recommended by your dentist.
5. After the whitening session brush your teeth again with YOTUEL whitening toothpaste.
6. After every session wash and dry the mouthguard.

For whiter teeth and faster results, ask your dentist for the in office whitening techniques with any of the YOTUEL dental office options.

YOTUEL WHITENING PROGRAMME

YOTUEL is a complete and advanced whitening programme for those who want to achieve perfect oral care.
YOTUEL WHITENING TOOTHPASTE With the lowest abrasion ratio worldwide (36 RDA) and a high concentration of Xylitol to fight tooth decay. It is non-foaming and detergent free.
YOTUEL WHITENING MOUTHWASH To regenerate soft tissues and enamel. Alcohol free for your total safety.

WARNINGS

Not for use by pregnant women or children.
It is not advisable to use after dental restorations.
It is not advisable to use when there are previous lesions on dental tissues.

ESPAÑOL INSTRUCCIONES

1. Cepíllese los dientes con el dentífrico blanqueador YOTUEL durante tres minutos.
2. Extienda una fina capa del gel blanqueador YOTUEL en la férula.
3. Colóquese la férula en los dientes eliminando el exceso de gel remanente con un tisú. Durante los primeros minutos puede notar un incremento de saliva.
4. Mantenga la férula puesta al menos una hora. Para obtener un resultado más rápido puede dejarla durante 2-3 horas o como le recomiende su dentista.
5. Después de la sesión de blanqueamiento cepíllese de nuevo con el dentífrico blanqueador YOTUEL.
6. Lave y seque la férula al finalizar la sesión.

Para obtener dientes más blancos y resultados más rápidos, pregunte a su dentista por las técnicas de blanqueamiento en clínica YOTUEL.

PROGRAMA DE BLANQUEAMIENTO YOTUEL

El programa de blanqueamiento **YOTUEL** permite obtener un cuidado oral completo.
DENTÍFRICO BLANQUEADOR YOTUEL Con una alta concentración de Xilitol para combatir la caries. No contiene detergente por lo que no produce espuma.
COLUTORIO BLANQUEADOR YOTUEL Ayuda a la regeneración de los tejidos. No contiene alcohol.

ADVERTENCIAS

No aplicar a mujeres embarazadas ni a niños.
No se recomienda su uso después de restauraciones dentales.
No se recomienda cuando existan lesiones previas en los tejidos dentales.

FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

1. Se brosser les dents avec le dentifrice blanchisseur YOTUEL pendant trois minutes.
2. Mettre une fine couche de gel blanchisseur YOTUEL dans la gouttière.
3. Ajuster confortablement la gouttière aux dents et retirer l'excédent de gel à l'aide d'un mouchoir. Durant les premières minutes, vous noterez une légère augmentation du flux salivaire.
4. Garder la gouttière au moins une heure par jour. Pour des résultats plus rapides vous pouvez garder la gouttière 2 à 3 heures ou selon les recommandations de votre dentiste.
5. Après la session de blanchiment, se brosser les dents avec le dentifrice blanchisseur YOTUEL.
6. Après chaque session laver et sécher la gouttière.

Pour des dents plus blanches et des résultats plus rapides, demander à votre dentiste les techniques de blanchiment YOTUEL.

LES PRODUITS DE BLANCHIMENT YOTUEL

YOTUEL est un programme complet d'hygiène buccale pour tous ceux qui désirent un sourire resplandissant.
DENTIFRICE DE BLANCHIMENT YOTUEL Avec le coefficient d'abrasion le plus faible au monde (36 RDA) et une concentration élevée de xylitol, assurant la protection contre la carie. Ne mousse pas et ne contient pas de tensides.
BAIN DE BOUCHE DE BLANCHIMENT YOTUEL Sans alcool. Avec effet antiseptique.

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Traitement non approprié pour les femmes enceintes et les enfants.
Il n'est pas recommandé de faire un tel traitement après avoir subit de récentes interventions chez votre chirurgien-dentaire.
Ce traitement est déconseillé si le patient souffre de lésions particulières des tissus dentaires.

DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Putzen Sie sich für drei Minuten die Zähne mit YOTUEL Zahnweiss-Zahnpasta.
2. Füllen Sie eine dünne Schicht des YOTUEL Gels in Ihre Mundschiene.
3. Streifen Sie die Mundschiene über die Zähne und wischen überschüssiges Gel am Zahnfleisch mit einem Papiertaschentuch ab. In den ersten Minuten kann sich ein leicht gesteigerter Speichelfluss bemerkbar machen.
4. Wenden Sie die Mundschiene mit YOTUEL Gel ungefähr 1 Stunde täglich an. Um eine schnellere Aufhellung zu erreichen, können Sie die Schiene auch 2-3 Stunden am Tag tragen oder wie durch Ihren Zahnarzt empfohlen.
5. Nach Beendigung der Tragedauer putzen Sie sich bitte Ihre Zähne nochmals mit YOTUEL Zahnweiss -Zahnpasta.
6. Spülen Sie die Mundschiene abschliessend mit Wasser aus und trocknen sie.

Um ein noch schnelleres Ergebnis zu erhalten fragen Sie bitte Ihren Zahnarzt nach dem YOTUEL Special Kit.

YOTUEL WEISSMACHER-PROGRAMM

YOTUEL ist ein vollständiges Mundhygieneprogramm für alle, die ein perfektes Lächeln haben wollen.
YOTUEL WEISSMACHER-ZAHNCREME Mit dem weltweit niedrigsten Abrasivitätswert (36 RDA) und einer hohen Xylitolkonzentration, um Karies zu bekämpfen. Sie bildet keinen Schaum und enthält keine Tenside.
YOTUEL WEISSMACHER MUNDSPÜLUNG Schützt das Weichgewebe im Mundraum und den Zahnschmelz. Ohne Alkohol.

WARNHINWEIS

Nicht geeignet zur Anwendung bei Schwangeren und Kindern.
Eine Verwendung nach Zahnrekonstruktionen ist nicht zu empfehlen.
Eine Verwendung bei bereits vorhandener oder früherer Erkrankung des Zahnfleisches ist nicht zu empfehlen.

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES

1. Escove os dentes com o dentífrico branqueador YOTUEL durante três minutos.
2. Espalhe uma fina camada do gel branqueador YOTUEL na goteira.
3. Coloque-se a goteira nos dentes, eliminando o excesso de gel remanescente com um toalhete. Durante os primeiros minutos, pode notar um aumento de saliva.
4. Mantenha a goteira colocada durante pelo menos uma hora. Para obter um resultado mais rápido pode deixá-la durante 2-3 horas ou como lhe for recomendado pelo seu dentista.
5. Depois da sessão de branqueamento escove novamente com o dentífrico branqueador YOTUEL.
6. Lave e seque a goteira no fim da sessão.

Para obter dentes mais brancos e resultados mais rápidos, pergunte ao seu dentista pelas técnicas de branqueamento na clínica YOTUEL.


PROGRAMA DE BRANQUEAMENTO YOTUEL

O programa de branqueamento YOTUEL permite que consiga um cuidado oral completo.
DENTÍFRICO BRANQUEADOR YOTUEL Com uma alta concentração de Xilitol para combater a cárie. Não contém detergente, pelo que não produz espuma.
COLUTÓRIO BRANQUEADOR YOTUEL Ajuda na regeneração dos tecidos. Não contém álcool.

ADVERTÊNCIAS

Não aplicar em mulheres grávidas nem em crianças.
Não é recomendável que seja usado depois de restaurações dentárias.
Não é recomendável quando existirem lesões prévias nos tecidos dentários.

YOTUEL® PATIENT

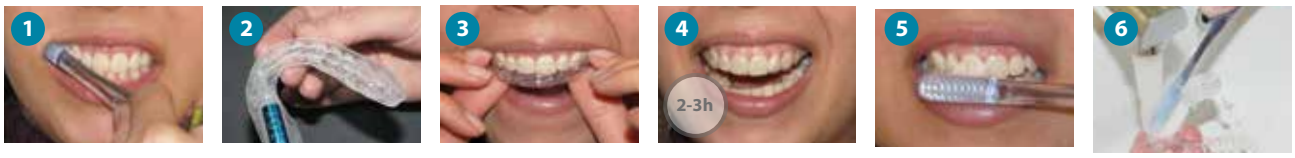

TÜRKÇE KULLANIM TALİMATLARI

1. YOTUEL beyazlatıcı diş macunuyla dişlerinizi 3 dakika boyunca fırçalayınız.
2. Ağız plağına ince bir tabaka YOTUEL beyazlatma jeli koyunuz.
3. Ağız plağını dişlerin üzerine rahat olacak şekilde yerleştiriniz ve fazla jeli bir bezle uzaklaştırınız. İlk birkaç dakikada hafif bir tükürük artışı farkedebilirsiniz.
4. Ağız plağını günde en az 1 saat takınız. Daha çabuk sonuç almak için ağız plağını 2-3 saat ya da diş hekiminizin önerdiği süre kadar takabilirsiniz.
5. Beyazlatma seansından sonra YOTUEL beyazlatıcı diş macunuyla dişlerinizi tekrar fırçalayınız.
6. Her kullanımdan sonra ağız plağını yıkayınız ve kurutunuz.

Daha beyaz dişler ve daha hızlı sonuçlar için diş hekiminize, YOTUEL dental ofis seçenekleriyle ofiste beyazlatma teknikleri hakkında sorunuz.

YOTUEL BEYAZLATMA PROGRAMI

YOTUEL mükemmel ağız bakımına ulaşmak isteyenler için komple ve gelişmiş bir beyazlatma programıdır.

YOTUEL BEYAZLATICI DİŞ MACUNU Dünyadaki en düşük abrazyon oranı (36 RDA) ve diş çürüğüyle mücadele etmek için yüksek oranda Xylitol. Köpürmez ve deterjan içermez.

YOTUEL BEYAZLATICI DİŞ GARGARASI Yumuşak dokuları ve mineyi yeniler. Güvenliğiniz için alkol içermez.

UYARILAR

Hamile kadınlarda ve çocuklarda uygulanmamalıdır.
Diw tedavilerinden sonra uygulanmamasñ tavsiye edilir.
Diwlerde mevcut hasar söz konusu olduxunda kullanñlmamasñ tavsiye edilir.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βουρτσίζετε τα δόντια σας με τη λευκαντική οδοντόκρεμα YOTUEL επί 3 λεπτά.
2. Βάζετε λεπτό στρώμα λεύκαντικό ζελέ YOTUEL στο νάρθηκα.
3. Φοράτε το νάρθηκα άνετα στο στόμα και σκουπίζετε με χαρτομάντηλο τυχόν περίσσεια υλικού. Τα πρώτα λεπτά μπορεί να δείτε ελαφρά αύξηση του σίελου.
4. Κρατάτε το νάρθηκα στο στόμα τουλάχιστον 1 ώρα ημερησίως. Για γρήγορα αποτελέσματα κρατάτε το νάρθηκα 2-3 ώρες τη μέρα στο στόμα.
5. Μετά τη λεύκανση βουρτσίζετε τα δόντια σας ξανά με λευκαντική οδοντόπαστα YOTUEL.
6. Μετά από κάθε συνεδρία πλένετε και στεγνώνετε το νάρθηκα.

Για πιο λευκά δόντια και γρηγορότερα αποτελέσματα συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας για τις τεχνικές λεύκανσης στο ιατρείο με κάποια από τις σχετικές συσκευασίες YOTUEL.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ YOTUEL

Το **YOTUEL** είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοματικής υγιεινής για όσους επιθυμούν τέλεια στοματική φροντίδα.

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ YOTUEL Παρουσιάζει το χαμηλότερο διεθνώς ρυθμό αποτριβής ξυλιτόλης για την καταπολέμηση της τερηδόνας. Δεν αφρίζει και δεν περιέχει απορρυπαντικά.

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΟΠΛΥΜΑ YOTUEL Για την ανάπλαση των μαλακών ιστών και της αδαμαντίνης. Δεν περιέχει οινόπνευμα για την απόλυτη ασφάλεια σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μçí εφαρμόξεται σε εγκύουζ και σε παιδιά.
λεν συνιστάται η χρήση του μετά από οδοντικέζ αποκαταστάσεις.
λεν συνιστάται όταν υπάρχουν τραύματα στους οδοντικούς ιστούς.

FINNISH KÄYTTÖOHJEET

1. Harjaa hampaat YOTUEL valkaisevalla hammastahnalla kolmen minuutin ajan.
2. Laita muottiin ohut kerros YOTUEL valkaisevaa geeliä.
3. Aseta muotti hampaisiin ja pyyhi ylimääräinen geeli pois paperilla. Ensimmäisten minuuttien aikana syljen erittyminen voi hieman lisääntyä.
4. Pidä muottia suussa vähintään 1 tunti päivässä. Nopeamman tuloksen saavuttamiseksi voit käyttää muottia 2-3 tunnin ajan, tai suunhoidon ammattilaisen antaman ohjeen mukaan.
5. Valkaisuajan jälkeen harjaa hampaat uudelleen YOTUEL valkaisevalla hammastahnalla.
6. Pese ja kuivaa muotti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Valkeamman ja nopeamman tuloksen voit saada hammaslääkäriasemalla tehtävällä YOTUEL valkaisulla. Kysy lisätietoja suunhoidon ammattilaiselta.

YOTUEL VALKAISEVAT TUOTTEET

YOTUEL on edistyksellinen tuotesarja sinulle, joka haluat panostaa suun hyvinvointiin.

YOTUEL VALKAISEVA TAHNA Matala hankausarvo (36 RDA) ja korkea ksylitolipitoisuus auttavat ehkäisemään hampaiden reikiintymistä. Tahna ei vaahtoa.

YOTUEL VALKAISEVA SUUVESI Alkoholiton suuvesi uudistaa ikeniä ja hammaskiillettä.

VAROITUKSET

Ei raskaana oleville tai lapsille.
Ei tule käyttää välittömästi hampaiden paikkauksen jälkeen.
Ei tule käyttää, jos hammaskudos on vaurioitunut (esim. reikiä hampaissa).

SWEDISH BRUKSANVISNING

1. Borsta tänderna med YOTUEL blekande tandkräm i tre minuter.
2. Pensla ett tunt lager YOTUEL blekande gel i tandskenan.
3. Placera tandskenan över tänderna och torka bort överflödigt gel med papper. Under de första minuterna kan salivavsöndringen öka något.
4. Håll tandskenan i munnen minst 1 timme dagligen. För ett snabbare resultat kan du använda tandskenan i 2-3 timmar eller enligt anvisningar från en expert på munhälsovård.
5. Borsta tänderna med YOTUEL blekande tandkräm efter varje blekningsbehandling.
6. Tvätta och torka tandskenan efter varje behandling.

Vitare tänder och snabbare resultat kan du få med YOTUEL- blekning på en tandläkarstation. Be en expert på munhälsovård om ytterligare information.

YOTUEL BLEKANDE PRODUKTER

YOTUEL är en avancerad produktserie för dig som vill satsa på munnens välbefinnande.

YOTUEL BLEKANDE TANDKRÄM Lågt abrasionsvärde (36 RDA) och hög xylitolhalt hjälper att förebygga karies. Tandkrämen skummar inte.

YOTUEL BLEKANDE MUNVATTEN Det alkoholfria munvattnet regenererar tandkött och tandemalj.

VARNINGAR

Inte för gravida kvinnor eller för barn.
Ska inte användas omedelbart efter tandlagning.
Ska inte användas om tandvävnaden är skadad (t.ex. hål i tänderna).