

¡NUEVO!

Tratamientos restauradores



Demi™ Pro Curing Light

La luz que se adapta a ti



Comodidad durante todo el día

Reduce la fatiga gracias a su diseño ligero y ergonómico.



Polimerización más profunda

Ofrece un rendimiento de polimerización constante en condiciones reales de trabajo, gracias a su salida colimada y a un perfil de haz optimizado.



Fácil acceso

Llega a todos los ángulos gracias a su exclusiva punta giratoria de 360° y diseño compacto.



Seguridad

Minimiza el riesgo de sobrecalentamiento con la tecnología patentada PLS (Periodic Level Shift) y un radiómetro integrado.

Polimeriza con control y sin fatiga

- ✓ Comodidad ergonómica
- ✓ Precisión similar a la de un bolígrafo en un cuerpo ligero y equilibrado de solo 115 g
- ✓ Acceso total gracias a su punta giratoria de 360° y formato compacto



360°
PRECISIÓN
LLEGA A CADA ÁNGULO


"La lámpara de polimerización Demi Pro es muy ligera y hace que la polimerización sea cómoda desde cualquier ángulo"



- Dra. Shahira Saad

Profundidad de polimerización. Resultados de alto rendimiento.

Proporciona una salida de luz potente y colimada incluso a distancias mayores, lo que garantiza un rendimiento de fotopolimerización fiable en diversos escenarios clínicos.

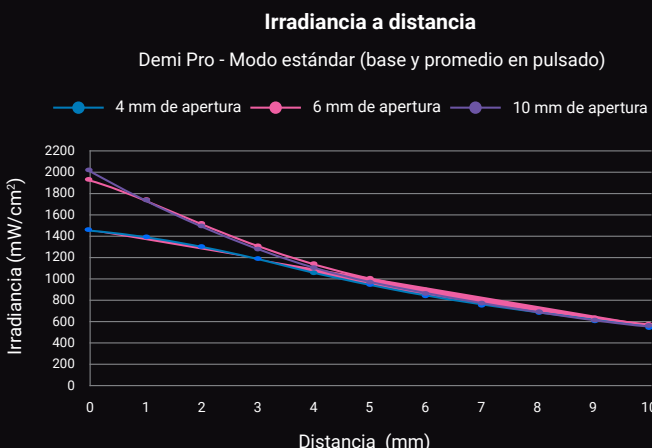

Polimerización profunda y uniforme

DemiPro proporciona resultados de polimerización fiables mediante una distribución de luz uniforme y de alta intensidad, incluso a cierta distancia de la superficie.

	Demi Pro	VALO™ X	SmartLite® Pro
Modo	Estándar	Potencia estándar (azul fijo)	Estándar
Resultado de la prueba (0mm) Luz probada directamente en el sensor	1393 mW/cm²	1137 mW/cm²	1233 mW/cm²
Resultado de la prueba (6mm) Ensayo realizado sobre un diente	1025 mW/cm²	830 mW/cm²	748 mW/cm²

Bluelight Analytics Inc. - Demi Pro Evaluation Final Report | May 2026

La confianza empieza por la seguridad

Demi Pro incluye un radiómetro integrado para comprobar fácilmente su potencia, lo que te da tranquilidad al realizar cada procedimiento.

Demi Pro utiliza la tecnología de cambio periódico de nivel (PLS), ajustando la intensidad de emisión varias veces a lo largo del ciclo de polimerización para mantener una alta potencia sostenida sin generar un exceso de calor.

Demi Pro con PLS, exposición de 5 segundos



Punta de transiluminación*

Una potente herramienta para facilitar la visualización intraoral, el diagnóstico y la planificación del tratamiento.



Información para pedidos

Kit	Accesorios
37380 Kit completo	37381 Punta de polimerización
1 punta de polimerización,	37382 Pieza de mano
1 pieza de mano, 1 base de carga, 2 baterías, 3 protectores de luz, 1 lente de polimerización rápida (tack cure), 1 adaptador de CA	37383 Base de carga
	37384 Batería
	37385 Recambio del protector de luz
	37386 Lente de polimerización rápida (Tack cure)
	37387 Punta de transiluminación
	37379 Adaptador de CA

*Se vende por separado

