

Supere todos los desafíos



Belleza en
rojo & blanco

initial

GC Initial®

IQ Lustre

Pastes NF

de GC,

la cerámica
universal en 3D
para colorear

GC

Supere todos los desafíos con Initial de GC

Lustre Pastes NF de GC, la **única cerámica en 3D** para colorear que proporciona un **efecto estético** a todos sus trabajos... simplemente pintando.

Ya no necesitará una estratificación compleja o ciclos de cocción adicionales para conseguir una **vitalidad insuperable** y un **brillo natural** en todas sus restauraciones.

Con Lustre Pastes NF (elaborados con partículas de cerámica muy finas) necesitará los mismos pasos para completar una corona o un puente, independientemente de la técnica que utilice a la hora de realizar restauraciones de cerámica.

¿Necesita cambiar el color, la luminosidad, el valor o el brillo de la superficie de sus coronas y puentes estratificados? Puede usar Lustre Pastes NF en todas las cerámicas de la gama GC Initia.



¿Busca la forma de añadir una vitalidad adicional a sus reconstrucciones monolíticas con CAD/CAM? Lustre Pastes NF es la solución en cualquier caso.



Si prefiere inyectar la cerámica... comience con GC Initial IQ One Body Press-Over-Metal o Press-Over Zircon y a continuación pinte las características en una fase posterior.



Este sistema le permitirá individualizar su corona y su puente Y crear una transición natural del margen de la corona a la encía... simplemente pintando.



Pinte su cerámica con
Lustre Pastes NF de GC tanto para
la **estética blanca** como la **roja**



Lustre Pastes NF Gum shades

Todo lo que necesita para crear una transición natural del margen de la corona a la encía en unos cuantos pasos sencillos.

Estos 5 colores de encías únicos, Lustre Pastes, permiten una adaptación individual que combina con los colores gingivales naturales y proporciona una armonía natural. Puede usar los 4 modificadores de encía que se pueden mezclar y que le permitirán una creatividad ilimitada para reproducir los casos de encías más delicadas sin ningún tipo de problema.

Los colores Lustre Pastes NF Gum Shades están basados en una selección especial de partículas de cerámica no fluorescentes de color rosa, que reproducen a la perfección el aspecto natural de la encía.



G-23
Lustré Gum
Base clara



G-24
Lustré Gum
Base oscura



G-34
Lustré Gum
Violeta intenso



G-35
Lustré Gum
Crema intenso



G-36
Lustré Gum
Rojo intenso



LP-M1
Modificador blanco



LP-M2
Modificador rojo



LP-M3
Modificador azul



LP-M4
Modificador azul



Lustre Pastes NF V-Shades

El color V requerido se crea a través de la aplicación de las Lustre Pastes NF de Body «A» a Body «D». Este proceso, que solo lleva 2 minutos, incluye todo lo necesario para crear los colores V. Con su maestría, solo tendrá que utilizar los demás colores disponibles para crear resultados altamente estéticos.

Con los Lustre Pastes NF, puede modificar fácilmente las coronas y los puentes cerámicos convencionales. ¡Nunca había sido tan fácil cambiar el brillo, el valor y el color!

La solución más rápida para todos sus trabajos monolíticos con óxido de circonio.



L-A
Lustre Body A



L-B
Lustre Body B



L-C
Lustre Body C



L-D
Lustre Body D



L-N
Lustre Neutro



L-1
Lustre Enamel Effect 1
Vanilla



L-2
Lustre Enamel Effect 2
Blanco



L-3
Lustre Enamel Effect 3
Gris claro



L-4
Lustre Enamel Effect 4
Gris oscuro



L-5
Lustre Enamel Effect 5
Azul claro



L-6
Lustre Enamel Effect 6
Azul oscuro



L-7
Lustre Enamel Effect 7
Incisivo



L-8
Lustre Enamel Effect 8
Oliva



L-V
Lustre Enamel Effect 9
Valor



Dos sistemas, un método

Pinte su estética roja y blanca





Acabado perfecto para sus restauraciones

El color V requerido se crea a través de la aplicación de las Lustre Pastes NF de cuerpo «A» a cuerpo «D». Este proceso, que solo lleva 2 minutos, incluye todo lo necesario para crear los colores V. Con su maestría, solo tendrá que utilizar los demás colores disponibles para crear resultados altamente estéticos.



Base



Aplicación de los colores de cuerpo



Restauración final, ofreciendo brillo y color

Con los Lustre Pastes NF, puede modificar fácilmente las coronas y los puentes cerámicos convencionales. Nunca había sido tan fácil cambiar el brillo, el color y el valor.



Brillo



Color



Valor

Consiga los mejores resultados estéticos utilizando Lustre Pastes NF con la técnica de "cut-back" en sus trabajos de inyección o estratificación. Después de pintar con Lustre Pastes NF, los retoques finales se llevan a cabo con CL-F para obtener una mayor translucidez y con las masas opalescentes/incisales.



Recorte



Utilice los Lustre Pastes



Masas opalescentes/incisales




Finalizado

La solución más rápida para todos sus trabajos monolíticos con óxido de circonio





- Amplio intervalo de coeficientes de expansión térmica, para que se pueda utilizar con toda la gama cerámica GC Initial y con casi todos los tipos de cerámica o dientes artificiales de cerámica.
- No es necesaria ninguna estratificación compleja ni ciclos de cocción adicionales. Rápido - Fácil - Seguro. Pastas listas para usar con propiedades tixotrópicas finas, para una aplicación más sencilla y precisa.
- Líquido diluyente y regenerativo para conservar una consistencia óptima hasta el final.

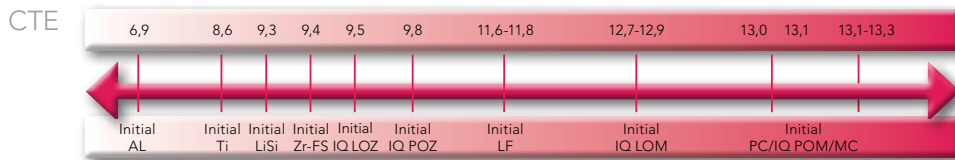

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades

- 5 colores básicos para conseguir una restauración con V-Shade de la forma más sencilla posible.
- 9 colores avanzados para potenciar su lado más artístico y pintar manchas blancas, descalcificaciones, finas líneas y grietas.

Composición del set:

1 neutro (4 g)
 1 valor s (4 g)
 4 colores Body (4 de 4 g)
 8 colores Enamel Effects (8 de 4 g)
 Diluting Liquid (8 ml)
 Refreshing Liquid (8 ml)
 1 paleta de mezcla
 2 pinceles
 Carta de colores
 Manual técnico



GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 pastas coloreadas de encía listas para usar con una tixotropía ideal para una aplicación fácil y precisa.
- 4 modificadores de encía que se pueden mezclar y que permiten una creatividad ilimitada para copiar la estética gingival natural.

Composición del set:

5 colores de encías (4 g)
 4 modificadores de coloración para LP NF (3 g)
 Diluting Liquid (8 ml)
 Refreshing Liquid (8 ml)
 1 paleta de mezcla
 2 pinceles
 Carta de colores
 Manual técnico



Imágenes:

Michael Brusch, M. B. Dentaltechnik GmbH, Dusseldorf (Alemania).
 Philippe Llobell, Saint-Didier (Francia)
 Przemek Seweryniak, Laboratorio Dental Cosmodent, Malmö (Suecia)
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, Múnich (Alemania)

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
 Edificio Codesa 2
 Playa de las Americas, 2, 1º, Of. 4
 ES-28290 Las Rozas, Madrid
 Tel. +34.916.364.340
 Fax. +34.916.364.341
 info@spain.gceurope.com
 http://spain.gceurope.com

