

ECOCERAM^{WG}


2 PROCESSING STEPS
 Bearbeitungsschritte

HP


// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ **Polishing pre-sintered zirconia simplifies finishing after final sintering**
 Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand
- ⊕ **No contamination of zirconia, as no colour pigments are used**
 Kein Eintrag von Farbpartikeln in den Weißling, da keine Farbpigmente verwendet werden
- ⊕ **Developed for the lower strength of pre-sintered zirconia**
 Angepasst an die geringe Eigenfestigkeit von nicht gesintertem Zirkonoxid

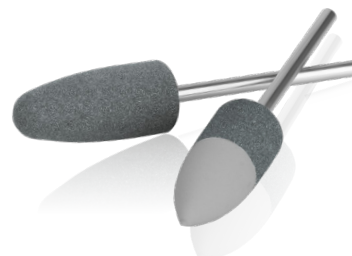

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Rec. rpm / Empf. U/min	4.000 - 7.000 min ⁻¹


 SCAN FOR
 APPLICATION
 VIDEO

1. STEP

Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			H334Km-WG	H338m-WG
HP		10 REF	2834X010	2838X010
		100 REF	2834X100	2838X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 24	Ø 5,5 x 16

2. STEP

Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			H334Kf-WG	H338f-WG
HP		10 REF	2934X010	2938X010
		100 REF	2934X100	2938X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 24	Ø 5.5 x 16

2-in-1 Polisher ^{NEW}

2-in-1 Polierer

1. STEP

Schritt

MEDIUM MITTEL



2. STEP

Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			H332-WG	H338-WG
HP		10 REF	2832X010	2839X010
		100 REF	2832X100	2839X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 24.5	Ø 6 x 16.5