


transparente y CRISTALINO

Los brackets **GHIACCIO** fabricados en zafiro **TRANSPARENCIA** y dureza; sofisticadas características modernas **EXIGENCIAS BIOMECÁNICAS**,

MONOCRISTALINO biomédical reúnen excepcional de los brackets estéticos ideales para satisfacer las cosméticas y de **CONFORT**

● El diseño

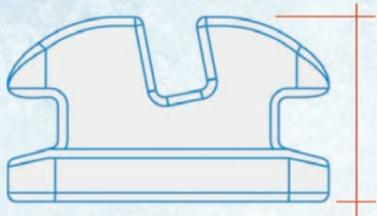

El **perfil particularmente reducido** en altura y el biselado de los bordes de los brackets aumentan la comodidad y la satisfacción del paciente.

● El posicionamiento



La conformación **diagonal** facilita el correcto posicionamiento gracias a la intuitiva alineación sobre el eje de la pieza. La presencia de un "escalón" a los lados de la base favorece una **segura sujeción de las pinzas** sobre la superficie mesio/distal, evitando así interferencias de las mismas durante el posicionamiento; **favorece la localización y la eliminación del composite excedente** en las fases de cementado directo.

● La capacidad retentiva y la fácil remoción

La base dispone de una retención mecánica debido a la presencia de **microperlas de Circonio** en los 2/3 de la superficie para asegurar la retención necesaria a lo largo de la terapia; además permite una **fácil remoción** una vez finalizado el tratamiento.



● La biomecánica



El innovador tratamiento superficial al Plasma **disminuye la fricción** slot/arco y aumenta la solidez estructural del bracket.



ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA