

MYLUNOS DUO : EL EQUIPO MÁS VERSÁTIL PARA CUALQUIER TRATAMIENTO

TERAPIA PROFILÁCTICA MÍNIMAMENTE INVASIVA



EL EQUIPO MÁS VERSÁTIL PARA CUALQUIER TRATAMIENTO

MyLunos Duo® combina los dos métodos para los tratamientos de higiene y profilaxis: el aeropulidor de polvo y el ultrasonido. El aparato combinado permite un tratamiento profiláctico completo con solo un dispositivo: desde la eliminación de sarro supra y subgingival con ultrasonidos hasta la eliminación de decoloraciones y biofilm con el aeropulidor de polvo.

SISTEMA DE AGUA SELECCIONABLE

MyLunos Duo® cuenta con una conexión fija de agua para los dos tipos de tratamiento, el aeropulidor de polvo y el ultrasonido. Además, para el ultrasonido también cuenta con un tanque de agua acoplable con una capacidad de 500 ml.



PIEZA DE MANO SCALER CON LED

Pieza de mano Scaler con iluminación LED particularmente ligera y fácil de manejar para una exploración óptima del área de trabajo dentro de la boca del paciente.



Vídeo sobre MyLunos Duo®

**BOQUILLAS INTERCAMBIABLES
PERIO Y SUPRA**

El cambio rápido de ambas boquillas permite un tratamiento fácil y cómodo. Se pueden girar 360°, lo que permite alcanzar puntos de difícil acceso de forma más directa dentro de la boca del paciente.



**RECIPIENTE DE POLVO SUPRA
Y PERIO**

Hay 2 recipientes de polvo disponibles: el recipiente Supra para el uso supragingival de polvos profilácticos Lunos® Gentle Clean y el recipiente Perio para el polvo profiláctico de grano fino Lunos® Perio Combi.

**DOBLE PROTECCIÓN PARA
EVITAR BLOQUEOS**

Un flujo de aire continuo en la pieza de mano aeropolidora evita atascos y bloqueos. Además, todos los polvos profilácticos Lunos® son completamente solubles en agua.



PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA

Todas las funciones se pueden controlar de forma intuitiva. La superficie se puede limpiar y desinfectar de forma rápida y sencilla.



AEROPULIDOR DE POLVO CON MYLUNOS DUO

La función de aeropulidor de polvo del equipo combinado MyLunos Duo® garantiza una aplicación profunda del flujo de polvo mediante las boquillas y los polvos adecuados, tanto para uso subgingival como supragingival. El sistema combinado garantiza los mejores resultados posibles y resultan especialmente cuidados y agradables a los pacientes.

AEROPULIDOR DE POLVO MYLUNOS DUO

Aplicación adaptada a las distintas necesidades profilácticas:

- Aplicación subgingival y supragingival del flujo de polvo
- Cambio flexible y rápido tanto de los polvos como de las diferentes funciones durante el tratamiento

Protección contra los bloqueos:

- Flujo continuo de aire a través de la pieza de mano
- Polvos profilácticos Lunos® completamente solubles en agua

Un confort excepcional para el paciente:

- El agua se calienta durante el tratamiento
- Los polvos profilácticos Lunos® tienen buen sabor y no dejan restos de polvo en la boca del paciente



BOQUILLAS SUPRA Y PERIO INTERCAMBIABLES

Elija entre las dos boquillas disponibles para su pieza de mano aeropulidora de polvo MyLunos Duo®, tanto para aplicación supragingival como subgingival. Se pueden girar 360° para tratar fácilmente los puntos de más difícil acceso de la boca del paciente. Las dos boquillas se pueden intercambiar de forma rápida y sencilla durante el tratamiento, lo que permite trabajar sin interrupciones.

BOQUILLA SUPRA

PARA TRATAMIENTOS SUPRAGINGIVALES

El orificio de la boquilla cuenta con el ángulo ideal de apertura y dirige el flujo de polvo de manera precisa a la zona a tratar deseada.

POTENTE Y SUAVE: LUNOS®

Para MyLunos Duo®, hay disponibles los polvos profilácticos Lunos® Gentle Clean y Perio Combi. El innovador agente abrasivo Trehalosa es totalmente soluble en agua. El polvo tiene un sabor dulce y no produce caries. No deja residuos de polvo en la boca del paciente y protege la mucosa bucal.



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS® GENTLE CLEAN: POLVO PARA TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Para la limpieza supragingival y la eliminación de manchas y decoloraciones extrínsecas.

Trehalosa: Innovador agente abrasivo

- Tamaño de partícula aprox. 65 µm
- no irrita las membranas mucosas

Mejor solubilidad en agua:

- No deja residuos de polvo en la boca del paciente
- protege el sistema de aspiración

LUNOS® PERIO COMBI: POLVO PARA TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Para la eliminación del biofilm subgingival y la limpieza supragingival.


Trehalosa: Innovador agente abrasivo

- Tamaño de partícula aprox. 30 µm
- no irrita las membranas mucosas

Mejor solubilidad en agua:

- No deja residuos de polvo en la boca del paciente
- protege el sistema de aspiración

BOQUILLA PERIO

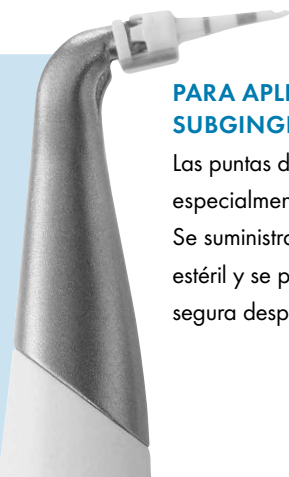

PARA APLICACIONES SUBGINGIVALES

Las puntas desechables Perio Tip son especialmente flexibles y delgadas. Se suministran envasadas de forma estéril y se pueden desechar de forma segura después de la aplicación.

SISTEMA COMPATIBLE DE BOQUILLAS

La compatibilidad de las boquillas con la pieza de mano aeropolidora MyLunos® permite un uso rápido y cómodo.



MYLUNOS DUO: FUNCIÓN ULTRASONIDO

La función de ultrasonido del equipo combinado MyLunos Duo® se realiza con la pieza de mano Scaler que destaca por ser muy fina y ligera. Dispone de iluminación LED y una amplia variedad de instrumentos que permiten la eliminación subgingival y supragingival de cálculos y sarro dental. En función del instrumento utilizado, se puede seleccionar fácilmente el tratamiento adecuado a través de la pantalla táctil.

ULTRASONIDO MYLUNOS DUO

De un vistazo:

- Eliminación de cálculos y del sarro dental subgingival y supragingival
- Selección rápida entre la funciones ultrasonido o aeropolidor de polvo durante el tratamiento
- Sistema de agua flexible: Conexión fija de agua o tanque de agua con 500 ml de capacidad

PIEZA DE MANO SCALER MYLUNOS DUO*

Manejo perfecto:

- Pieza de mano Scaler ligera y fina*
- Iluminación LED para explorar de forma precisa el área de trabajo dentro de la boca del paciente
- Rápido cambio y atornillado de instrumentos mediante la llave dinamométrica



INSTRUMENTOS SCALER: VARIEDAD INCOMPARABLE

MyLunos Duo® ofrece una amplia variedad de instrumentos* Scaler que se adapta a las necesidades de los más diversos casos de tratamiento. Los instrumentos están hechos de acero inoxidable para uso médico. El accesorio IC1 para la limpieza de implantes está hecho de 100 % PEEK (plástico altamente tecnológico).









INSTRUMENTOS SCALER*

Aplicación adaptada a los diferentes tratamientos:

- Gran variedad de instrumentos (también para implantes)
- Rápido cambio y atornillado de instrumentos mediante la llave dinamométrica
- Distintos niveles de uso ajustables
- Todos los instrumentos y accesorios, así como la llave dinamométrica, son completamente esterilizables

INCLUIDOS EN LA DOTACIÓN DEL EQUIPO

EXTRAS OPCIONALES

<p>S2</p>  <p>S2 Puntas de trabajo más cortas, sección transversal triangular y superficie redondeada para uso universal en superficies interproximales y zonas posteriores.</p> <p>Función: Scaler</p>	<p>S1-S</p>  <p>S1-S Punta de trabajo fina y más larga, sección transversal triangular y superficie redondeada para eliminación de sarro supragingival.</p> <p>Función: Scaler</p>
<p>P10</p>  <p>P10 Punta de trabajo extralarga y ligeramente curvada con superficie redondeada para una eliminación suave de las concreciones subgingivales.</p> <p>Funciones: Supra y Scaler</p>	<p>P16L</p>  <p>P16L Punta de trabajo curvada hacia la izquierda y en forma de cureta para la eliminación supragingival y subgingival de sarro y biofilm en las bolsas y furcaciones profundas en la zona de los premolares y los molares.</p> <p>Función: Perio Scaler</p>
<p>P11</p>  <p>P11 Punta de trabajo curvada hacia la derecha (15°) con superficie redondeada para una eliminación suave de las concreciones subgingivales.</p> <p>Funciones: Supra y Scaler</p>	<p>P16R</p>  <p>P16R Punta de trabajo curvada hacia la derecha y en forma de cureta para la eliminación supragingival y subgingival de sarro y biofilm en las bolsas y furcaciones profundas en la zona de los premolares y los molares.</p> <p>Función: Perio Scaler</p>
<p>P12</p>  <p>P12 Punta de trabajo curvada hacia la izquierda (15°) con superficie redondeada para una eliminación suave de las concreciones subgingivales.</p> <p>Funciones: Supra y Scaler</p>	<p>ICS + IC1</p>  <p>ICS + IC1 Instrumento especial de dos piezas con soporte para instrumento ICS y accesorio cónico IC1 para limpieza de superficies de implantes y restauraciones.</p> <p>Función: Perio Scaler</p>

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
C/Serra de la Salut, 11 - Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
www.duerdental.com
info@durrdental.com

The logo for Dürr Dental features a stylized graphic of three parallel diagonal lines in shades of blue and white to the left of the company name. The name 'DÜRR DENTAL' is written in a bold, sans-serif font, with 'DÜRR' on the top line and 'DENTAL' on the bottom line. Below the name, the tagline 'THE BEST, BY DESIGN' is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

**DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN