

El futuro del control de la oclusión



OccluSense[®]
by Bausch

OccluSense®

OccluSense® es un dispositivo a pilas que utiliza su red inalámbrica local para enviar los datos registrados a la OccluSense®-iPad-App.

El cargador inductivo permite la transmisión inalámbrica de energía. Con las baterías totalmente cargadas se puede utilizar el dispositivo durante un máximo de 4 horas.




El kit OccluSense® contiene los siguientes componentes y piezas:
Dispositivo OccluSense®, cargador inductivo, una caja de 25 sensores OccluSense® BK 5025, el sensor de prueba OccluSense®, 3 pilas recargables AAA, un destornillador IP6 Torx y el manual.
Kit OccluSense® en estuche azul [REF BK 5000](#)



Sensor electrónico de presión OccluSense®:

- 60 micras de grosor
- flexible
- recubrimiento en color

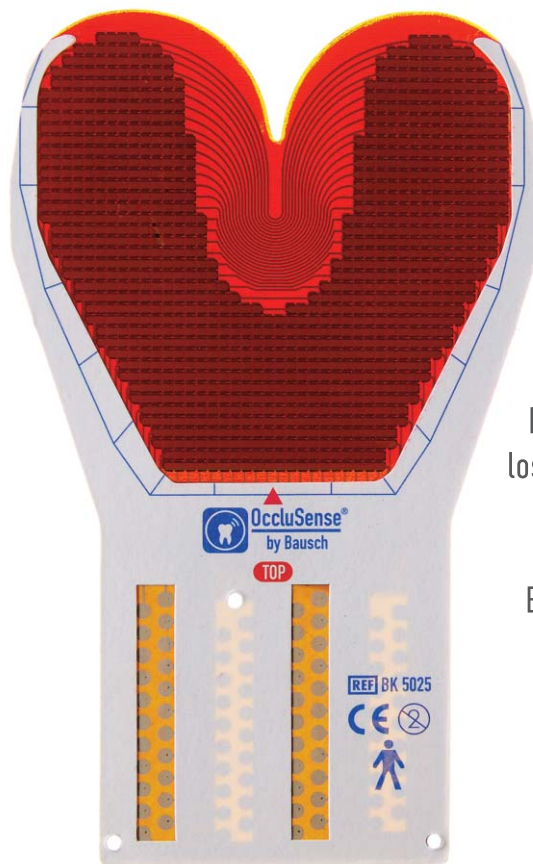

OccluSense® cuenta con sensores de presión de tecnología avanzada que permiten registrar las fuerzas masticatorias en 256 niveles de presión.


El material fino y flexible permite registrar tanto la oclusión estática como la dinámica.

El recubrimiento en color rojo marca los contactos oclusales en los dientes del paciente.

El kit OccluSense® contiene una caja con 25 sensores (BK 5025).

Actúa como un papel de articular. Registra la presión oclusal.

OccluSense® se utiliza como los materiales de las pruebas de oclusiones tradicionales. En la OccluSense®-iPad-App podrá registrar y guardar la presión masticatoria de las oclusiones estáticas y dinámicas.

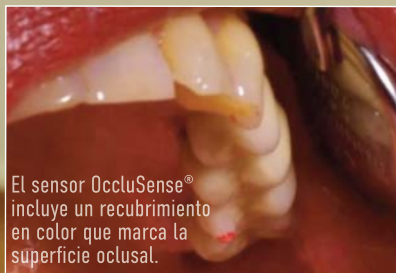

El sensor OccluSense® incluye un recubrimiento en color que marca la superficie oclusal.



OccluSense®-iPad-App.

Registre, evalúe, organice, compare y exporte los registros oclusales.



La OccluSense®-iPad-App puede descargarse gratuitamente desde la AppStore de Apple (www.occlusense.com/install).

Modelos de iPad admitidos: iPad Pro de 12,9", iPad Pro de 10,5", iPad Pro de 9,7", iPad Air 1, iPad Air 2



Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch[®]

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • info@bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • info@bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • info@bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • info@bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • vendas@bauschbrasil.com.br

Bausch y Occlusense[®] son marcas comerciales de Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registradas en la Unión Europea y otros países. Apple, Mac, iPad, iPad Air, iPad mini, AirPods y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.