

KaVo PiezoLED® Scaler con ultrasonido

PiezoLED Scaler

Experimente un futuro poderoso.



NUEVO
con
KaVo **CARE**
tecnología



KaVo. Dental Excellence.

¡No espere más a la nueva interacción de fuerza e inteligencia!



Déjese fascinar: tecnología innovadora KaVo CARE

Con el nuevo PiezoLED Scaler, usted dispone de la tecnología más puntera y potente de ultrasonido. Gracias a la señal sinusoidal, la tecnología KaVo CARE le permite un suministro de potencia armónico único y una libertad de movimiento lineal óptima de los instrumentos. El control inteligente con retroinformación del suministro de potencia garantiza un manejo seguro del Scaler y resultados eficaces de tratamiento. Gracias a 6 diodos y a la emisión circular de la luz, usted cuenta con un área iluminada de primera clase con una visibilidad óptima.

Cuatro ajustes de modo diferentes le ofrecen una adaptación individualizada para múltiples indicaciones y necesidades del paciente. Para el tratamiento de pacientes sensibles puede cambiar fácil y rápidamente al modo deseado.

Todos los elementos forman una unidad.

El PiezoLED Scaler con ultrasonido puede integrarse por completo en su unidad de tratamiento KaVo. De esa manera ahorrará espacio para equipos independientes. El instrumento siempre está a mano en el elemento del odontólogo y el control se realiza simplemente a través del reóstato de pie de la unidad de tratamiento.



KaVo PiezoLED Scaler: Ventajas y beneficios para usted


- Tecnología innovadora KaVo CARE con control inteligente de retroinformación y gran capacidad de eliminación
- Adaptación individual y sin escalas de la potencia con 4 ajustes de modo diferentes
- Integración total en la unidad de tratamiento
- Amplia gama de aplicaciones para múltiples indicaciones
- Calidad perfecta de luz gracias a diodos circulares
- Reequipable para ESTETICA E80, E70, E50 y E30

Apúntese a la variedad. Para sus tratamientos individualizados.

Para todas las indicaciones importantes, PiezoLED ofrece la solución adecuada para su clínica gracias a su amplia oferta de puntas. De esa manera logrará excelentes resultados de tratamiento en un breve tiempo. La combinación exclusiva de llave dinamométrica ① y de soporte para puntas no sólo permite un almacenamiento limpio y ordenado de las puntas sino también una cómoda esterilización. La Steribox ② le ofrece una solución ideal para el tratamiento rápido y el almacenamiento higiénico de los juegos de puntas y de la pieza de mano con bandejas de acero inoxidable completamente esterilizables.



Profilaxis

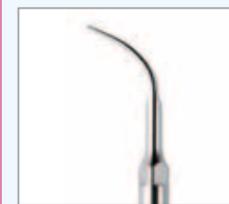

PIEZO Scaler 201

Para la eliminación de sarro dental supragingival en todos los cuadrantes
1.007.4024



PIEZO Scaler 202

Para la eliminación de concreciones supragingivales y subgingivales en todos los cuadrantes, especialmente en los espacios interdentes y en la zona del surco
1.007.4026




PIEZO Scaler 203

Para la eliminación de incrustaciones subgingivales en las superficies radiculares. También es adecuada para los tratamientos de control periodontales
1.007.4028

La práctica tarjeta de medición de puntas para el control de la longitud de la punta
Puntas recortadas 2 mm = 50% de reducción de potencia

- La renovación de las puntas regularmente mejora considerablemente la eficacia del tratamiento:
- Eliminación sencilla y rápida del sarro dental
 - Tratamiento sin esfuerzos y con un alto confort

Periodontología

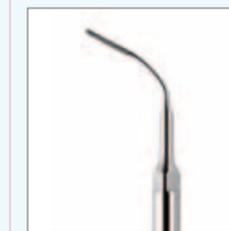


PIEZO Perio 210

Punta diamantada con grano de 15µm para la limpieza radicular profunda bajo visibilidad directa, para la regularización de los excesos de las restauraciones, así como para la ampliación de los techos de bifurcación.
1.007.4039



PIEZO Perio 211

Punta diamantada con grano de 70µm para la limpieza radicular profunda bajo visibilidad directa, para la regulación de los excesos de las restauraciones, así como para la ampliación los techos de bifurcación.
1.007.4042

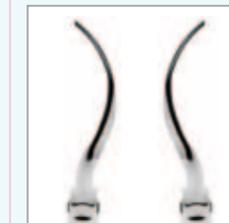

PIEZO Perio 212 + 213

Punta curvada a la izquierda y a la derecha para el desbridamiento periodontal, especialmente adecuada para superficies proximales de acceso difícil y para bifurcaciones radiculares.

Perio 212 1.007.4032
Perio 213 1.007.4033




PIEZO Perio 214

Para el enjuague y desinfección de bolsas gingivales, especialmente para tratamientos de control
1.007.4034



Preparación

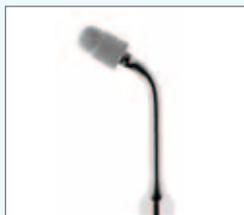

PIEZO Cem 225

Para el cementado de inlays, onlays y carillas cerámicas


1.007.4027



PIEZO Prep 226

Punta esférica diamantada para la apertura de pequeños defectos oclusales y bucales


1.007.4035

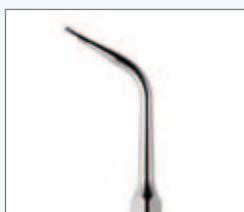

PIEZO Prep 227

Punta de diamantado parcial para el acabado de los bordes de cavidades mesiales proximales

1.007.4036

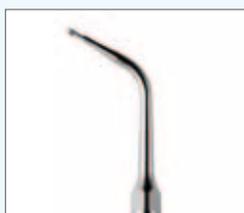

PIEZO Prep 228

Punta de diamantado parcial para el acabado de los bordes de cavidades distales proximales

1.007.4037




PIEZO Prep 229

Punta diamantada para el ensanchamiento y la limpieza de las fisuras antes del sellado

1.007.4038


Endodoncia

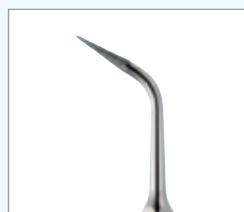

PIEZO Endo 220

Punta cónica diamantada para la búsqueda de conductos radiculares y la eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del sistema de conductos radiculares

1.007.4040

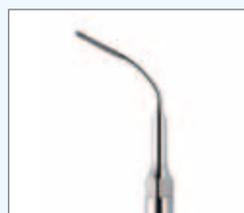

PIEZO Endo 221*

Punta delgada, diamantada para la eliminación de escalones y otros obstáculos en el conducto radicular, p. ej. al eliminar puntas rotas

1.007.4041



PIEZO Endo 222


Soporte de limas de 120° para el uso flexible del juego de 5 limas PiezoLED Endo (ISO 15, 20, 25, 30, 35). Especialmente adecuado para la zona anterior y premolar

1.007.4043, 1.007.4011

Datos técnicos

Modo de accionamiento	piezoeléctrico
Forma de oscilación	lineal
Frecuencia de oscilación	24-32 kHz
Ø pieza de mano	máx. 17 mm
Longitud de pieza de mano (sin punta)	103 mm
Peso	50 g
Intensidad lumínica de diodo	25.000 lux

Limpieza de implantes

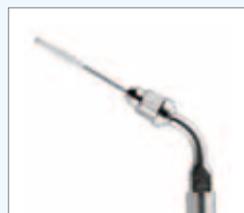

PiezoLED Implant Set

Para una limpieza eficaz y cuidadosa de implantes y de las restauraciones correspondientes. Punta sin metal

1.007.4008

* Las puntas no pueden usarse para el PiezoLED en combinación con Primus 1058



KaVo. Dental Excellence.