

Ahora nuevo:
bubble gum



VOCO Profluorid® Varnish

LACA DENTAL DESENSIBILIZANTE CON FLUORUROS



VOCO Profluorid® Varnish

EFECTO FUERTE

Dientes sensibles son un problema generalizado en la población. Causan dolores temporarios al paciente que muchas veces no se mencionan cuando va a visitar el dentista. La causa para la hipersensibilidad son por regla general los túbulos dentinales abiertos. La meta del tratamiento es, por eso, cerrarlos. Profluorid Varnish es una laca con fluoruros para el tratamiento contra la hipersensibilidad. Después de preparaciones de cavidad o en caso de cuellos de dientes sensibles se sellan efectivamente los túbulos dentinales.


Composición y efecto de VOCO Profluorid® Varnish

Profluorid Varnish es una laca basada en colofonia con un contenido de fluoruro sódico del 5 % (22,600 ppm). El ión de fluoruro opera – junto con el ión de calcio enriquecido en los túbulos – una precipitación del fluoruro de calcio que conduce a un sellado seguro de los túbulos. Los usuarios consultados confirman que más de un 85 % de los pacientes ya no tenían ningún dolor después del primer tratamiento con Profluorid Varnish.

Aparte del sellado rápido de los túbulos dentinales, Profluorid Varnish forma los depósitos de fluoruro de calcio en la superficie dental. Estos protegen el diente ante ataques ácidos, fomentan la remineralización y contribuyen a largo plazo a la formación de fluorapatita.



La laca contiene, además, xilitol. Adicionalmente a la propiedad que mejora el sabor, xilitol también contiene un efecto cariostático.

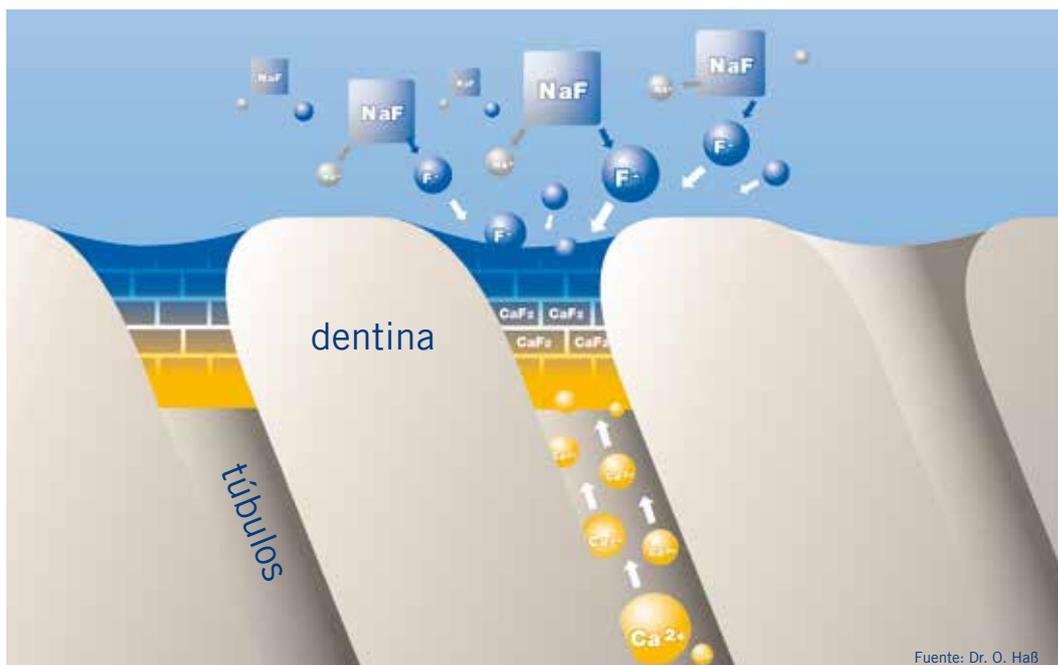

VOCO Profluorid® Varnish


SIMPLE Y ESTÉTICO

Aplicación fácil

La matriz de colofonia de Profluorid Varnish posibilita también una buena adhesión en superficies húmedas. Secar las superficies anticipadamente no es necesario de modo que la aplicación ahorra tiempo. Así se aumenta la cooperación de los pacientes con menos afirmación (p. ej. niños).

Estética y sabor

Profluorid Varnish es una laca del color del diente que no perjudica la estética. Profluorid Varnish está disponible en cinco sabores agradables: Bubble Gum y cereza especialmente para niños y pacientes más jóvenes, menta como sabor clásico – sobre todo para mayores, caramelo como variante cremosa y melón más bien como sabor exótico. Con los cinco sabores refinados puede ofrecer más servicio y atender individualmente a sus pacientes.

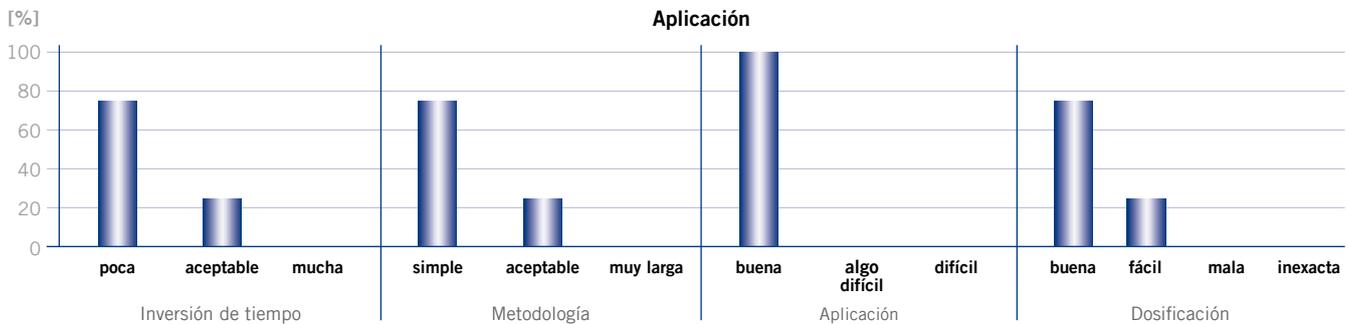

Resultados de los dentistas consultados y que lo han probado

Opinión de dentistas

Los dentistas que utilizan el producto certifican que Profluorid Varnish tiene buenas propiedades de manejo y de estética. La mayoría de los usuarios constatan además una diferencia considerable en relación a los productos competidores. Profluorid Varnish también tiene mejor aceptación por parte de los

pacientes. Casi todas las personas consultadas no tenían dolor después del tratamiento y registran una mejora considerable.

Profluorid Varnish: ¡Más que una cuestión de buen gusto!


Desensibilización fácil y estética con VOCO Profluorid® Varnish



Las ventajas de *SingleDose*

Los blísters del Profluorid Varnish SingleDose contienen un pincel y la laca de modo que se puede aplicar el producto higiénicamente.

Aplicación de la ampolla cilíndrica

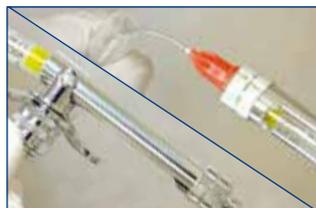

Las ventajas de la ampolla cilíndrica

Con la probada ampolla cilíndrica puede realizar, a la vez, tanto una aplicación precisa como una aplicación de fluoruro completa.

VOCO Profluorid® Varnish

USTED PUEDE ELEGIR

Indicaciones

Tratamiento de dientes hipersensibles

Sellado de túbulos dentinarios, p. ej. después de preparaciones de cavidad o en cuellos de dientes sensibles

Ventajas

- Se puede aplicar sin ningún problema sobre superficies húmedas
- Laca estética y del color del diente
- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluoruro)
- Disponible en cinco sabores diferentes: melón, menta, cereza, caramelo y bubble gum
- Aplicación económica en capas finas, productivo
- Ideal para el tratamiento de los cuellos sensibles del diente después de la profilaxis y la eliminación del cálculo dental

Ventajas de la *SingleDose*

- Simple, rápido e higiénico
- Utilizable sin dispositivos adicionales
- Sin derrame en cualquier posición

Ventajas de la ampolla cilíndrica

- Uso múltiple por el uso de cánulas desechables
- Aplicación exacta
- La más simple aplicación aproximada
- A la vez una aplicación de fluoruro completa



Presentación

REF 2971 Tubo 4 x 10 ml mixed

Sabor	<i>SingleDose</i> 48 x 0,40 ml	<i>SingleDose</i> 50 x 0,25 ml	<i>SingleDose</i> 50 x 0,40 ml	<i>SingleDose</i> 200 x 0,40 ml	Tubo 10 ml	Tubo 50 ml	Ampolla cilíndrica 5 x 1,70 ml
Melón	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	REF 2235
Caramelo	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–
Cereza	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–
Menta	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–
Bubble gum	–	–	REF 2238	REF 2239	–	–	–
Mixed	REF 2225	–	–	–	–	–	–

REF 2167 Cánulas de aplicación tipo 43, 100 u.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Línea gratuita: +800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor: