


RESINAS DE REBASE



ADHESIÓN:
25 MPA

DUREZA:
28 SHORE A

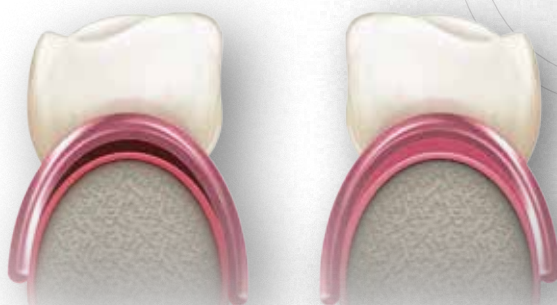

Rebases

CÓMODOS Y DURADEROS

en una sola sesión

MEMORIA
ELÁSTICA
>99,5% (99%)

REBASES
PROCLINIC EXPERT

SOLUCIONES COMPLETAS

**Rebase blando
Proclinic Expert**

En tubos
y en cartucho

**Rebase duro
Proclinic Expert**

En cartucho

Rebase total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rebase parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prótesis provisional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prótesis definitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mejorar soporte y comodidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ampliación de prótesis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ampliación bordes prótesis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptación en capas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Atrofia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulceraciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflamación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postoperatorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REBASES PROCLINIC EXPERT

Los rebases **Proclinic Expert** le permiten mejorar la comodidad, estabilidad y falta de retención de las dentaduras de sus pacientes, de forma rápida, sencilla y duradera, en una única sesión.



1

Preparación
de la prótesis



2

Aplicación
del adhesivo



3

Aplicación
del rebase



4

Colocación
de la prótesis
en boca




5

Barnizado
y pulido

REBASE BLANDO PROCLINIC EXPERT

Ponga fin a las molestias al masticar

El **Rebase Blando Proclinic Expert**, de silicona A, le ofrece una elasticidad duradera que absorbe presiones y las redistribuye para amortiguarlas. Su color es estable en el tiempo y permite garantizar el máximo confort a su paciente en una sola sesión, sin olores ni sabores.

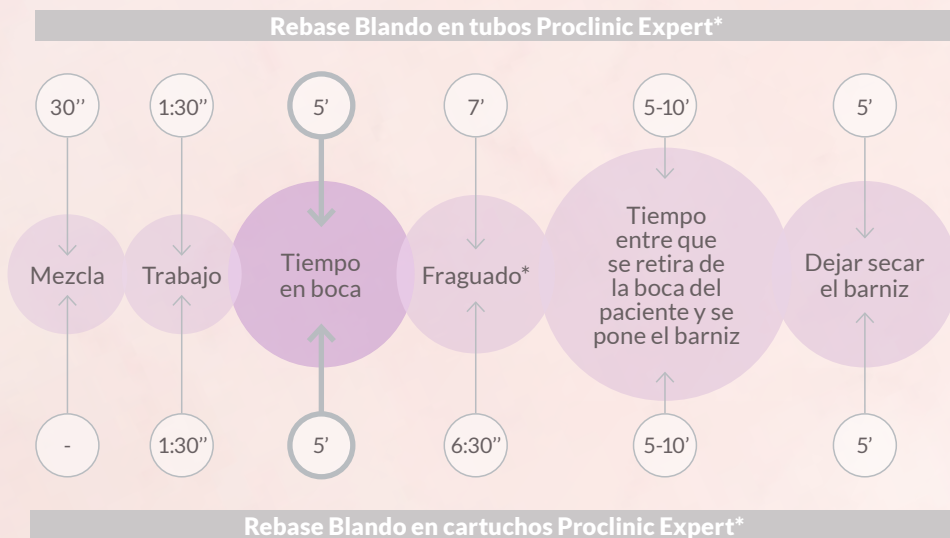

* Tiempos para el rebase blando en tubos y en cartucho.

Dr. Vincenzo Dominijanni
Spoleto, Perugia (Italia).

“Después de probar otros rebases que al cabo de unas semanas empezaban a desprender olor fuerte, decidí probar el Rebase Blando Proclinic Expert en cartuchos, cuya aplicación ha sido rápida y sencilla.

Al retirar la prótesis de la boca, ya me encontré con una superficie brillante y pulida que facilitó el retoque final. Un mes después del tratamiento, la prótesis se encuentra en excelentes condiciones, con una superficie brillante, homogénea y consistente, además de la ausencia de sabor u olor que el paciente destaca en comparación con rebases anteriores.”



REBASE DURO
PROCLINIC EXPERT

Consiga unos resultados duraderos

El **Rebase Duro Proclinic Expert** en cartucho automix, ofrece en una sola sesión una solución sencilla y rápida para una reparación completa.

Se adhiere de forma firme a todo tipo de dentaduras acrílicas, convirtiéndolo en un tratamiento eficaz y duradero, sin perder estética ni color con el paso del tiempo.

1%

Muy baja absorción de líquidos

COLOR INICIAL EXPUESTO A CAFÉ



Muestra sumergida en café durante 5 días a 27°C

EXCELENTE ESTABILIDAD DEL COLOR

MUY BAJA
SOLUBILIDAD

FUERZA DE
ADHESIÓN | **25** MPa



Rebase Blando Proclinic Expert en Tubos

- Rebase rápido en solo 1 sesión
- Material permanentemente elástico
- Sin olores ni sabores

KIT. 1 tubo base 50 ml, 1 tubo catalizador 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 2 pipetas

Ref. 41522

Reposición tubos: base 50 ml, catalizador 50 ml

Ref. 41523

Adhesivo 5 ml para tubos

Ref. 41525

Rebase Blando Proclinic Expert en Cartuchos

- Rebase rápido en solo 1 sesión
- Material permanentemente elástico
- Sin olores ni sabores

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 7 puntas, 2 pipetas

Ref. 41520

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41521

Adhesivo 5 ml para cartuchos

Ref. 41524



Rebase Duro Proclinic Expert

- Buena fuerza de adhesión
- Reparación duradera
- Color estable en el tiempo

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 15 ml, 6 puntas de mezcla, 6 cepillos aplicadores, 6 pipetas dispensadoras

Ref. 41526

www.proclinic.es

900 39 39 39

info@proclinic-products.com