



# Ajuste y comodidad para una vida activa



RELIN<sup>™</sup> II Soft &  
RELIN<sup>™</sup> II Extra Soft  
de GC

Material para rebases blando  
de silicona en cartucho

**GC**

# Ajuste, comodidad y funcionalidad para sonreír en

Muchos de sus pacientes tienen una esperanza de vida mayor y disfrutan de vidas más activas. Queremos sonreír sin preocupaciones, hablar con comodidad y disfrutar de la comida a cualquier edad, incluso si utilizamos prótesis removibles. Si su paciente utiliza prótesis removibles, las irritaciones, extracciones y la colocación de implantes pueden dar lugar a cambios en los tejidos blandos y duros.

**Reline II Soft y Extra Soft de GC** adaptan eficazmente las prótesis removibles a estas nuevas condiciones locales, ya que crean una capa blanda entre la prótesis y la mucosa. Esto ayuda en el proceso de cicatrización y mantiene tanto la comodidad como la funcionalidad durante semanas, e incluso varios meses.



Fotografías facilitadas por el Dr. García Baeza (España)

## Un rebase de silicona fácil de aplicar y disponible en cartuchos

La viscosidad ideal **del material** lo hace **fluir bajo presión y adaptarse** perfectamente a todos los detalles anatómicos.

Su capacidad de corte mejorada hace que el acabado definitivo de los márgenes sea incluso más fácil.



Capacidad de corte mejorada para un mejor acabado de los márgenes

## Comodidad duradera y alivio suave para sus pacientes

Con Reline II, la temperatura no aumentará durante el fraguado, lo que proporciona una mayor comodidad para sus pacientes.

El material **permanece suave e inodoro** y mantiene su **elasticidad y estabilidad dimensional** durante semanas o meses. ¿El resultado? Una solución duradera y conveniente para los pacientes con prótesis removibles.



Los márgenes se pueden proteger mediante Reline II Finishing Material

## Adhesión resistente, pero fácil de mantener y adaptar

La composición mejorada del **RELINE II Primer para resina de GC** proporciona una **fuerte adhesión durante** más tiempo a las prótesis removibles. Sin embargo, su fuerte adhesión no lo hace menos flexible.

**Posibilidad de añadir material en los tres meses** posteriores a la primera aplicación, para adaptarse a cambios de la mucosa y el hueso. El nuevo **RELINE II Remover** hace posible extraer y sustituir de forma sencilla la capa de rebase.



**GC RELINE II Primer para resina**




**GC RELINE II Remover para resina**

# cualquier circunstancia

De resistencia a la elasticidad:  
elija el producto que mejor se adapte a la situación clínica

**RELINE II Extra Soft de GC** es un material elástico que presenta una dureza de 32 (Shore A). Resulta particularmente útil para **normalizar** tejidos irritados y **ayudar en el proceso de cicatrización de los tejidos** tras la extracción o la cirugía de implantes. Puede permanecer en su posición durante **días o semanas**.

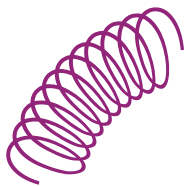

Con una dureza Shore A de 48, **RELINE II Soft de GC** mantendrá su elasticidad con el tiempo y al igual que un **amortiguador**, **distribuye la presión de carga** en caso de problemas anatómicos. También resulta ideal para rebases de **prótesis removibles sobre implantes** tras la fase de cicatrización. Puede permanecer en su posición durante **semanas o meses**.



## Aplicación fácil y sencilla durante todo el procedimiento



Prótesis removible inicial que se va a rebasar, tras la colocación de cuatro implantes.



Prepare el área que va a rebasar y raspe la superficie.



Aplique primer RELINE II de GC en el área que vaya a rebasar. Seque cuidadosamente con aire.



Disponible en cartucho sencillo.



Aplique RELINE II (Extra) Soft de GC. Tiempo de trabajo de 2 minutos.



Asiente la prótesis removible en la boca y ajuste el músculo. No la mueva durante 5 minutos.



Retire el exceso mediante un bisturí o unas tijeras. Repasado con puntas para repasado GC Reline II Point for Trimming.



Finalice los discos GC Reline II para acabado.



Prótesis removible rebasada.

# RELINE™ II Soft y RELINE™ II Extra Soft

## Ajuste y comodidad para una vida activa

Descubra la familia de materiales de rebase de GC



	GC TISSUE CONDITIONER	RELINE II Extra Soft de GC	RELINE II Soft de GC	RELINE P/L de GC
Material	Resinas acrílicas	Siliconas de adición	Silicona de adición	Resinas acrílicas (sin MMA)
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntos de presión</li> <li>Durante procedimientos implantológicos</li> <li>Rebase blando</li> <li>Recuperación del tejido tras traumatismo/cirugía</li> <li>Impresiones funcionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material acondicionador del tejido</li> <li>Mucosa sensible</li> <li>Puntos de presión</li> <li>Normalización de tejidos irritados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casos de implantes</li> <li>Puntos de presión</li> <li>Socavaduras óseas</li> <li>Reducción del dolor e incremento de la comodidad</li> <li>Rebase duradero en caso de ausencia de tejido de apoyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rebase de larga duración</li> <li>Prótesis removibles que no se ajustan y sin ningún tipo de traumatismo del tejido</li> <li>Paso final tras el tratamiento previo con materiales de rebase blando y/o acondicionadores de tejido</li> </ul>
Tiempo en la boca	Días/semanas/meses	Días/semanas	Semanas/meses	Meses/años

### Presentaciones disponibles de Reline II Soft y Extra Soft

#### Kit de introducción

##### 010259 GC RELINE II Soft Intro Kit:

- 1 cartucho Reline II Soft
- 1 primer para resinas
- 1 punta para cortar
- 1 disco de acabado
- 1 remover para resinas

##### 010262 GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:

- 1 cartucho Reline II Extra Soft
- 1 primer para resinas
- 1 punta para cortar
- 1 disco de acabado
- 1 remover para resinas

#### Reposiciones

- 010265 Cartucho RELINE II Soft de GC, 48 ml
- 010268 Cartucho RELINE II Extra Soft de GC, 48 ml
- 010273 Primer para resinas RELINE II de GC, 10 ml
- 010271 Material de acabado RELINE II de GC (modificador), envase 1 - 1, 2 unidades de 9 ml cada una
- 010275 Remover para resinas RELINE II de GC, 5,5 ml
- 010277 Punta para cortar RELINE II de GC (3 unidades),
- 010280 Disco de acabado RELINE II de GC (12 unidades)
- 010283 Cepillo desechable RELINE II de GC (6 unidades)

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 http://www.gceurope.com

**GC IBÉRICA**  
 Dental Products, S.L.  
 Edificio Codesa 2  
 Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4  
 ES-28290 Las Rozas, Madrid  
 Tel. +34.916.364.340  
 Fax. +34.916.364.341  
 info@spain.gceurope.com  
 http://spain.gceurope.com

