


La gama de taburetes Euronda incluye tres modelos, estudiados para responder a las distintas necesidades. CDS301, Coral y Onyx son perfectos para quienes pasan muchas horas sentados gracias al respaldo envolvente, al cómodo asiento y a la estructura estable. Además, son bonitos y están disponibles en muchísimos colores, cosidos y termoformados. Solo tienes que elegir.

Taburete termoldeada



Taburete cosida

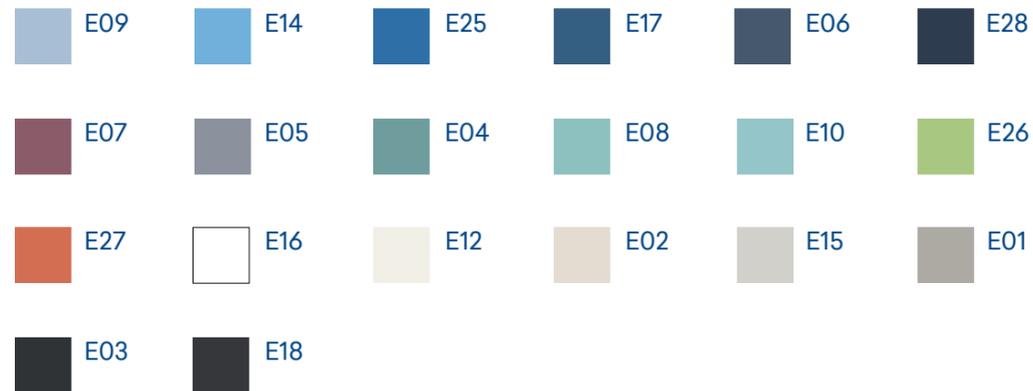

Los colores presentados son meramente orientativos.

Euronda®

Más de 40 años de protección en el sector dental

Desde hace más de cuarenta años, Euronda es sinónimo de excelencia en protección en el campo dental. Italiana por nacimiento e internacional por vocación, cuenta con cuatro filiales operativas y distribuye sus productos en más de un centenar de países de todo el mundo. Euronda es una de las empresas de referencia para el control de las infecciones en odontología. Produce dos líneas específicas de productos, a las que se suman las soluciones desechables de Euronda Alle®. La amplia gama de productos desechables, accesorios y dispositivos de protección individual Euronda Monoart® combina la máxima calidad productiva con la viveza del color. Euronda Pro System es el sistema de protección total Euronda, una línea completa de productos que optimizan todo el proceso de esterilización y lo hacen más seguro.

Todos los productos Euronda garantizan los máximos niveles de calidad y protección para odontólogos, trabajadores y pacientes.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.com

España

Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo
de Torres 4, 30007 Murcia,
España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg,
Russia
t +7 (812) 635 88 94
m info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru

Deutschland

Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge,
Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de
Bruxelles, 60110 Amblainville,
France
t +33 (0) 3 44 06 69 70
f +33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

990324 - Rev. 02/2019

Euronda®

Taburete para profesional

ES

Euronda®
Studio

CDS301

Estable y robusto, para un asiento seguro en el tiempo

Taburete para profesional. Estructura de acero cromado con base de cinco radios y dotada de cinco ruedas autogiratorias. Mecanismo operativo integrado en la parte inferior del asiento manejable a 360° por ambas manos sin tener que buscar otros mandos. Respaldo envolvente anatómico ajustable en tres posiciones diferentes, amplio asiento redondeado. Favorece una postura de trabajo relajada que reduce al mínimo la carga en la espalda, pelvis y piernas. Superficies lisas para asegurar la mejor higiene y limpieza.



Colores:
25 colores disponibles



Versión:
Termoldeada o cosida



Tamaño:
Asiento redondeado del diámetro de: 40x10 cm (Øxa)
Altura ajustable: 51-69 cm



Peso:
15 kg



Coral

El taburete práctico, de confianza, duradero

Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. Estructura en poliamida reciclable, ignifuga, anti rozaduras y antichoque dotada de cinco ruedas auto deslizantes. Accionamiento subida/bajada integrado en la parte inferior del asiento regulable a 360° con ambas manos sin tener que buscar otros mandos y recubierto con una funda. Sólido respaldo envolvente anatómico ajustable en tres posiciones diferentes. El asiento es en poliuretano indeformable y recubierto de sky.



Colores:
25 colores disponibles



Versión:
Termoldeada o cosida



Tamaño:
Asiento redondeado del diámetro de: 39x9 cm (Øxa)
Altura ajustable: 52 - 70 cm



Peso:
13 kg



Onyx

Comodidad y calidad para todos

Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del asiento, accionable a 360°. Asiento redondo. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y en profundidad.



Colores:
25 colores disponibles



Versión:
Termoldeada o cosida



Tamaño:
Asiento redondeado del diámetro de: 39x9 cm (Øxa)
Diámetro básico: 58 cm
Altura ajustable: 50 - 65 cm



Peso:
11 kg

