

A close-up photograph of a dental compressor system. The image shows a black cylindrical compressor unit at the top, with various metal fittings, hoses, and a pressure gauge. A prominent feature is a braided stainless steel hose connected to a brass fitting with a ring handle. The background is a blurred view of the dental unit's interior, showing white and grey components.

# D. Devices

Advanced systems for dental devices

compresores



# D\_ Devices

## **Dental Devices de confianza.**

**Presentamos D\_Devices, línea de dispositivos dentales distribuidos de forma exclusiva por Proclinic.**

Hemos seleccionado una gama de dispositivos dentales que han sido sometidos a los más estrictos controles de calidad, testados en clínicas y evaluados por expertos en el área técnica-funcional.

Todos nuestros productos cuentan con un servicio técnico especializado que respalda la calidad de los dispositivos que ofrecemos.

**D\_Devices, sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.**



## Conoce nuestros **D\_Compressor**

D\_Devices presenta su línea de compresores compactos de operación silenciosa y con bajas vibraciones.


**Simple y de fácil mantenimiento, los compresores D\_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango:**

- Sistema de filtración integrado
- Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución
- Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana



# D\_Compressor, calidad

Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.

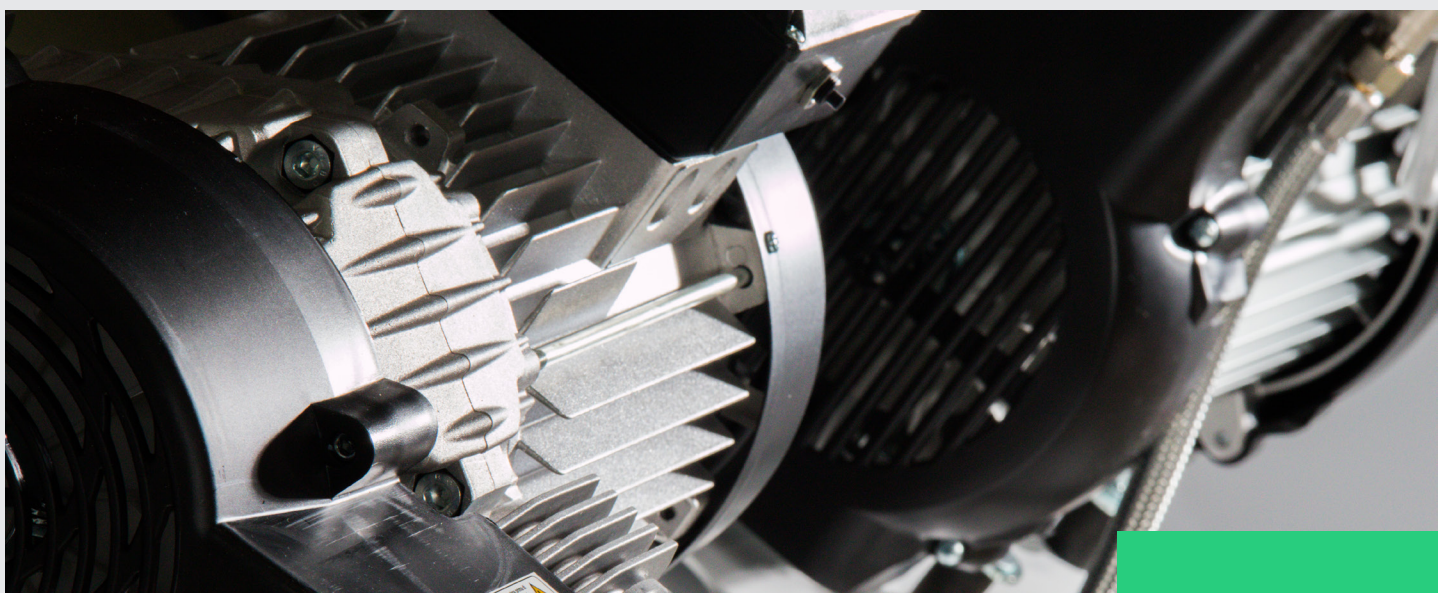

**Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración:**

- Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones: mayor superficie de filtración y mayor vida útil
- Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo
- Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas
- Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho



# en los detalles

**Sistema de refrigeración posterior que promueve la reducción de la temperatura del aire comprimido permitiendo un mayor rendimiento del compresor:**

- Menor calentamiento del compresor
- Mayor rendimiento del sistema de secado gracias a la menor temperatura en la entrada
- Protección perfecta del tubo, ubicado bajo la cubierta del ventilador
- Mantenimiento sencillo y mayor fiabilidad: conexión de un único tubo al conjunto

**Nuevo sistema de aspiración patentado para reducir el ruido y aumentar el enfriamiento:**

- Flujo de succión a través del compresor
- Enfriamiento eficaz de los rodamientos y de todas las piezas mecánicas
- Reducción excepcional del ruido gracias a la circulación interna del aire







**D\_Devices, sinónimo de calidad y tecnología  
garantizada para tu clínica.**




Protección de plástico  
de alta resistencia

Presostato  
de alta calidad

Secador de  
membrana

Depósito horizontal  
de 40 litros



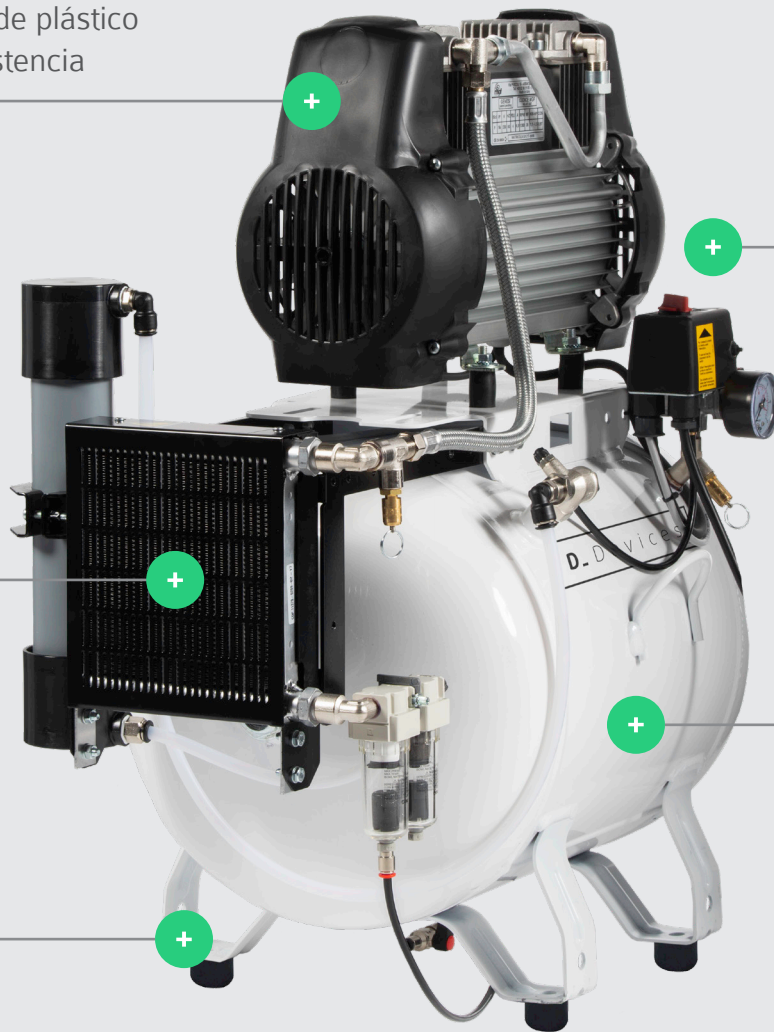




Silent Blok  
de alta impacto









## D\_COMPRESSOR 1/M

### El imprescindible.

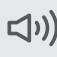Compresor libre de aceite, aporte de aire 120l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con secador de aire de membrana libre de mantenimiento y filtración de 0,01 micrones.

 Sillas dentales	 Secador	 Aire aspirado m3/h l/min cfm	 Aporte de aire m3/h l/min cfm	 Potencia HP KW	 Voltaje Frecuencia V Hz	 Tamaño depósito l GAL
2	Sí	-- 6.4 182	-- 120 4,2	1,5 1,1	230 50	400 10,5

 Nivel de ruido dB (A)	 Ciclo de trabajo	 Máxima presión bar PSI	 Medidas mm	 Peso neto Kg lb	 Peso bruto Kg lb
65	50%	7 101	410 x 710 x 770	42 96	45 99





**Los compresores D\_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango.**



Protección de plástico  
de alta resistencia



Presostato  
de alta calidad








Depósito horizontal  
de 40 litros






Silent Blok  
de alta impacto

## D\_COMPRESSOR 2/M

### El potente.

Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con tratamiento interno anticorrosión, equipado con nuevo secador de aire de membrana capaz de garantizar los -20° C de valor del punto de rocío.

 Sillas dentales	 Secador	 Aire aspirado m3/h l/min cfm	 Aporte de aire m3/h l/min cfm	 Potencia HP KW	 Voltaje Frecuencia V Hz	 Tamaño depósito l GAL
3	Sí	-- 255 9	-- 152 5,4	2 1,5	230 50	40 10,57

 Nivel de ruido dB (A)	 Ciclo de trabajo	 Máxima presión bar PSI	 Medidas mm	 Peso neto Kg lb
66	70%	7 101	710 x 410 x 770	50 110





## **D\_Compressor**, una elección segura

Elegir D\_Compressor para tu clínica o laboratorio representa una elección garantizada.

### **Todos los equipos D\_Devices cuentan con:**

- Servicio técnico propio
- Equipo de atención al cliente especializado
- Producto con la garantía y fiabilidad de Proclinic, distribuidor exclusivo en España





## Próximos lanzamientos:

Nueva línea de esterilización D\_Devices

- Autoclave
- Selladora
- Cubas de ultrasonido

Próximamente pondremos a tu disposición el autoclave clase B de 24 litros D\_Devices, junto con la selladora de rollos de esterilización semiautomática y la gama de cubas de ultrasonidos D\_Devices, serán el inicio en la línea de esterilización de nuestra marca.



D\_Devices



**D.** Devices

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic